amunet

CATÁLOGO DE
PRUEBAS RÁPIDAS



www.amunet.com.mx

Índice

Antidoping

Prueba rápida de antidoping 5 parámetros. 7
Prueba rápida de antidoping 5 parámetros. 8
Tiras antidoping detección de 5 parámetros. 9
Prueba rápida para alcohol en saliva. 10
Prueba rápida de Fentanilo. 11

Cardiológicas

Prueba rápida de péptidos natriuréticos. 13
Prueba rápida de Troponina Cardiac combo. 14
Prueba rápida de Dímero D. 15
Prueba Rápida Cardiac Combo Advanced. 16

Ginecología

Prueba rápida de AMH. 18
Prueba rápida de candidiasis vaginal. 19
Prueba rápida de Clamidia. 20
Prueba rápida de embarazo HCG. 21
Prueba rápida de Fibronectina Fetal. 22
Prueba rápida de pH vaginal. 23
Prueba rápida de Sífilis. 24
Prueba rápida de TORCH. 25
Prueba rápida de VIH + Sífilis. 26
Prueba rápida de VIH 1&2. 27
Prueba rápida de VIH 1&2 y p24. 28
Prueba rápida para infección en vías urinarias. 29
Prueba rápida de Gonorrea. 30
Tira para detección de embarazo HCG en orina. 31

VPH E7. 32

Tumorales

Prueba rápida de Antígeno CA-125. 34
Prueba rápida de Antígeno CA15-3. 35
Prueba rápida de Antígeno CA-19-9. 36
Prueba rápida de AFP. 37
Prueba rápida de PSA cualitativa. 38
Prueba rápida de PSA semicuantitativa. 39
Prueba rápida de transferrina y sangre oculta en heces. 40

Endocrinología

Prueba rápida de Hemoglobina Glicosilada. 42
Prueba rápida de Albúmina Cualitativa. 43
Prueba rápida de Albúmina Semicuantitativa. 44
Prueba rápida de TSH. 45
Kit de prueba de Cistatina C (Método turbidimétrico). 46
Prueba rápida de TSH (hormona estimulante de la tiroides). 47

Infecciosas Respiratorias

Prueba rápida de COVFLU-NET. 49
Prueba rápida de Streptococcus pneumoniae. 50
Prueba rápida de antígeno en saliva SARS CoV2. 51
Prueba rápida de antígeno SARS CoV2 nasofaríngea. 52
Prueba rápida para COVID19. 53
Prueba rápida de Influenza A y B. 54
Prueba rápida de Tuberculosis. 55
Prueba rápida de Virus Sincitial Respiratorio. 56
Prueba rápida de Antígeno de Mycoplasma Pneumoniae. 57
Prueba rápida de Estreptococo A. 58
Prueba rápida de Estreptococo B. 59
Prueba rápida en combo 3 en 1 para influenza A y B + SARS-COV2 + RSV. . . 60

Inmunológicas

Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Giardia Lamblia. 62
Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Salmonella Typhi. 63
Prueba rápida de Campylobacter. 64
Prueba rápida de Factor Reumatoide. 65
Prueba rápida de Giardia Lamblia. 66
Prueba rápida de IgE. 67
Prueba rápida de Mononucleosis. 68
Prueba rápida de Tétanos. 69
Prueba rápida de Tifoidea. 70
CARBAPENOS 5 EN 1. 71
Prueba rápida LABFAST Salmonella spp. 72

Pediátricas

Prueba rápida de Antígeno de Salmonella typhi. 74
Prueba rápida de Entamoeba histolytica. 75
Prueba rápida de Ferritina. 76
Prueba rápida de Rotavirus y Adenovirus. 77
Prueba rápida de Vitamina D. 78
Prueba rápida de Shigella flexneri. 79

Infecciosa Zoonótica


Prueba rápida de Chagas. 81
Prueba rápida de Chikungunya IgG e IgM. 82
Prueba rápida de Dengue NS1, IgG e IgM. 83
Prueba rápida de Dengue IgG e IgM. 84
Prueba rápida de Zika, IgG e IgM y NS1. 85
Prueba rápida de Dengue, Zika y Chikungunya (Combo Mosquito). 86

Gastrointestinales

Prueba rápida de Calprotectina. 88
Prueba rápida de Helicobacter pylori. 89
Prueba rápida de Helicobacter pylori en Heces. 90

PCR rápida

Bionet Multi PCR-rápida RT-LAMP. 92
PCR rápida para Campylobacter (jejuni/coli). 93
PCR rápida para E. coli O157:H7 (enterohemorrágica). 94
PCR rápida para Listeria monocytogenes. 95
PCR rápida para Salmonella spp. 96
PCR rápida para Staphylococcus aureus. 97
PCR rápida para Tuberculosis. 98
PCR rápida para VPH (Virus del Papiloma Humano). 99
PCR rápida-LAMP para Enterococcus faecalis. 100

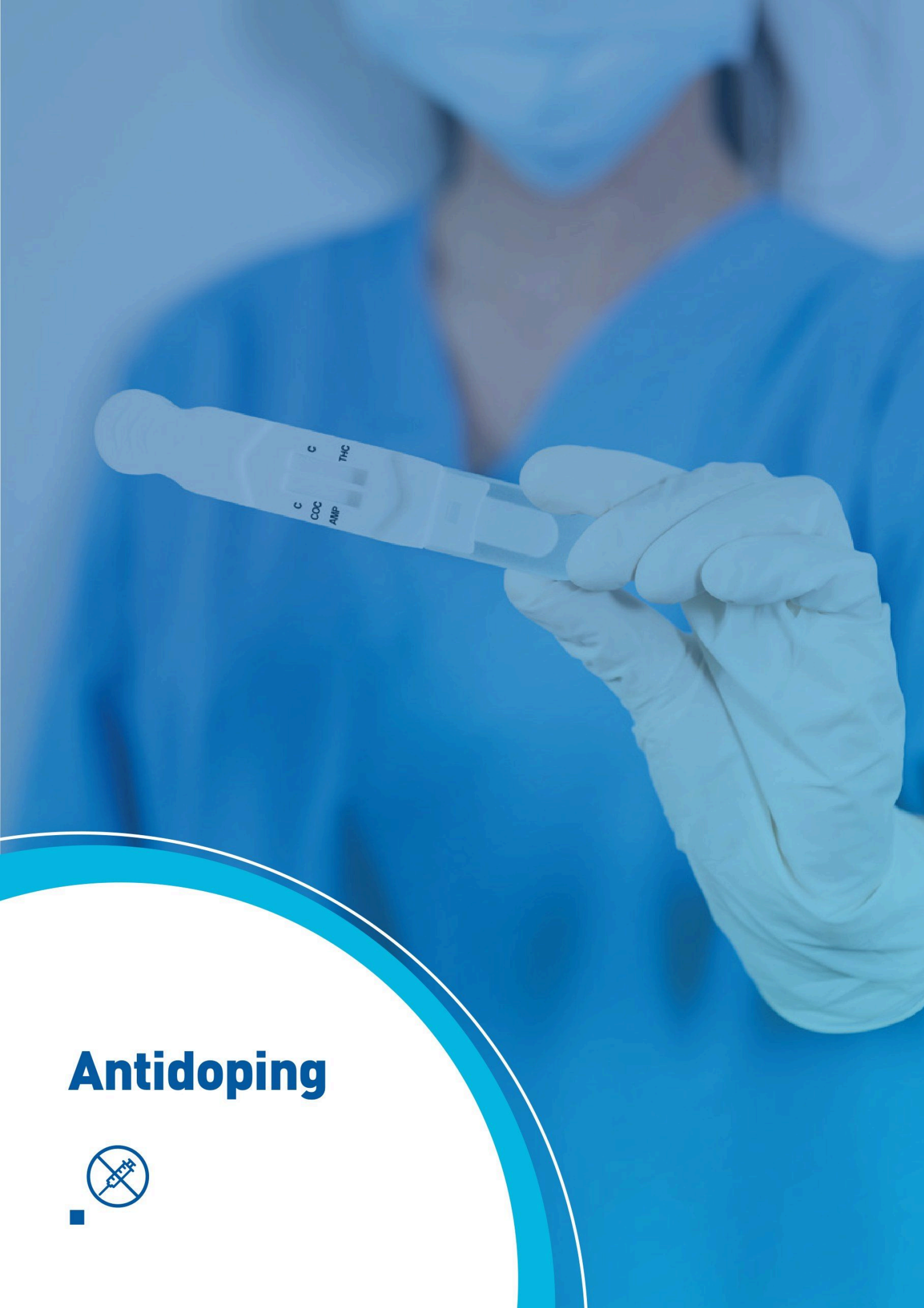

Antidoping

Prueba rápida de antidoping 5 parámetros

THC, COC, AMP, MET Y OPI EN SALIVA




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de antidoping 5 parámetros THC, COC, AMP, MET y OPI en saliva?

La prueba rápida de antidoping 5 parámetros (THC, COC, AMP, MET y OPI) es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de cocaína, marihuana, anfetamina, metanfetamina y opiáceos en saliva.

Modo de uso

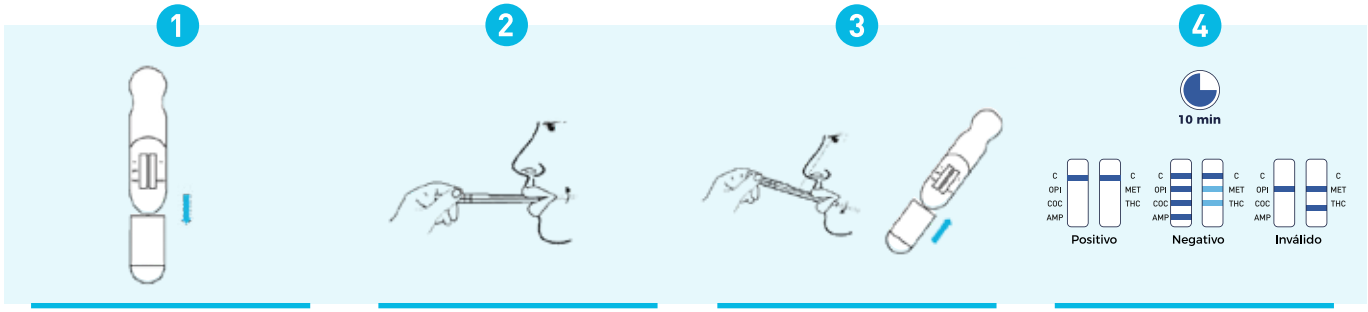

1. Retire la tapa del cartucho de prueba.
2. Coloque la almohadilla del cartucho en la boca
3. Chupe la almohadilla y mueva de arriba hacia abajo por 60 segundos.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMADB01.10	Prueba para detección de THC, COC, AMP, MET y OPI	Saliva	10	Lápiz	$1,386.00
DMADB01.05	Prueba para detección de THC, COC, AMP, MET y OPI	Saliva	5	Lápiz	$730.00
DMADB01.02	Prueba para detección de THC, COC, AMP, MET y OPI	Saliva	2	Lápiz	$308.00

Registro sanitario COFEPRIS 1400R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de antidoping 5 parámetros

THC, COC, AMP, MET Y OPI EN SANGRE

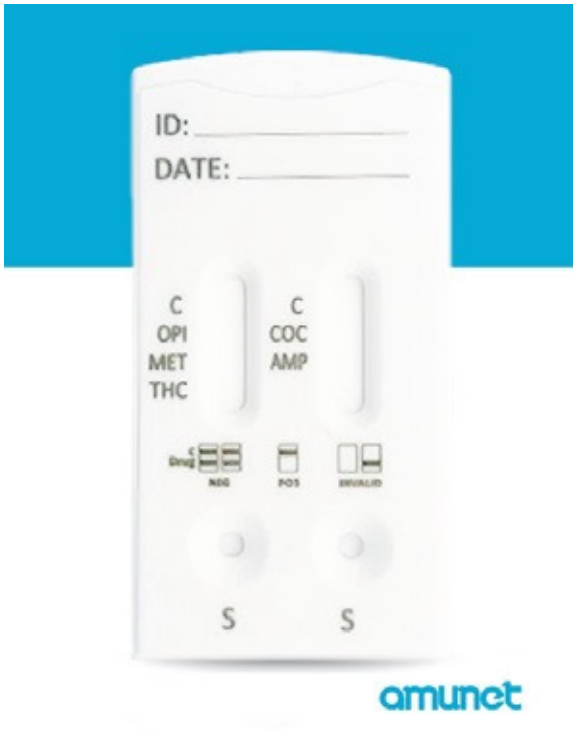


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de antidoping 5 parámetros THC, COC, AMP, MET y OPI en sangre?

La prueba de antidoping 5 parámetros (THC, COC, AMP, MET y OPI) es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de cocaína, marihuana, anfetamina, metanfetamina y opiáceos en sangre total.

Modo de uso

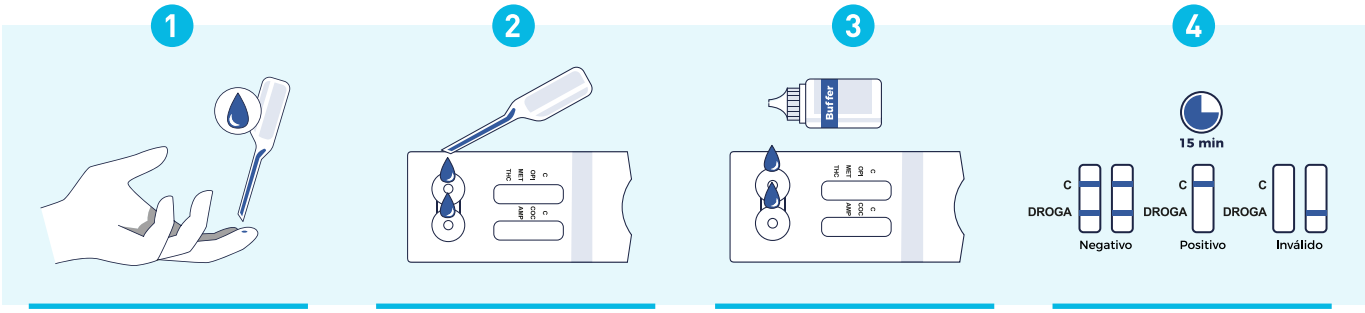

1. Recolecte 4 gotas de sangre, suero o plasma.
2. Coloque 2 gotas de sangre, suero o plasma a cada pocillo en el casete de prueba
3. Agregue 1 gota de buffer a cada pocillo en el casete de prueba
4. Puede interpretarlos en 15 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMADS01.10	Prueba para detección de THC, COC, AMP, MET y OPI	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,291.00
DMADS01.05	Prueba para detección de THC, COC, AMP, MET y OPI	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$730.00
DMADS01.02	Prueba para detección de THC, COC, AMP, MET y OPI	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$340.00

Registro sanitario COFEPRIS 1400R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Tiras antidoping detección de 5 parámetros


THC, MET, AMP, COC, OPI EN ORINA



Reseña

¿Qué son las tiras de antidoping detección de 5 parámetros, THC, MET, AMP, COC, OPI en orina?

El tubo de tiras para antidoping detección de multidrogas es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de cocaína, marihuana, anfetamina, metanfetamina y opiáceos en orina humana.

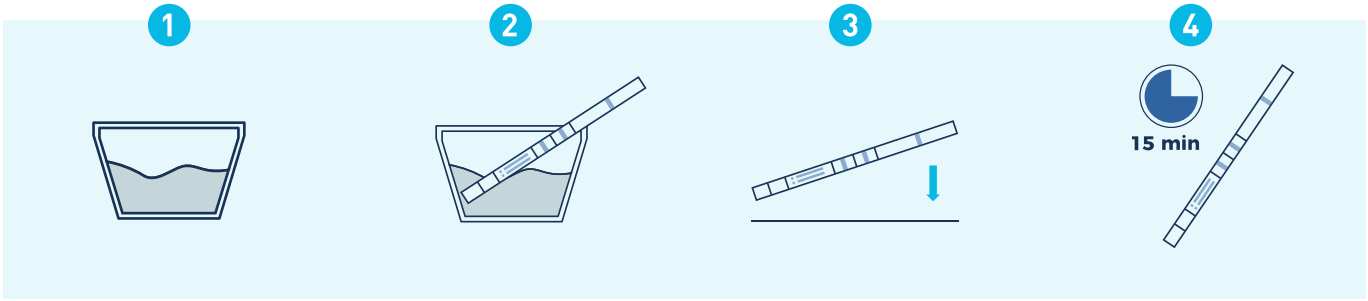

1. Recolecte la muestra en un contenedor limpio.
2. Sumerja la tira en la muestra durante 10-15 segundos.
3. Coloque la tira en una superficie plana.
4. Interprete los resultados a los 15 min.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMAD002.10	Tira para detección de THC, MET, AMP, COC, OPI	Orina	50	Tiras	$618.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida para alcohol en saliva

ALCOHOL EN SALIVA



Reseña

¿Qué es la prueba rápida para alcohol en saliva?

Prueba rápida de un solo paso para la detección semicuantitativa de alcohol en saliva. Es un método simple y conveniente para detectar el consumo de alcohol y estimar el nivel de intoxicación alcohólica. Utiliza una tecnología química para la detección de alcohol que ha sido un éxito con la policía y en programas correccionales.

Modo de uso

1. Coloque el recolector en la boca y limpie el interior de la boca y la lengua durante 3 minutos, hasta que la esponja se sature.
2. Coloque el recolector en el tubo colector, presiónelo contra el colador y deseche el recolector.
3. Invierta el tubo y transfiera 3 gotas de saliva (≈120 µL) al pozo "S" del cartucho.
4. Interprete el resultado entre los 3 y 5 minutos comparando con la carta de color.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMALC01.10	Prueba rápida para alcohol en saliva	Saliva	10	Cassette	$380.00
DMALC01.05	Prueba rápida para alcohol en saliva	Saliva	5	Cassette	$265.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Fentanilo




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Fentanilo?

Tira rápida de fentanilo en orina con punto de corte de 20 ng/mL. El panel de opiaceos (OPI) no lo detecta. Resultado en 5 minutos; sensibilidad 96.2 % y especificidad 99.5 % frente a GC/MS. Tubo con 50 tiras. Uso profesional.

amunet

Modo de uso

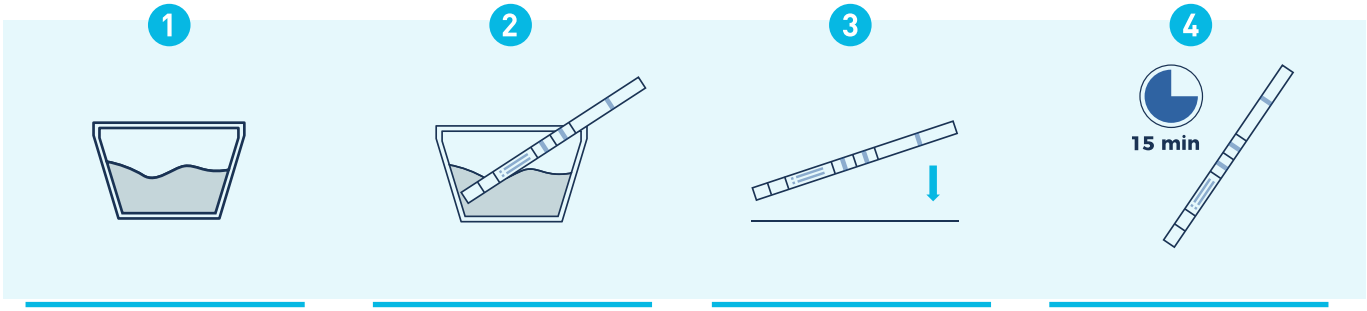

Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMFEN01	Prueba rápida de Fentanilo	Orina	50	Tiras	$1,200.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Cardiológicas

Prueba rápida de péptidos natriuréticos

NT-proBNP




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de péptidos natriuréticos?

La prueba rápida de péptidos natriuréticos (NT-proBNP) es un auxiliar diagnóstico que se utiliza principalmente para evaluar y monitorizar la insuficiencia cardíaca. El NT-proBNP es un biomarcador liberado por el corazón en respuesta a la presión elevada dentro del corazón, que suele ser un indicador de insuficiencia cardíaca.

Modo de uso

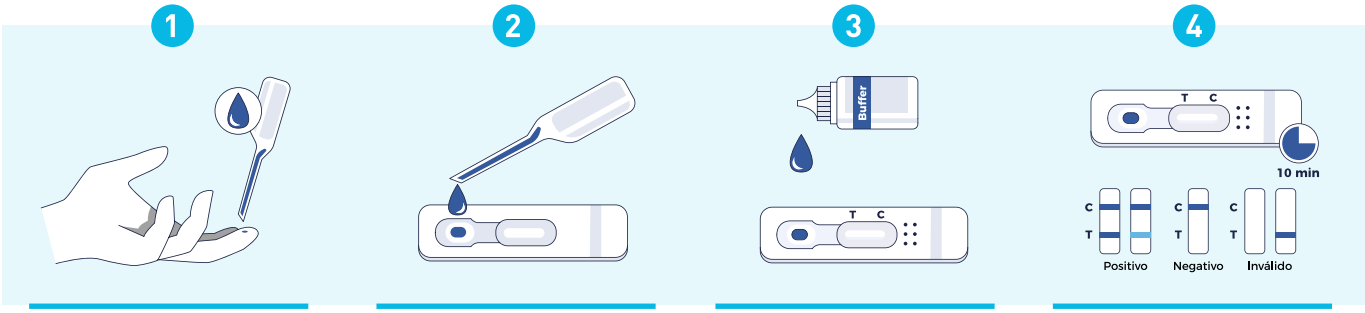

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMPRO01.10	Prueba rápida de péptidos natriuréticos	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,354.00
DMPRO01.05	Prueba rápida de péptidos natriuréticos	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$755.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Troponina Cardiac combo




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Troponina Cardiac combo?

La prueba rápida de Troponina Cardiac Combo detecta a partir de 1 ng/mL los marcadores cardiacos creatina cinasa (CK-MB), mioglobina y troponina I por medio de muestra de sangre capilar. De salir positiva, está fuertemente asociada a infarto agudo al miocardio y a miocarditis.

Modo de uso

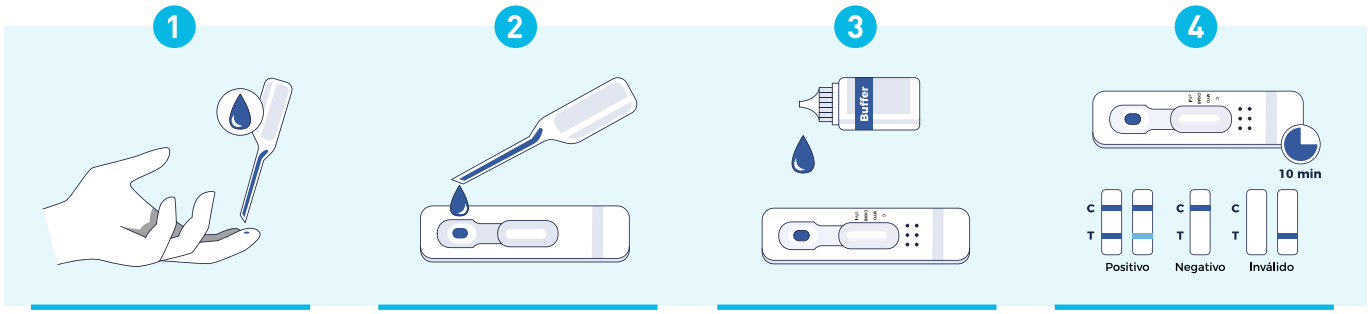


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMMCT01.10	Prueba rápida Troponina Cardiac combo	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,450.00
DMMCT1.05	Prueba rápida Troponina Cardiac combo	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$800.00
DMMCT01.02	Prueba rápida Troponina Cardiac combo	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$400.00

Registro sanitario COFEPRIS 1151R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Dímero D

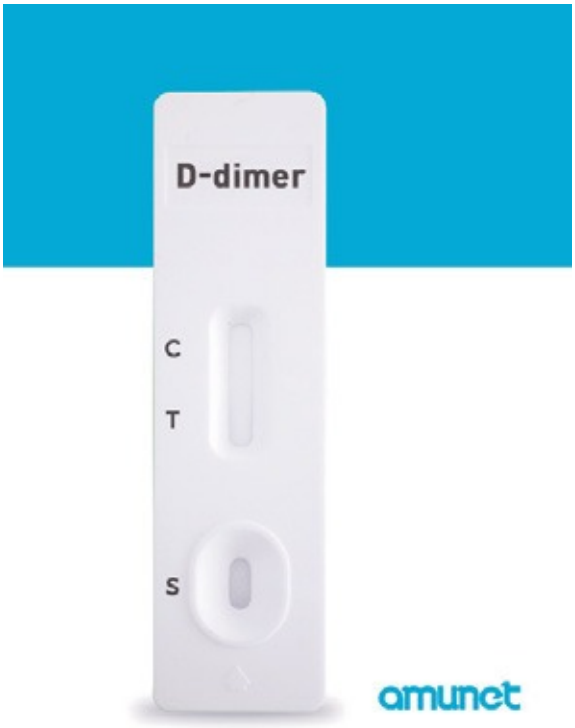


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Dímero D?

La prueba rápida de Dímero D es una prueba diagnóstica utilizada para medir los niveles de fragmentos de fibrina, conocidos como dímero D, que se liberan en la sangre cuando se forman y descomponen coágulos de sangre.

Modo de uso

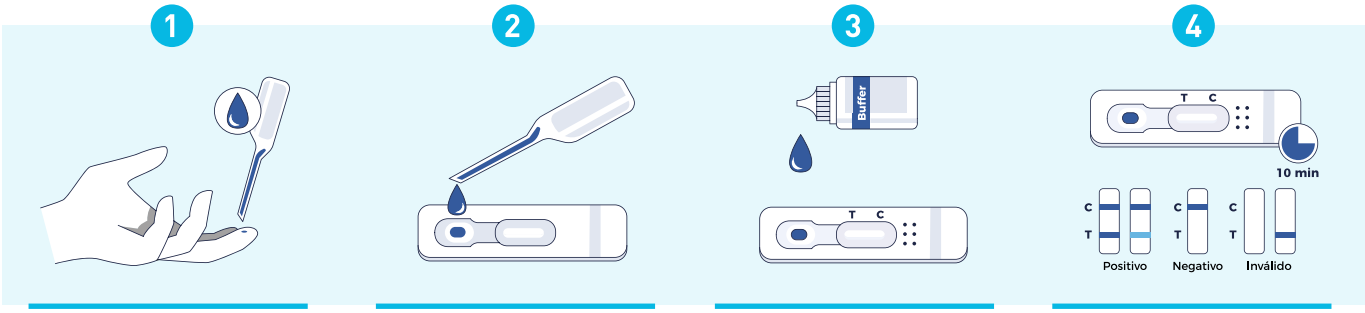


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMDMD01.20	Prueba rápida de Dímero D	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,800.00
DMDMD01.05	Prueba rápida de Dímero D	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$465.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba Rápida Cardiac Combo Advanced

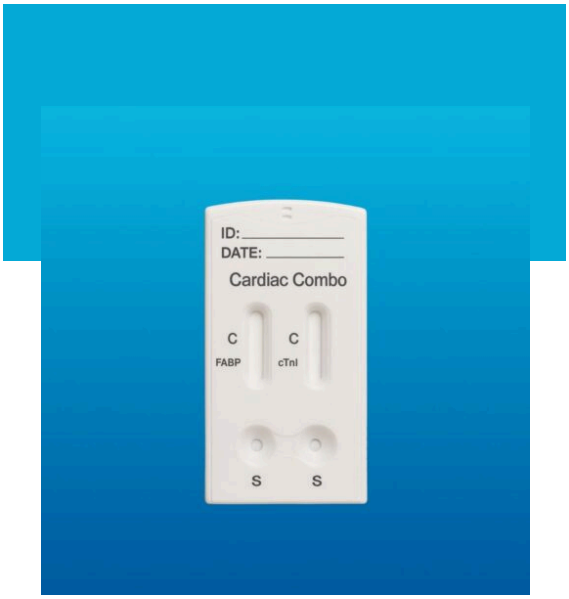


Reseña

¿Qué es la prueba Rápida Cardiac Combo Advanced?

Prueba rápida cualitativa y diferencial de H-FABP (proteína de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco) y troponina cardíaca I en sangre total, capilar, suero o plasma, auxiliar en la evaluación temprana del síndrome coronario agudo. Dos gotas por pozo y resultado en 10 minutos; sensibilidad 89.9 % (H-FABP) y 99.4 % (troponina I). Uso profesional.

amunet

Modo de uso

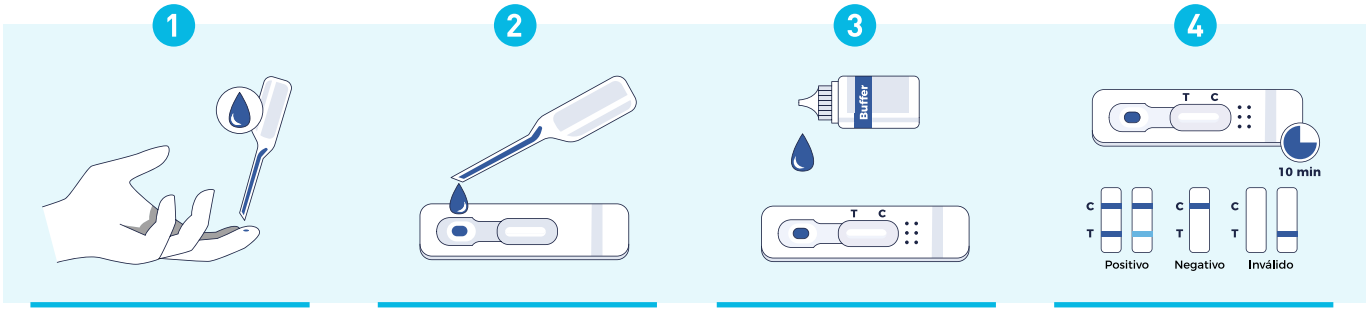

Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMAIM01-10	Prueba Rápida Cardiac Combo Advanced	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$2,000.00
DMAIM01-05	Prueba Rápida Cardiac Combo Advanced	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$1,175.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Ginecología

Prueba rápida de AMH

HORMONA ANTI-MÜLLERIANA




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de AMH?

La prueba rápida de AMH detecta la hormona antimülleriana (AMH), una hormona producida por las células de los folículos ováricos en desarrollo en los ovarios. Su nivel en sangre refleja la cantidad de folículos antrales presentes y, por lo tanto, la reserva ovárica de una mujer. La AMH es estable a lo largo del ciclo menstrual, lo que la convierte en un marcador confiable de la función ovárica.

Modo de uso

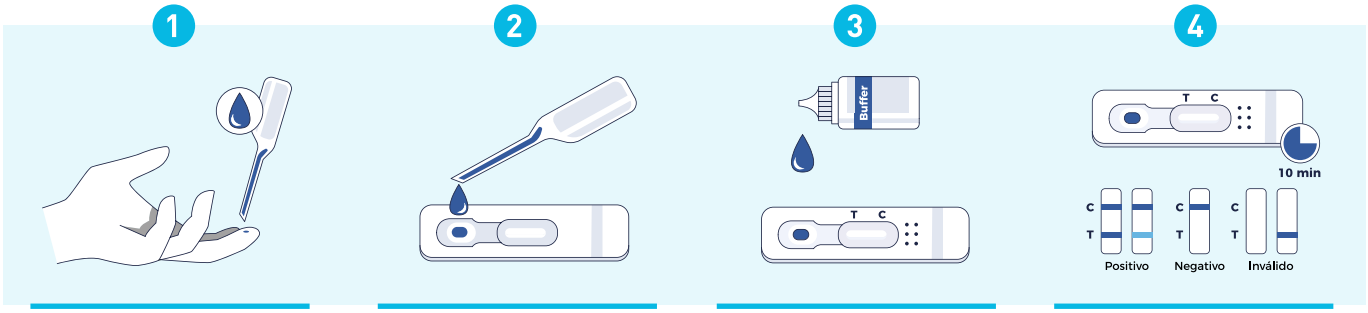

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMAMH01.10	Prueba rápida de AMH (Hormona -Anti-Mülleriana)	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$2,250.00
DMAMH01.02	Prueba rápida de AMH (Hormona -Anti-Mülleriana)	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$510.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de candidiasis vaginal




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de candidiasis vaginal?

La prueba rápida de candidiasis vaginal es una herramienta diagnóstica valiosa para la detección rápida y precisa de infecciones por Candida albicans en mujeres con síntomas de vaginitis. Permite iniciar un tratamiento adecuado y dirigido contra el hongo, mejorando así el manejo de las infecciones vaginales por hongos y la salud vaginal en general.

Modo de uso

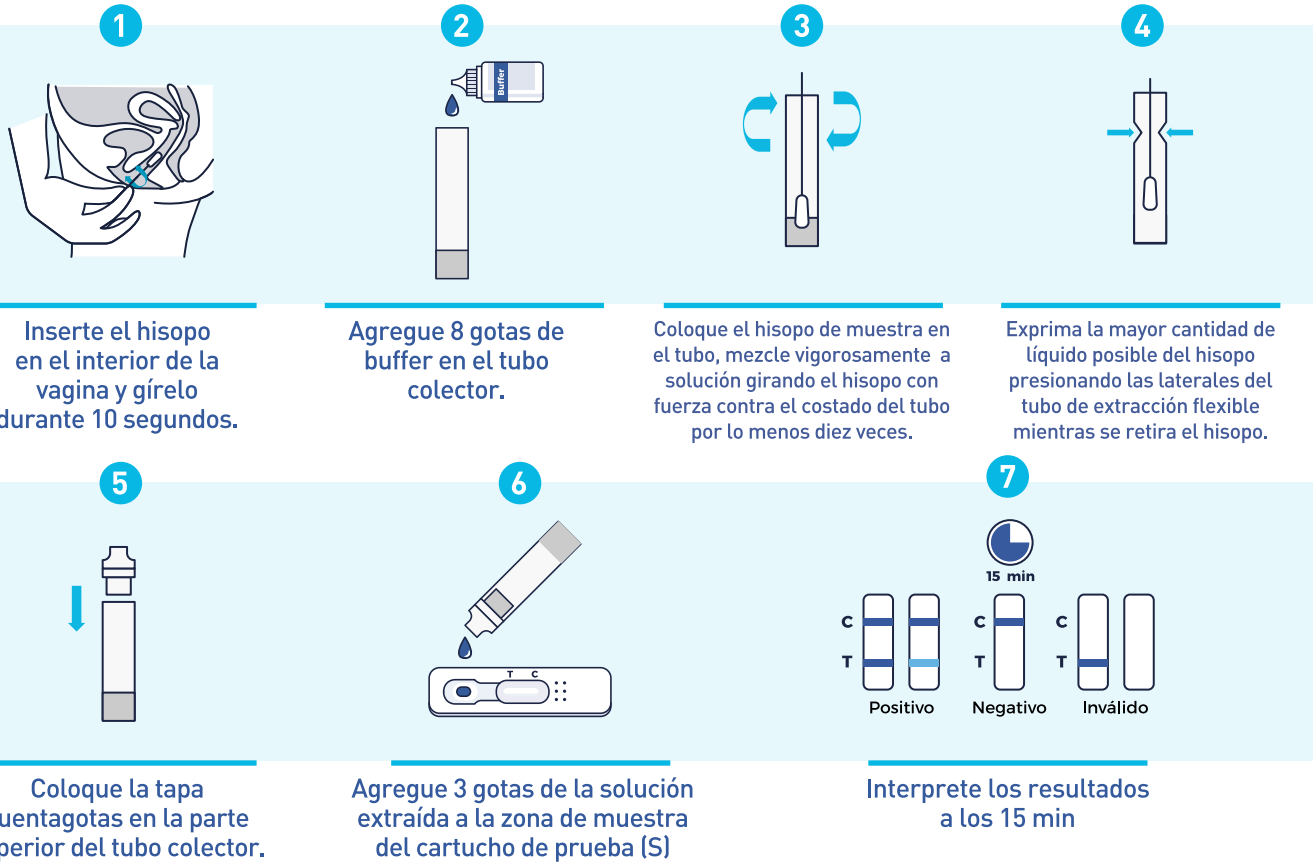

1. Inserte el hisopo en el interior de la vagina y gírelo durante 10 segundos.
2. Agregue 8 gotas de buffer en el tubo colector.
3. Coloque el hisopo de muestra en el tubo, mezcle vigorosamente a solución girando el hisopo con fuerza contra el costado del tubo por lo menos diez veces.
4. Exprima la mayor cantidad de líquido posible del hisopo presionando las laterales del tubo de extracción flexible mientras se retira el hisopo.
5. Coloque la tapa cuentagotas en la parte superior del tubo colector.
6. Agregue 3 gotas de la solución extraída a la zona de muestra del cartucho de prueba (S)
7. Interprete los resultados a los 15 min

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCAN01.20	Prueba rápida de candidiasis vaginal	Vaginal	20	Cassette	$1,800.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Clamidia




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Clamidia?

La prueba rápida de clamidia es un método diagnóstico que permite detectar la presencia de la bacteria Chlamydia trachomatis, el agente causante de la infección de transmisión sexual conocida como clamidiasis. Esta prueba se utiliza para identificar rápidamente la infección en individuos sintomáticos o asintomáticos, facilitando el tratamiento y la prevención de complicaciones.

Modo de uso

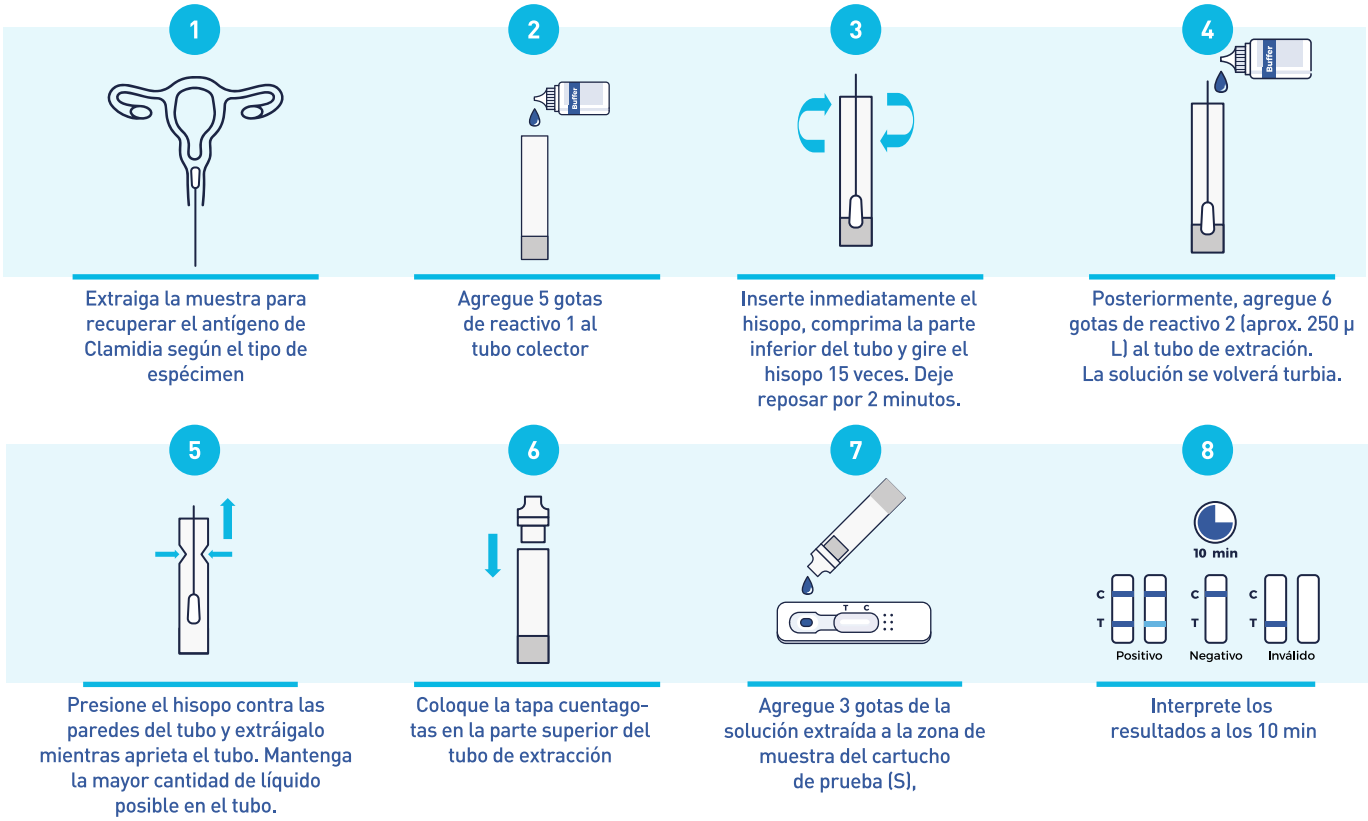

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCLAM01.10	Prueba rápida de Clamidia	Exudado Cervical	10	Cassette	$680.00
DMCLAM01.05	Prueba rápida de Clamidia	Exudado Cervical	5	Cassette	$415.00

Registro sanitario COFEPRIS 1685R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de embarazo HCG




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de embarazo HCG?

La prueba rápida de embarazo HCG (Gonadotropina Coriónica Humana) es un método de diagnóstico que se utiliza para determinar si una mujer está embarazada. La prueba detecta la presencia de la hormona HCG en la orina, que es producida por el cuerpo poco después de la implantación del embrión en el útero.

Modo de uso

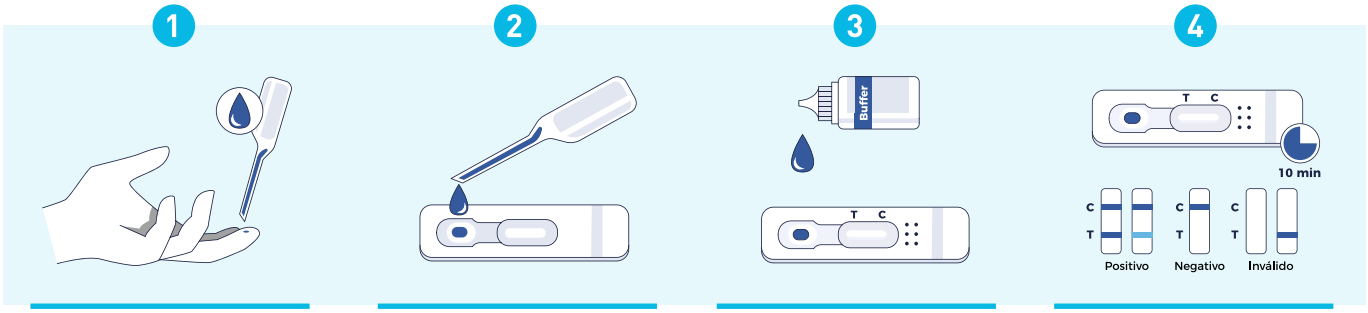

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMHCG-01.20	Prueba rápida de embarazo HCG	Multimuestra	20	Cassette	$380.00
DMHCG-1	Prueba rápida de embarazo HCG	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$600.00

Registro sanitario COFEPRIS 0131R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Fibronectina Fetal




DETECCIÓN DE PARTO PREMATURO

Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Fibronectina Fetal?

La prueba rápida de Fibronectina Fetal (fFN) es un método diagnóstico utilizado para evaluar el riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas. La fibronectina fetal es una proteína que actúa como un "pegamento" entre la membrana amniótica y el útero. Normalmente, esta proteína no está presente en las secreciones vaginales entre las semanas 22 y 35 de gestación, a menos que haya riesgo de parto prematuro.

Modo de uso

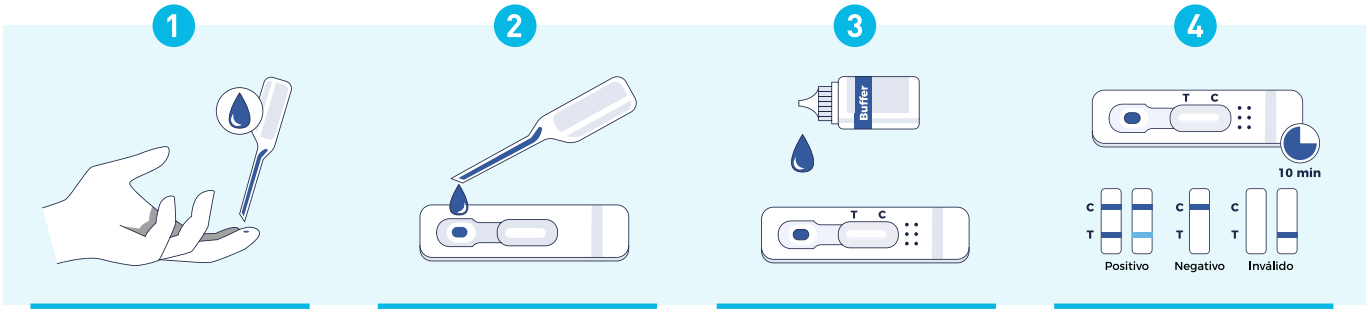

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMFFN01.20	Prueba rápida de Fibronectina Fetal	Secreción Vaginal	20	Cassette	$1,730.00
DMFFN01.05	Prueba rápida de Fibronectina Fetal	Secreción Vaginal	5	Cassette	$1,015.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de pH vaginal

INFECCIONES VAGINALES




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de pH vaginal?

La prueba rápida de pH vaginal es una herramienta diagnóstica que se utiliza para evaluar el pH de las secreciones vaginales y ayudar a detectar infecciones vaginales. El pH vaginal normal oscila entre 3.8 y 4.5. Valores fuera de este rango pueden indicar una infección o desequilibrio. Esta prueba es rápida, fácil de realizar y no invasiva.

Modo de uso

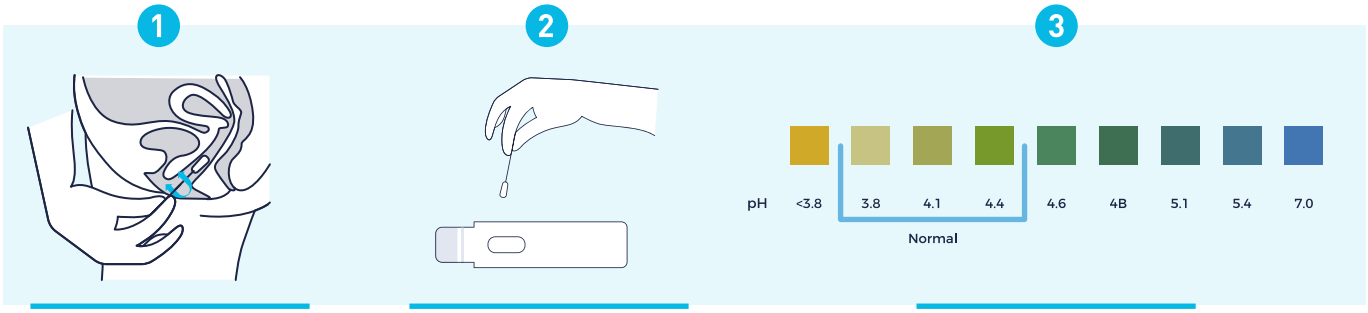


1. Inserte el hisopo suavemente en la vagina por 10 segundos
2. Frote el hisopo en el área de prueba al menos 5 veces
3. Interprete el resultado inmediatamente

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMPHV01.20	Prueba rápida de pH vaginal	Vaginal	20	Cassette	$1,120.00
DMPHV01.05	Prueba rápida de pH vaginal	Vaginal	5	Cassette	$355.00
DMPHV01.02	Prueba rápida de pH vaginal	Vaginal	2	Cassette	$208.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Sífilis

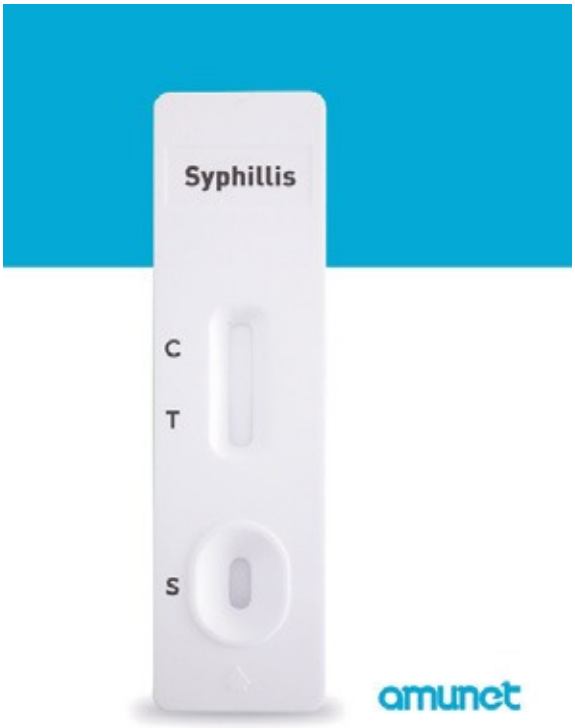


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Sífilis?

La prueba rápida de sífilis es un método de diagnóstico utilizado para detectar la presencia de anticuerpos contra la sífilis. Esta prueba se realiza de manera rápida y sencilla, generalmente proporcionando resultados en menos de 15 minutos.

Modo de uso

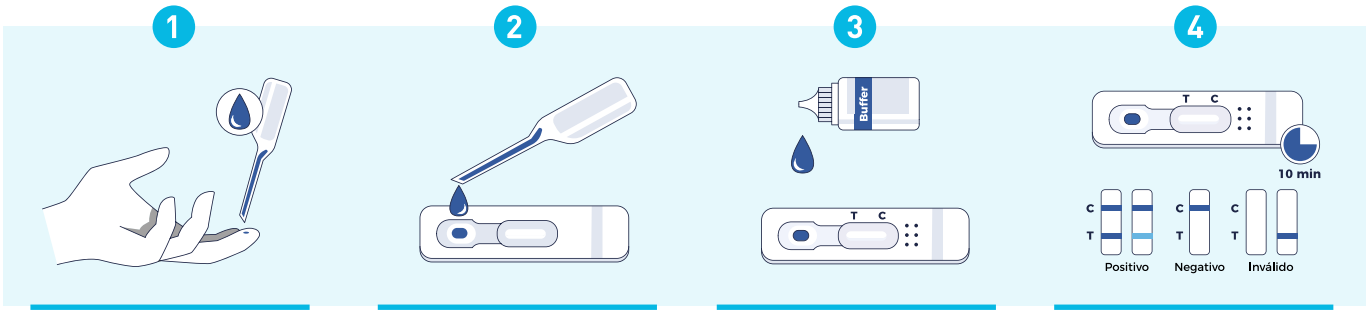

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMTMP01.20	Prueba rápida de Sífilis	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$720.00
DMTMP01.05	Prueba rápida de Sífilis	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$255.00
DMTMP01.02	Prueba rápida de Sífilis	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$150.00

Registro sanitario COFEPRIS 1596R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de TORCH

IgG e IgM




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de TORCH IgG e IgM?

La prueba rápida de TORCH IgG e IgM es una herramienta auxiliar para el diagnóstico que detecta una serie de infecciones que son transmitidas de la madre al hijo conocidas con el nombre de TORCH haciendo referencia a las siguientes enfermedades: Toxoplasmosis, Rubéola, Citomegalovirus y Herpes y se basa en la inmunocromatografía de flujo lateral (LFIA).

Modo de uso

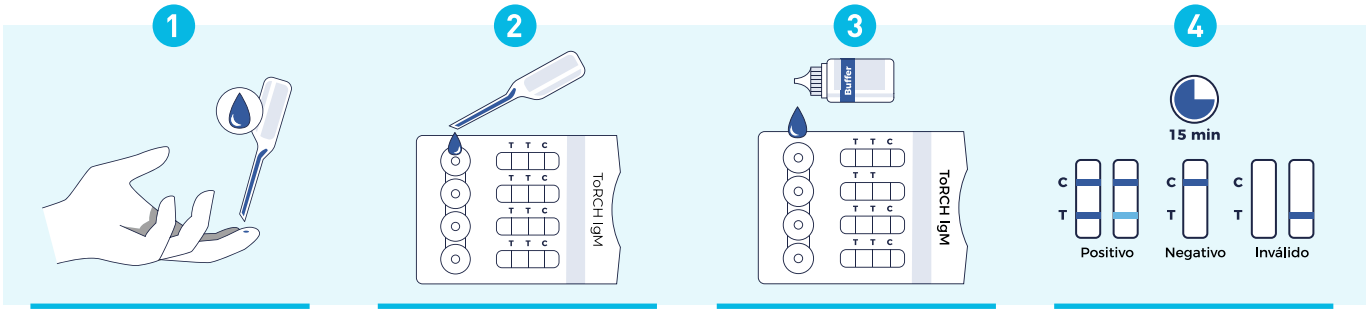

1. Recolecte 8 gotas de sangre,suero o plasma con el gotero
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 2 gotas de buffer a cada de pocillo en el casete de prueba
4. Espere la aparición de líneas de color. Puede interpretar los resultados en 15 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMTOR02.20	Prueba rápida de TORCH IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$2,300.00
DMTOR02.05	Prueba rápida de TORCH IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de VIH + Sífilis

COMBO




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de VIH + Sífilis?

La prueba rápida de VIH + Sífilis combo es un método diagnóstico que permite la detección simultánea y rápida de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la sífilis, una infección bacteriana causada por Treponema pallidum. Este tipo de prueba es diseñada para proporcionar resultados en un corto período de tiempo, generalmente en 15 minutos, utilizando una sola muestra de sangre.

Modo de uso

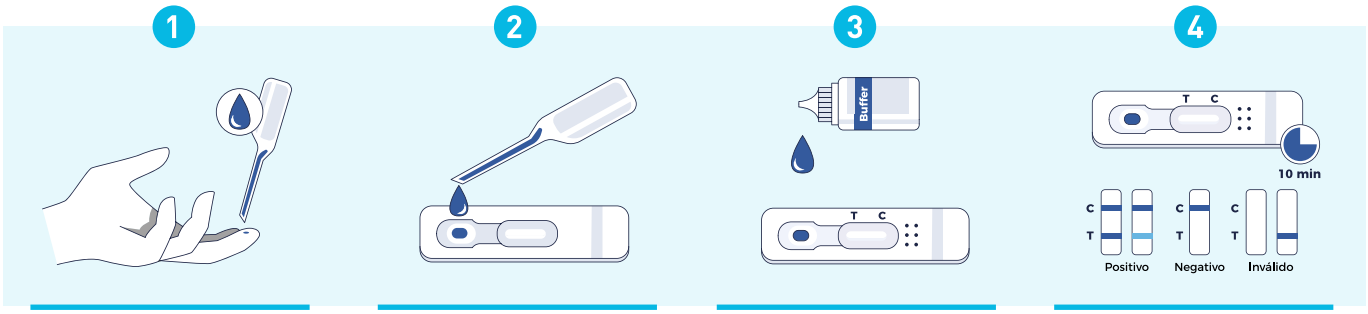


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMVSI01.10	Prueba rápida de VIH + Sífilis (combo)	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$750.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de VIH 1&2

3ra generación

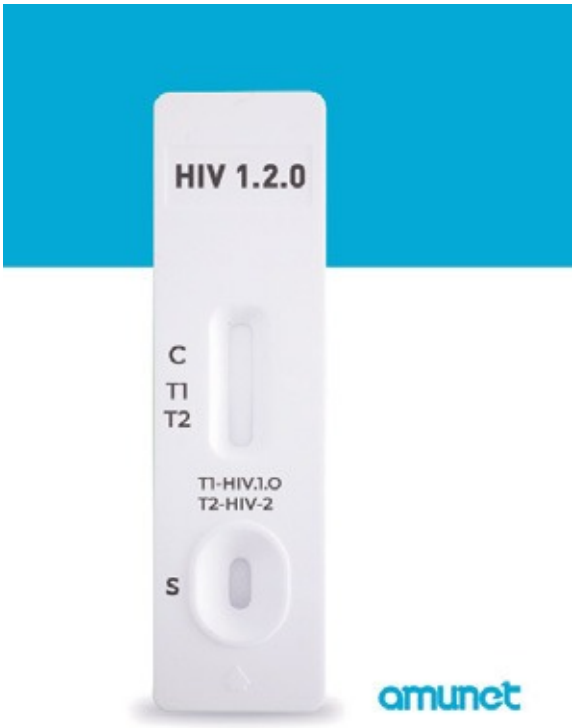


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de VIH 1&2 3ra generación?

La prueba rápida de VIH 1&2 de tercera generación es un método de diagnóstico que detecta la presencia de anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 en la sangre. Estas pruebas están diseñadas para proporcionar resultados en 10 minutos. La "tercera generación" se refiere a una etapa de desarrollo de pruebas en la que la sensibilidad y la especificidad han mejorado respecto a las generaciones anteriores.

Modo de uso

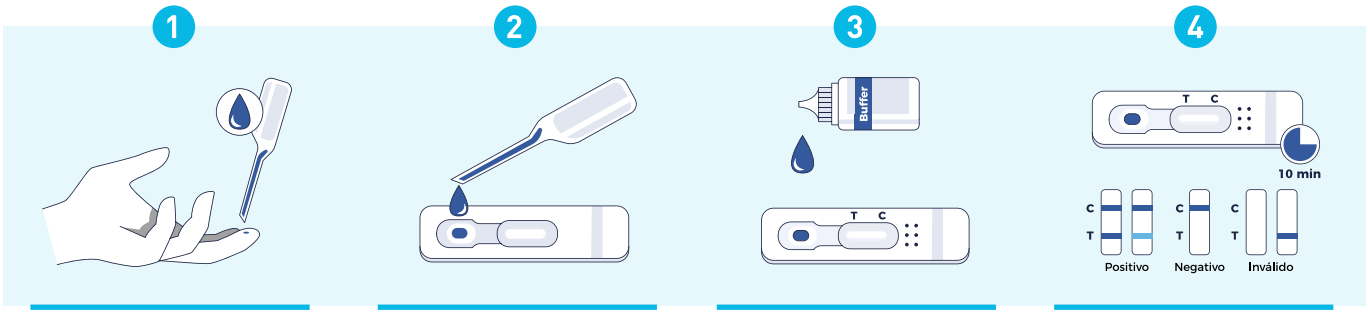

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMVIH01.05	Prueba rápida de VIH 1&2 (3ra generación)	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$386.00
DMVIH01.02	Prueba rápida de VIH 1&2 (3ra generación)	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$190.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de VIH 1&2 y p24

4ta generación




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de VIH 1&2 y p24?

La prueba rápida de VIH 1&2 y p24 de cuarta generación es un método de diagnóstico avanzado diseñado para detectar tanto los anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 como el antígeno p24 del virus en la sangre. Esta prueba proporciona resultados rápidos en 10 minutos, y es más sensible que las pruebas de generaciones anteriores porque puede detectar la infección en una etapa más temprana.

Modo de uso

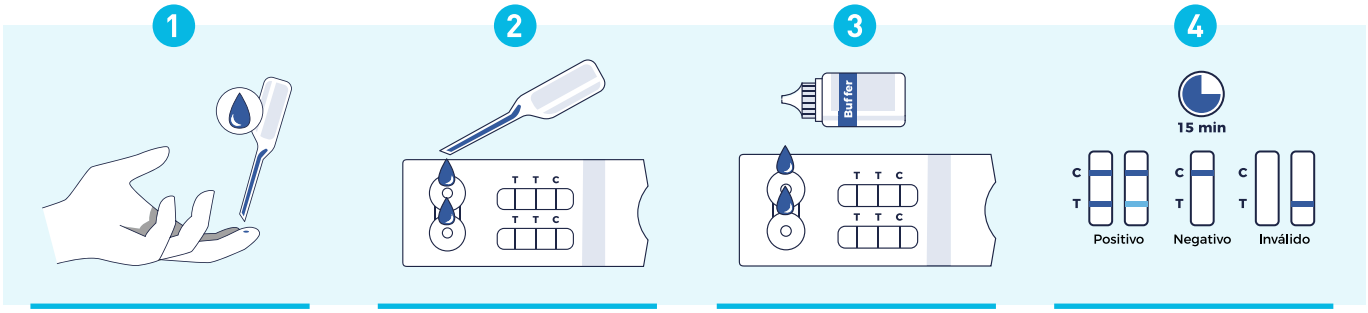


1. Recolecte 3 gotas de sangre, suero o plasma con el gotero.
2. Coloque 2 gotas de sangre, suero o plasma a cada pocillo en el casete de prueba
3. Agregue 1 gota de buffer a cada pocillo en el casete de prueba
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMVIH02.05	Prueba rápida de VIH 1&2 y p24 (4ta generación)	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$578.00
DMVIH02.02	Prueba rápida de VIH 1&2 y p24 (4ta generación)	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$250.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida para infección en vías urinarias

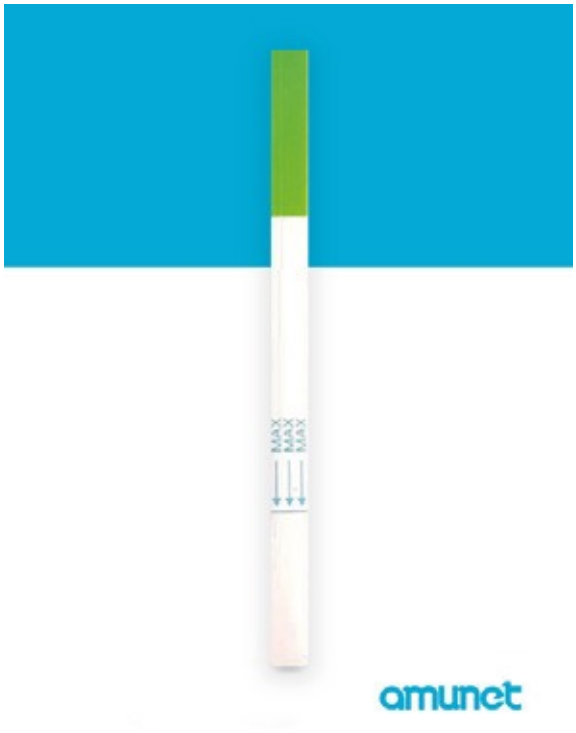


Reseña

¿Qué es la prueba rápida para infección en vías urinarias?

La prueba rápida para infección en vías urinarias (IVU) es un método diagnóstico diseñado para detectar la presencia de infecciones urinarias de manera rápida y sencilla.

Modo de uso

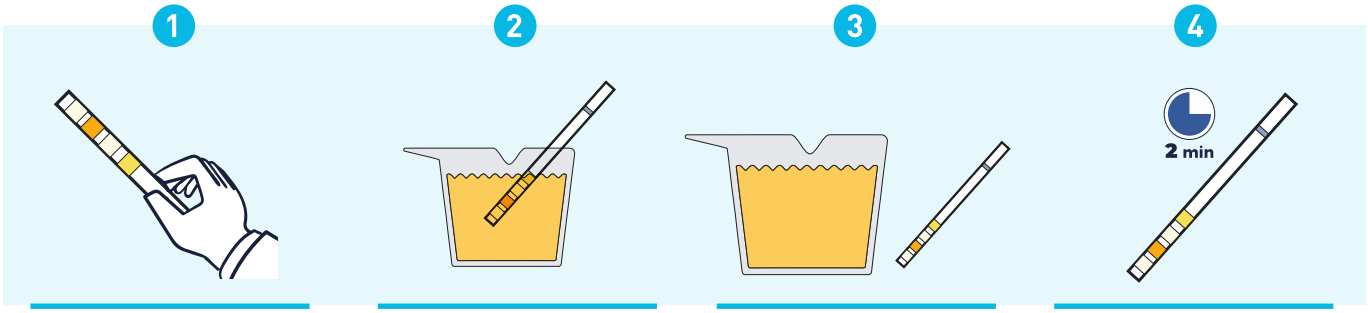

1. Abrir el empaque y sacar la tira reactiva. No tocar los campos de prueba
2. Sumergir la tira reactiva en la muestra de orina. ATENCIÓN: asegurarse de que las cuatro tiras estén sumergidas durante 2 segundos.
3. Remover la tira reactiva y eliminar el exceso de orina contra el borde del contenedor o con algún material absorbente (una toalla de papel, por ejemplo)
4. Interprete los resultados a los 2 min

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMIVU01.50	Prueba rápida para Infección en vías urinarias	Orina	50	Tiras	$599.00
DMIVU01.25	Prueba rápida para Infección en vías urinarias	Orina	25	Tiras	$477.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Gonorrea




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Gonorrea?

Detección del antígeno de Neisseria gonorrhoeae en exudado uretral o cervical. Resultado en 10 minutos, sin cultivo ni PCR; sensibilidad 94.4 % y especificidad 96.9 % frente a cultivo. Incluye hisopos y reactivos de extracción. Uso profesional.

amunet

Modo de uso

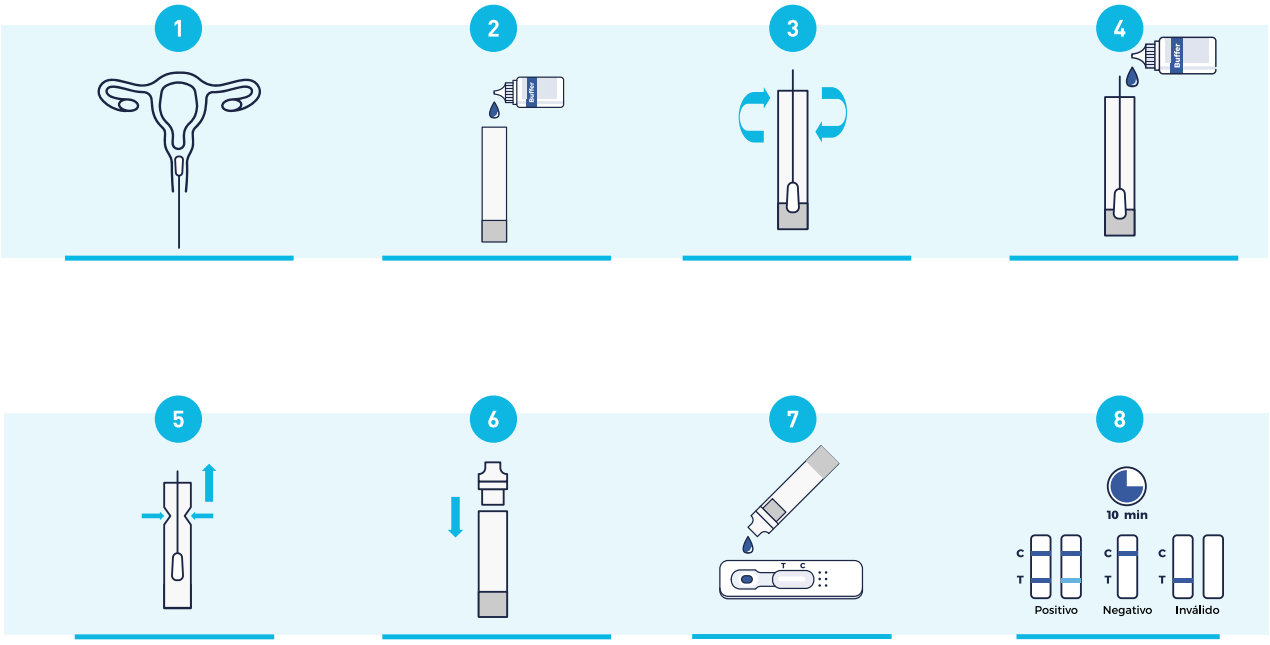


Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMGON01.10	Prueba rápida de Gonorrea	Exudado uretral/ cervical	10	Cassette	$405.00
DMGON01.05	Prueba rápida de Gonorrea	Exudado uretral/ cervical	5	Cassette	$230.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Tira para detección de embarazo HCG en orina

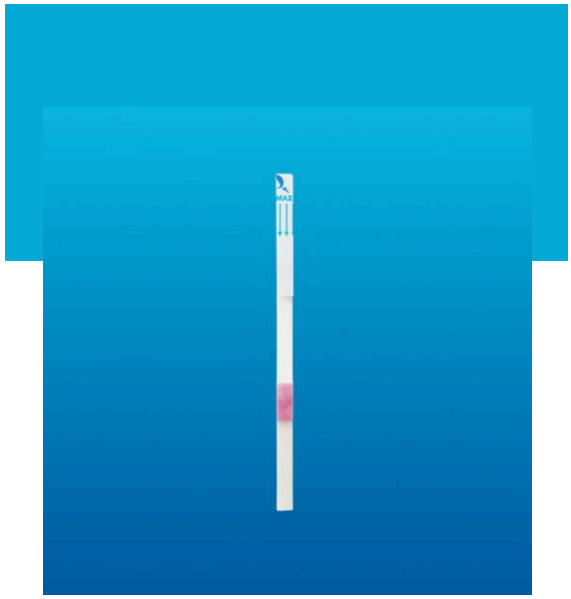


Reseña

¿Qué es la tira para detección de embarazo HCG en orina?

Tira reactiva para detección cualitativa de hCG en orina con umbral de 10 mUI/mL: inmersión de 10 segundos y lectura a los 10 minutos, sin gotero ni buffer. Sensibilidad 99.99 % y especificidad 99.4 %. Formato económico para tamizaje de alto volumen. Uso profesional.

amunet

Modo de uso

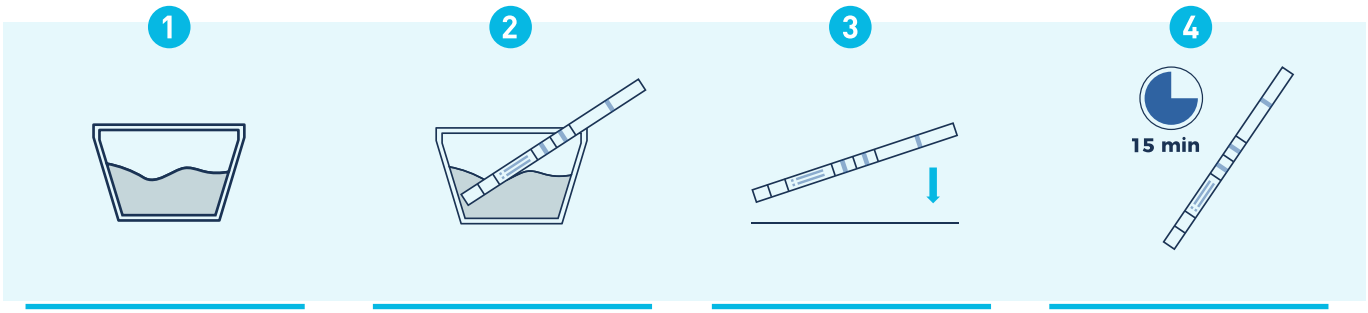

Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMHCG-03-1	Tira para detección de embarazo HCG en orina	Orina	—	Tiras	$250.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

VPH E7

Reseña


¿Qué es la prueba VPH E7?

Prueba rápida de flujo lateral que detecta la oncoproteína E7 del Virus del Papiloma Humano en hisopado cervical, con lectura visual a los 15 minutos. Producto de uso exclusivo en investigación (RUO): se estudia junto a una prueba validada de ADN, nunca en su lugar. Caja con 10 pruebas. Información dirigida a profesionales de la salud.



amunet

Modo de uso

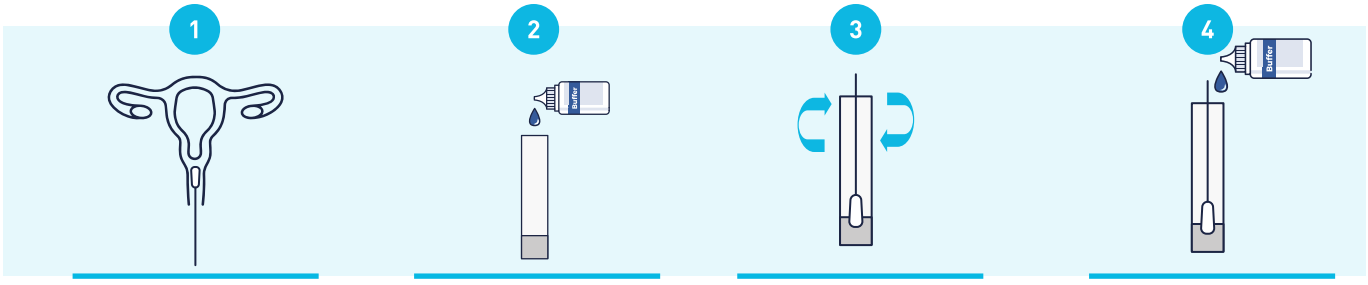



Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMVPE01	VPH E7	Exudado cervical	10	Cassette	$3,000.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Tumorales

Prueba rápida de Antígeno CA-125




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Antígeno CA-125?

La prueba rápida de antígeno CA-125 es una prueba diagnóstica utilizada para medir los niveles de la proteína CA-125 en la sangre. CA-125 es un marcador tumoral que se encuentra en niveles elevados en algunas personas con ciertos tipos de cáncer, particularmente el cáncer de ovario.

Modo de uso

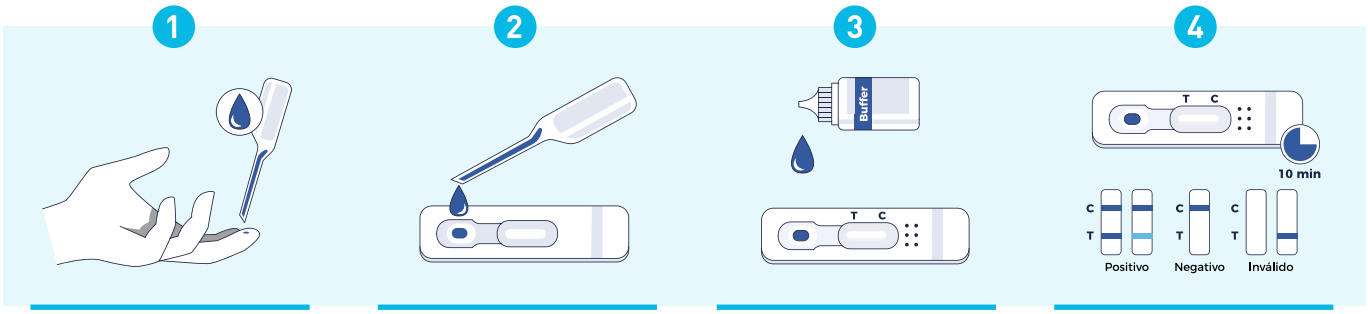

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCA001.10	Prueba rápida de antígeno CA-125	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,354.00
DMCA001.05	Prueba rápida de antígeno CA-125	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$900.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Antígeno CA15-3




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Antígeno CA15-3?

La prueba rápida de antígeno CA15-3 es un análisis de sangre que mide los niveles de CA15-3 en el cuerpo. El CA15-3 es una proteína que puede encontrarse en concentraciones elevadas en algunas personas con cáncer de mama.

Modo de uso

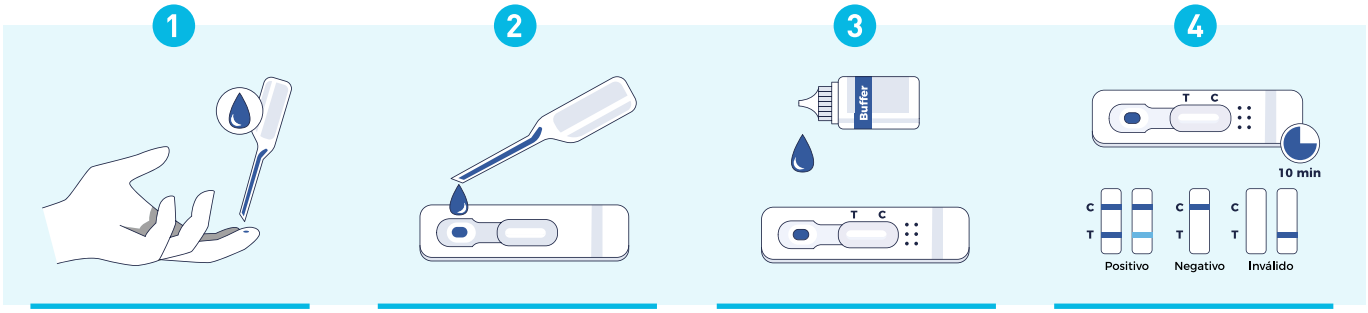

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCAM01.10	Prueba rápida de Antígeno CA15-3	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,550.00
DMCAM01.05	Prueba rápida de Antígeno CA15-3	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$900.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Antígeno CA-19-9




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Antígeno CA-19-9?

La prueba rápida de Antígeno CA-19-9 es una prueba cualitativa que ayuda a detectar este marcador tumoral en sangre, suero o plasma. Por esta razón es un auxiliar de diagnóstico y control para nuestros pacientes en quienes se sospecha de cáncer de páncreas.

Modo de uso

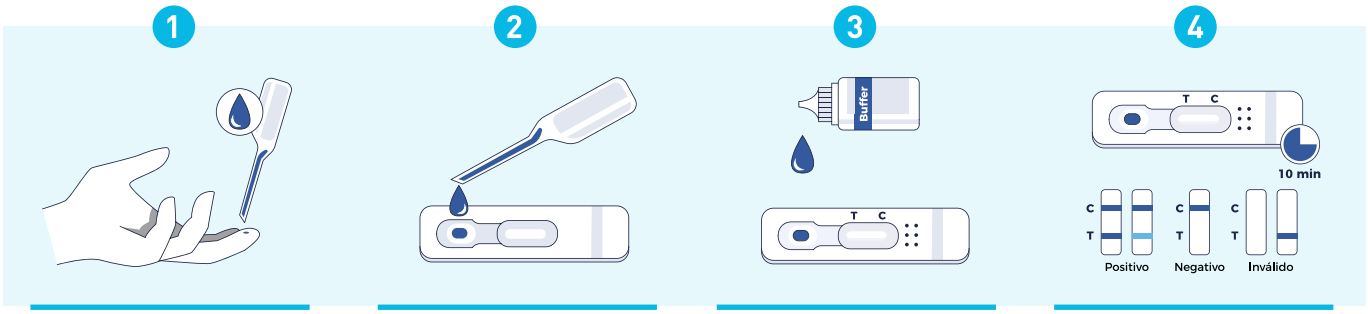


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCAP01.10	Prueba rápida de Antígeno CA-19-9	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,300.00
DMCAP01.05	Prueba rápida de Antígeno CA-19-9	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$725.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de AFP

Alfa-fetoproteína

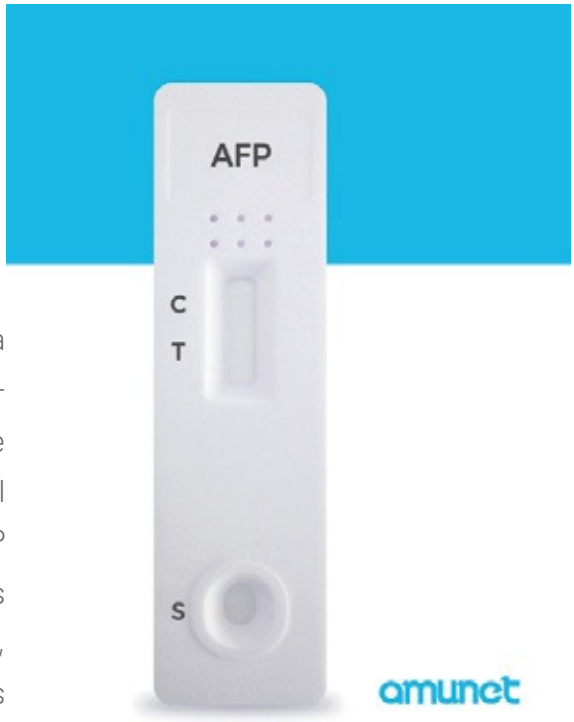


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de AFP Alfa-fetoproteína?

La prueba rápida de alfa-fetoproteína (AFP) es una prueba cualitativa utilizada para medir los niveles de alfa-fetoproteína en la sangre. La AFP es una proteína que normalmente se produce en el hígado del feto durante el desarrollo fetal. En adultos, los niveles de AFP generalmente son bajos, por lo que un aumento en los niveles puede ser indicativo de ciertos problemas de salud, especialmente relacionados con el hígado y ciertos tipos de cáncer.

Modo de uso

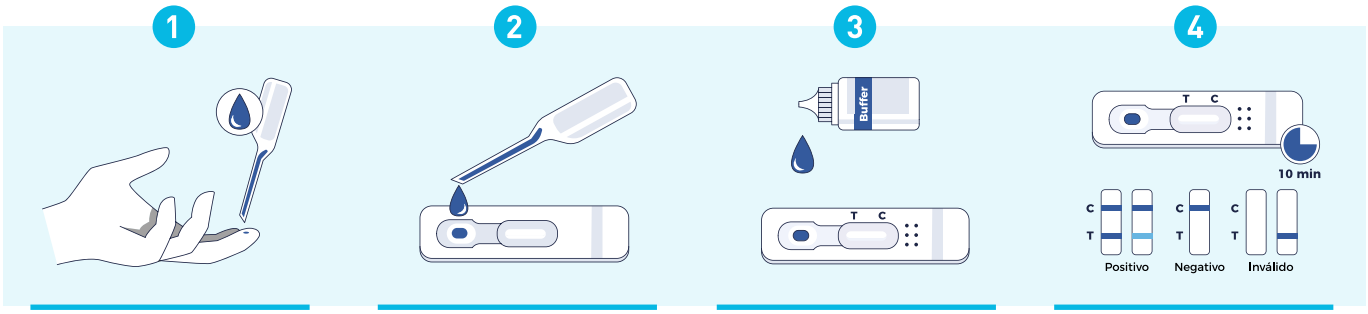

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMAFP01.10	Prueba rápida AFP (Alfa-fetoproteína)	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$450.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de PSA cualitativa

Antígeno prostático específico




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de PSA cualitativa Antígeno prostático específico?

La prueba rápida de PSA (antígeno prostático específico) cualitativa es una prueba cualitativa utilizada para medir los niveles de PSA en la sangre. El PSA es una proteína producida principalmente por la glándula prostática en los hombres. Esta prueba se utiliza principalmente para ayudar en la detección y el monitoreo de cáncer de próstata, así como para evaluar otras condiciones relacionadas con la próstata.

Modo de uso

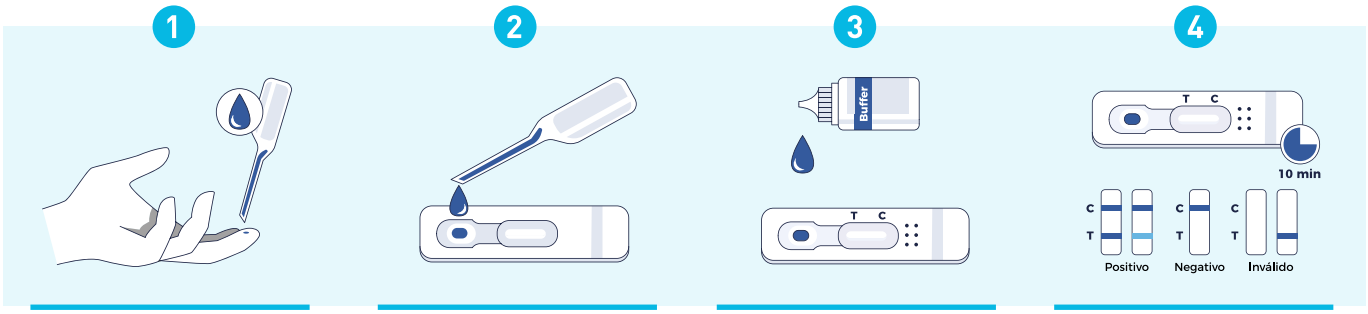

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMPSA02.20	Prueba rápida de PSA (antígeno prostático específico)	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,000.00
DMPSA02.02	Prueba rápida de PSA (antígeno prostático específico)	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$160.00

Registro sanitario COFEPRIS 2364R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de PSA semicuantitativa

Antígeno prostático específico


Reseña



¿Qué es la prueba rápida PSA semicuantitativa Antígeno prostático específico?

La prueba rápida de PSA (antígeno prostático específico) semicuantitativa es un tipo de test diagnóstico que mide los niveles de PSA en la sangre de manera rápida y proporciona una estimación aproximada de la concentración de este marcador. A diferencia de las pruebas cuantitativas, que ofrecen un valor numérico exacto, las pruebas semicuantitativas categorizan los niveles de PSA en rangos o intervalos, lo que permite una interpretación rápida de si los niveles están dentro de lo normal, ligeramente elevados, o significativamente altos.

Modo de uso

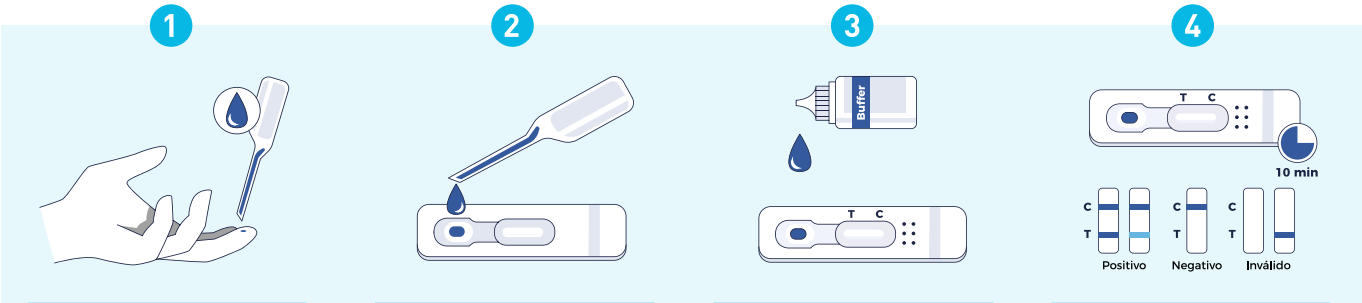

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMPSA01.20	Prueba rápida de PSA (antígeno prostático específico)	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,260.00
DMPSA01.02	Prueba rápida de PSA (antígeno prostático específico)	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$186.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de transferrina y sangre oculta en heces

FOB




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de transferrina y sangre oculta en heces FOB?

La prueba combo de transferrina y sangre oculta en heces (FOB) es una prueba cualitativa auxiliar en la detección de cáncer colorrectal y sangrado de tubo digestivo bajo. Un resultado positivo indica la presencia de sangre en heces, por lo que es necesario protocolizar al paciente con estudios complementarios generales y de imagen para establecer un diagnóstico claro, siempre correlacionando con la clínica.

Modo de uso

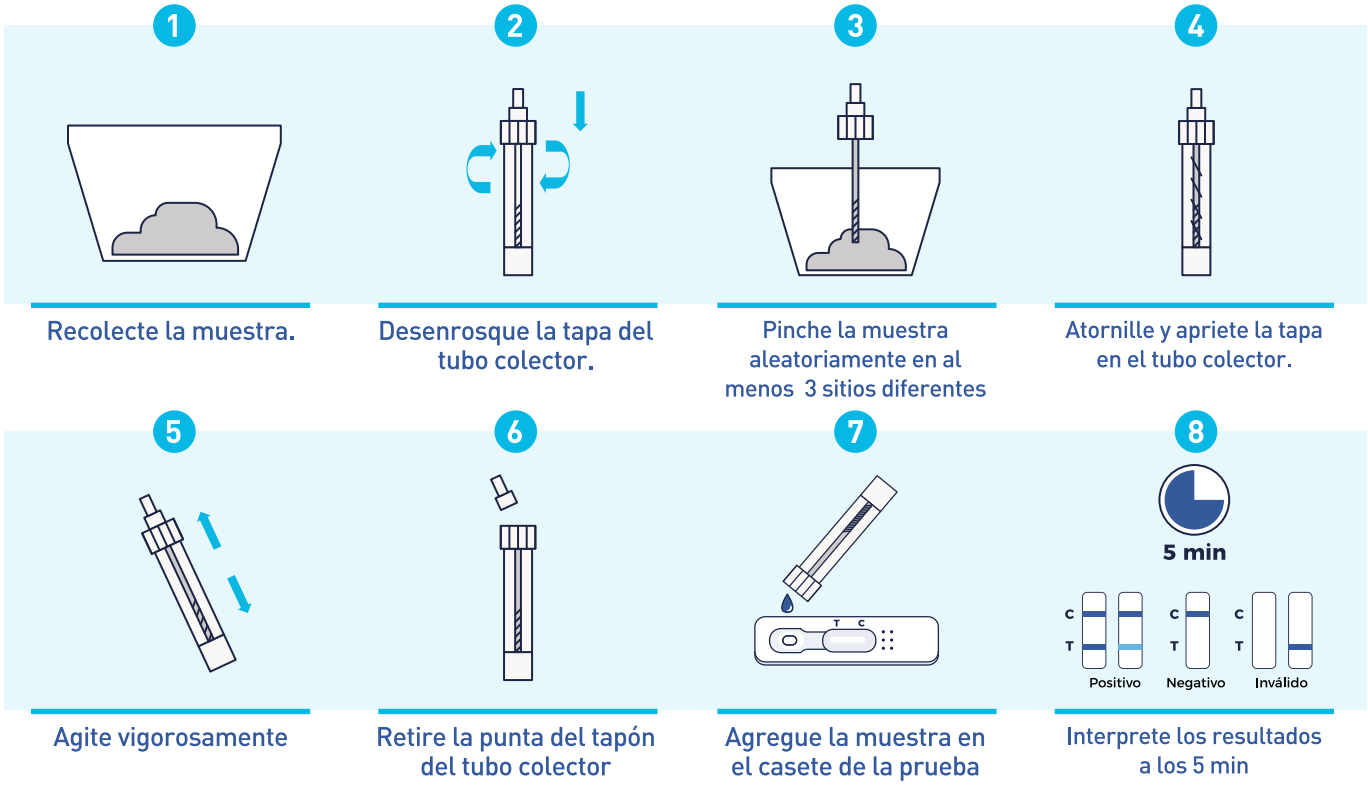

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMTRF01.20	Prueba rápida de Transferrina y Sangre oculta en Heces (FOB)	Heces	20	Cassette	$1,300.00
DMTRF01.05	Prueba rápida de Transferrina y Sangre oculta en Heces (FOB)	Heces	5	Cassette	$400.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Endocrinología

Prueba rápida de Hemoglobina Glicosilada

HbA1c




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Hemoglobina Glicosilada HbA1c?

La prueba rápida de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) es un auxiliar para detectar diabetes o prediabetes en adultos. Si el paciente tiene diabetes, la prueba permite vigilar su nivel promedio de glucosa en los últimos 3 meses ya que ese es el tiempo de vida de los glóbulos rojos.

Modo de uso

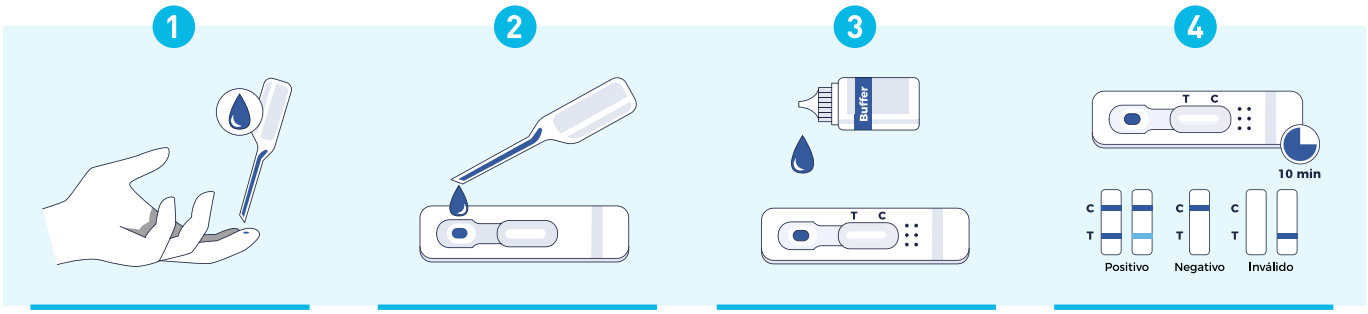


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMHBA01.20	Prueba rápida de Hemoglobina Glicosilada HbA1c	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,668.00
DMHBA01.05	Prueba rápida de Hemoglobina Glicosilada HbA1c	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$488.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Albúmina Cualitativa

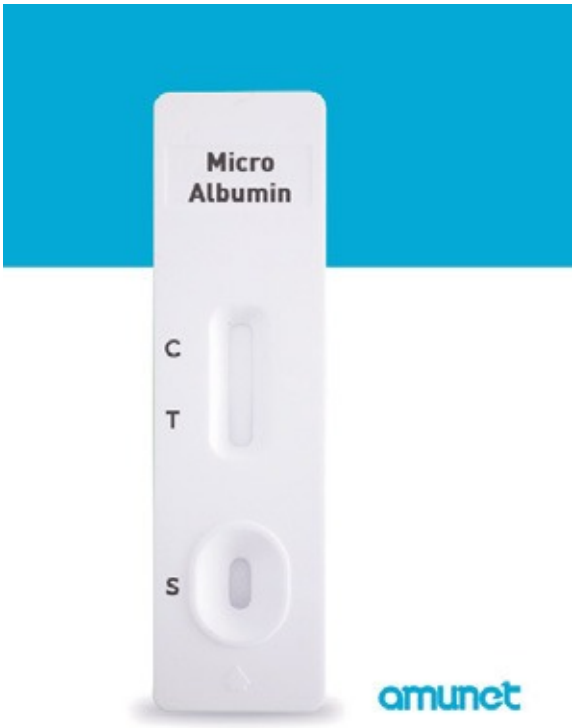


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Albúmina Cualitativa?

La Prueba Rápida de Albúmina Cualitativa es una herramienta auxiliar utilizada para detectar la presencia de albúmina en la orina. La albúmina es una proteína que normalmente se encuentra en la sangre, pero que no debería aparecer en grandes cantidades en la orina. Su presencia en la orina puede ser un signo de problemas en los riñones.

Modo de uso

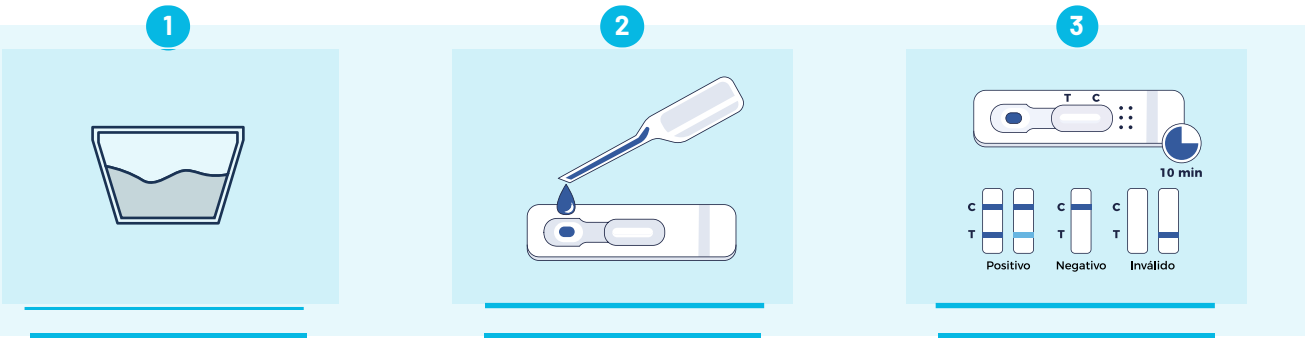


1. Recolecte la orina en un contenedor limpio (de preferencia la primera de la mañana).
2. Con el gotero agregue 3 gotas de orina en el pozo (S) del cartucho.
3. Interprete el resultado a los 5 minutos; no lo interprete después de 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DRAM-002.10	Prueba rápida de Albúmina Cualitativa	Orina	10	Cassette	$300.00
DRAM-002.05	Prueba rápida de Albúmina Cualitativa	Orina	5	Cassette	$225.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Albúmina Semicuantitativa

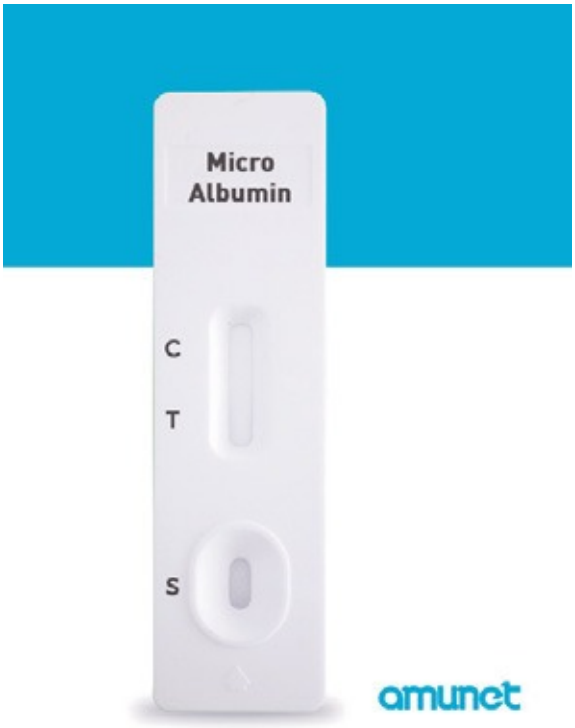


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Albúmina Semicuantitativa?

La Prueba Rápida de Albúmina Semicuantitativa es una herramienta auxiliar diagnóstica que mide la cantidad de albúmina en la orina de forma semicuantitativa. Esto significa que no solo detecta la presencia de albúmina, sino que también proporciona una estimación aproximada de la cantidad presente, lo cual es útil para evaluar la severidad del daño renal.


Modo de uso

1

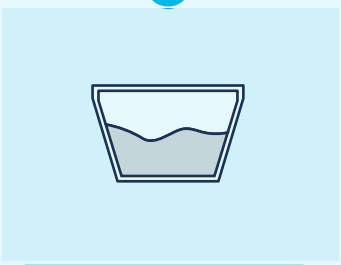


Recolecte la orina en un contenedor limpio (de preferencia la primera de la mañana).

2

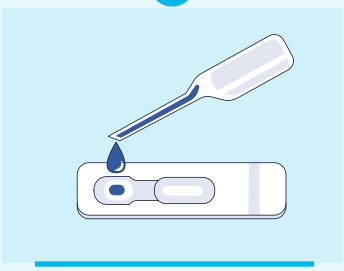

Con el gotero agregue 3 gotas de orina en el pozo (S) del cartucho.

3

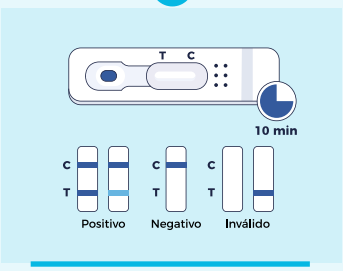

Interprete el resultado a los 5 minutos con ayuda de la tarjeta de color; no después de 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DRAM-001.20	Prueba rápida de Albúmina semicuantitativa	Orina	20	Cassette	$700.00
DRAM-001.05	Prueba rápida de Albúmina semicuantitativa	Orina	5	Cassette	$250.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de TSH

Hipertiroidismo e Hipotiroidismo




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de TSH Hipertiroidismo e Hipotiroidismo?

La prueba rápida de TSH es una herramienta auxiliar para la detección semicuantitativa de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) en muestras de sangre, suero o plasma, como auxiliar en el diagnóstico de hipertiroidismo e hipotiroidismo en una sola prueba.

Modo de uso

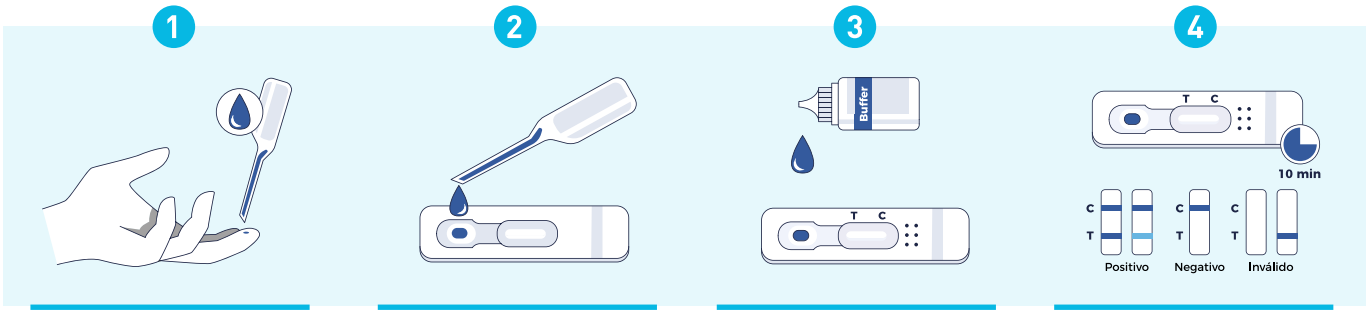

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMTSH02.20	Prueba rápida de TSH	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,900.00
DMTSH02.10	Prueba rápida de TSH	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,100.00
DMTSH02.05	Prueba rápida de TSH	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$625.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Kit de prueba de Cistatina C (Método turbidimétrico)

Reseña

¿Qué es el kit de prueba de Cistatina C (Método turbidimétrico)?

Kit turbidimétrico para cuantificar cistatina C en suero o plasma en microplaca de 96 pozos, con cinco controles de calibración y lectura a 556 nm. Límite de detección 0.2 mg/L y rango hasta 8 mg/L. Marcador del filtrado glomerular para diagnóstico temprano de enfermedad renal. Uso profesional en laboratorio.



amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
KECYS01	Kit de prueba de Cistatina C (Método turbidimétrico)	Suero/Plasma	96	Microplaca	$9,800.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de TSH (hormona estimulante de la tiroides)




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de TSH (hormona estimulante de la tiroides)?

Prueba cualitativa que detecta TSH igual o mayor a 5 µUI/mL en sangre total, suero o plasma. Resultado en 10 minutos; sensibilidad 98.1 % y especificidad 98.2 % frente al método de referencia. Tamizaje de hipotiroidismo en consultorio. Uso profesional.

amunet

Modo de uso

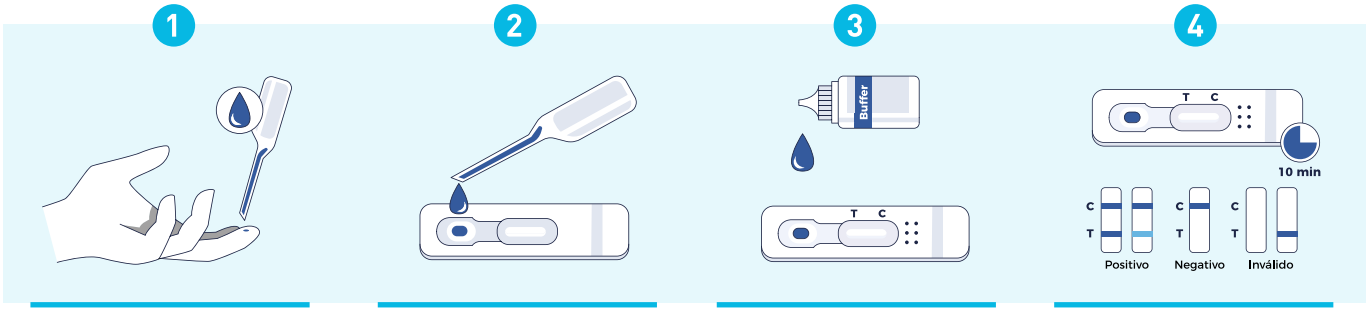

Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMTSH01.20	Prueba rápida de TSH (hormona estimulante de la tiroides)	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,100.00
DMTSH01.10	Prueba rápida de TSH (hormona estimulante de la tiroides)	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$700.00
DMTSH01.05	Prueba rápida de TSH (hormona estimulante de la tiroides)	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$425.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Infecciosas Respiratorias

Prueba rápida de COVFLU-NET




Reseña


¿Qué es la prueba rápida de COVFLU-NET?

La Prueba Rápida COVFLU-NET es un auxiliar diagnóstico que permite detectar simultáneamente múltiples infecciones respiratorias, específicamente el COVID-19 y la influenza (gripe), en una sola muestra. Este tipo de prueba es útil para el diagnóstico diferencial en pacientes que presentan síntomas respiratorios, ayudando a identificar la causa de la infección de manera rápida y eficiente.

Modo de uso

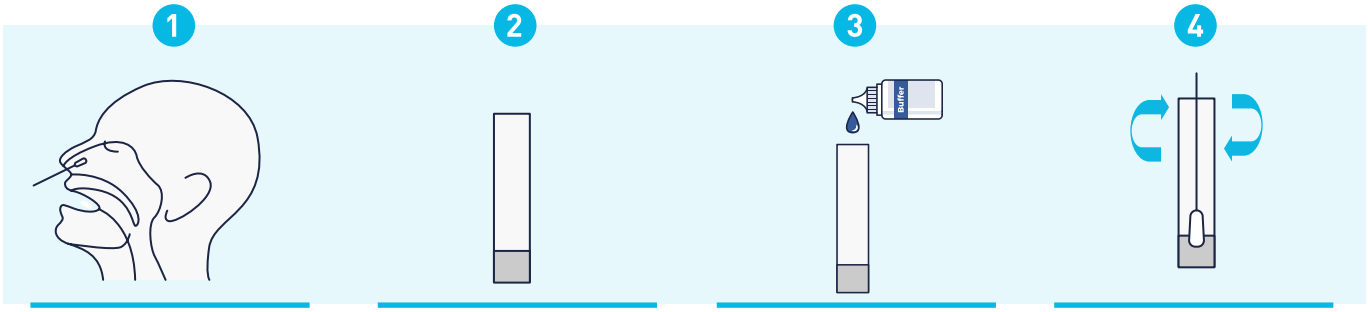

1. Inserte el hisopo en el orificio nasal.
2. Coloque el tubo de extracción verticalmente
3. Agregue 10 gotas de buffer
4. Coloque el hisopo en el tubo de extracción

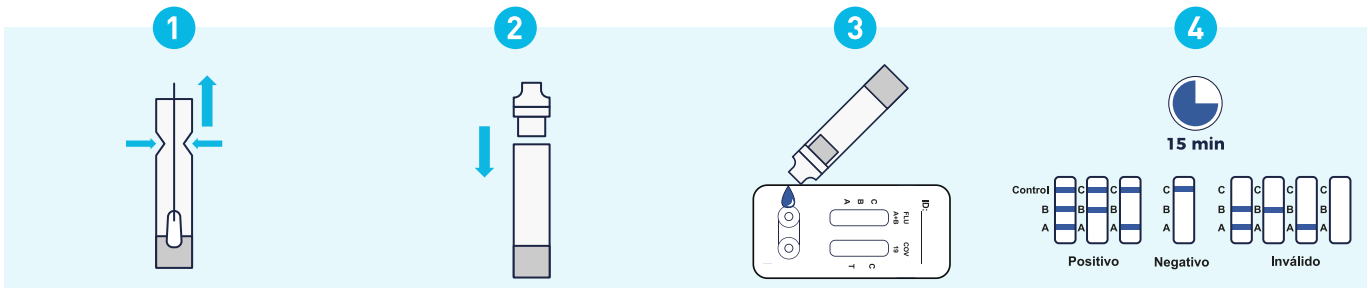


1. Retire el hisopo apretando el cabezal contra el interior del tubo
2. Coloque la punta del gotero en la parte superior del tubo de extracción
3. Agregue 3 gotas de buffer a cada pocillo en el casete de prueba
4. Interprete los resultados a los 15 min

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DIAM-024.10	Prueba rápida COVFLU-NET	Nasofaríngea	10	Cassette	$1,780.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Streptococcus pneumoniae

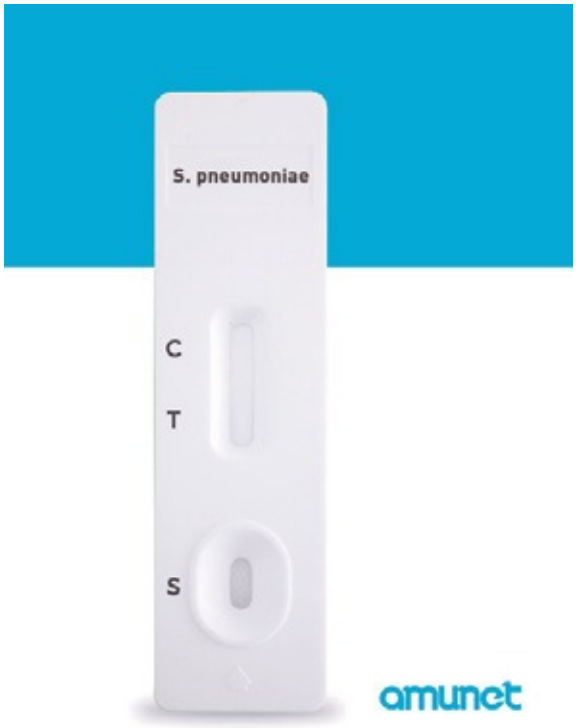


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Streptococcus pneumoniae?

La Prueba Rápida de Antígeno de Streptococcus pneumoniae es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar la presencia del antígeno específico de la bacteria Streptococcus pneumoniae en muestras de orina. Este tipo de prueba es útil para el diagnóstico rápido de infecciones neumocócicas, como la neumonía, y puede ayudar a guiar el tratamiento apropiado.


Modo de uso

1

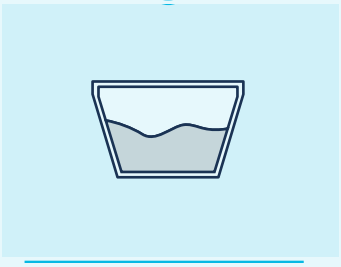


Recolecte el chorro medio de orina en un contenedor limpio.

2

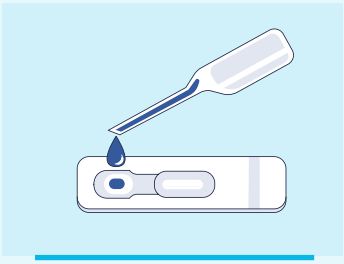

Con el gotero agregue 3 gotas (≈120 µL) de orina en el pozo (S) del cartucho.

3

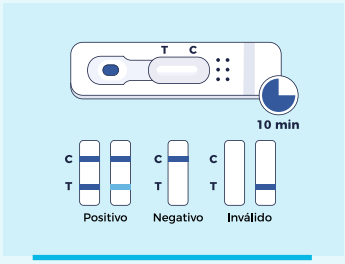


Interprete el resultado a los 15 minutos; no después de 20 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMSP001.20	Prueba rápida de Antígeno de Streptococcus pneumoniae	Orina	20	Cassette	$1,700.00
DMSP001.05	Prueba rápida de Antígeno de Streptococcus pneumoniae	Orina	5	Cassette	$500.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de antígeno en saliva SARS CoV2

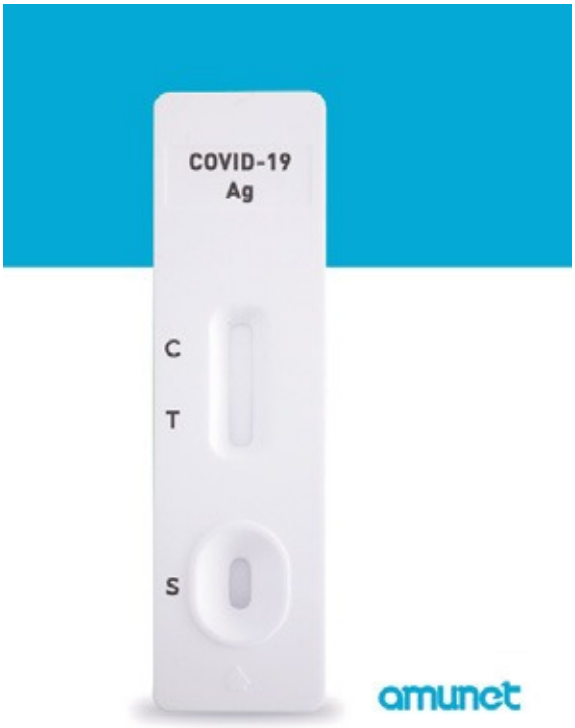


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de antígeno en saliva SARS CoV2?

La Prueba Rápida de Antígeno en Saliva SARS-CoV-2 es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, en muestras de saliva. Esta prueba es una herramienta útil para la detección rápida y no invasiva del virus en individuos que pueden estar infectados.

Modo de uso

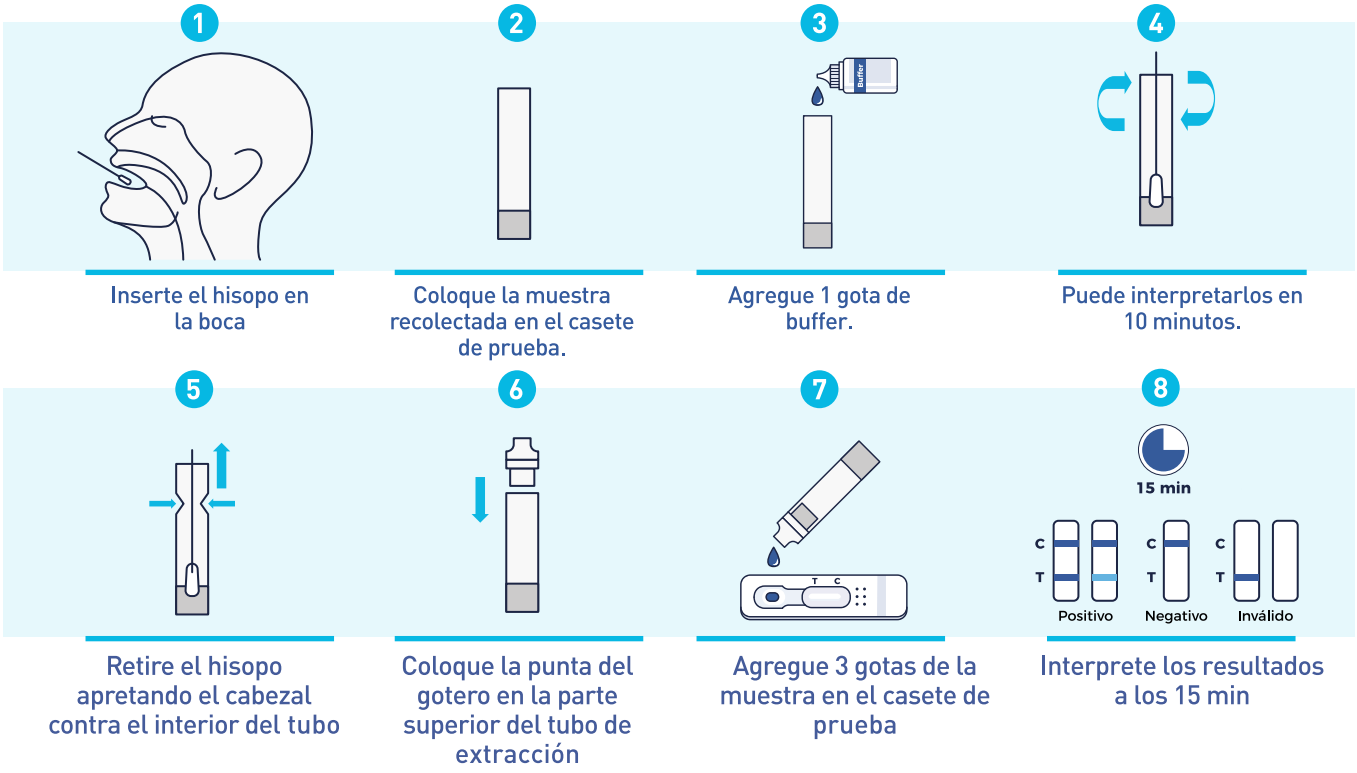


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DIAM-025.10	Prueba rápida de antígeno en saliva SARS CoV2	Saliva	10	Cassette	$640.00
DIAM-025.05	Prueba rápida de antígeno en saliva SARS CoV2	Saliva	5	Cassette	$395.00
DIAM-025.02	Prueba rápida de antígeno en saliva SARS CoV2	Saliva	2	Cassette	$188.00

Registro sanitario COFEPRIS 2625R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de antígeno SARS CoV2 nasofaríngea

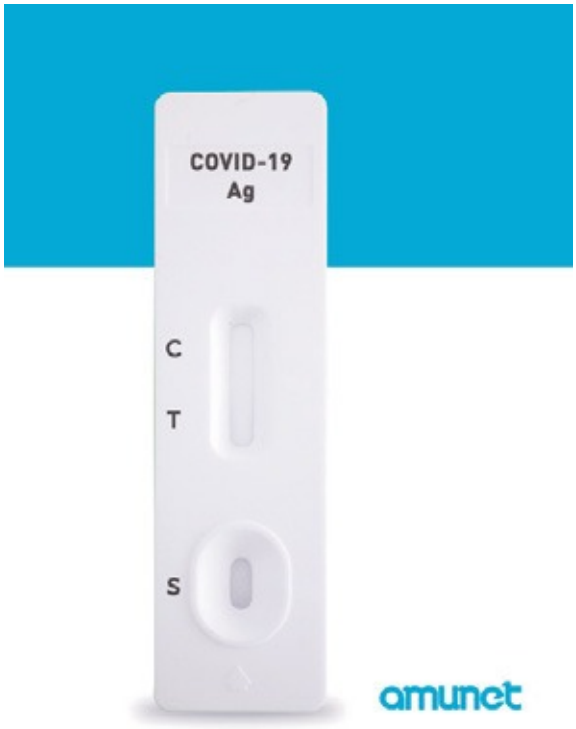


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de antígeno SARS CoV2 nasofaríngea?

La Prueba Rápida de Antígeno SARS-CoV-2 Nasofaríngea es una herramienta auxiliar utilizada para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, en muestras obtenidas de la nasofaringe. Esta prueba es una opción eficaz para la detección rápida de infecciones activas por COVID-19.

Modo de uso

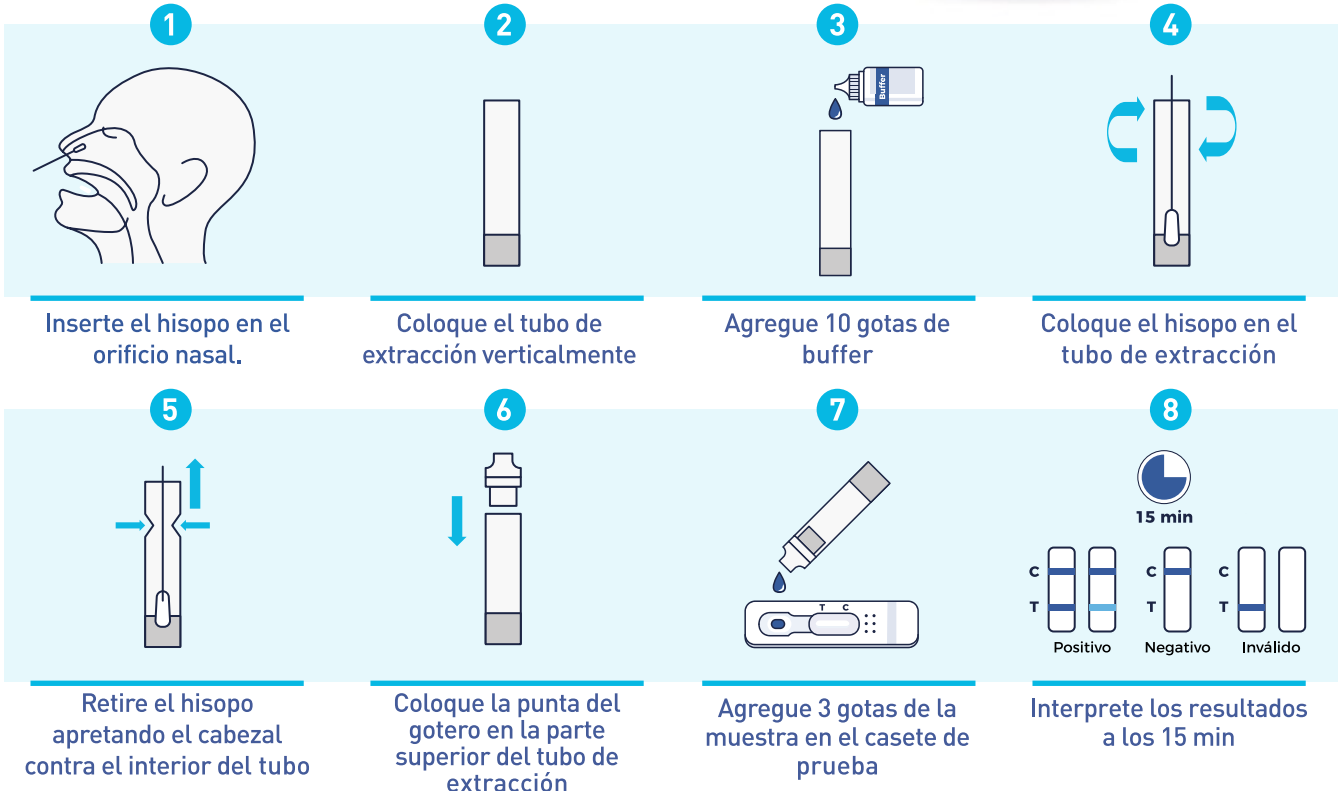

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DIAM-029.10	Prueba rápida de antígeno SARS CoV2 nasofaríngea	Nasofaríngea	10	Cassette	$700.00
DIAM-029.05	Prueba rápida de antígeno SARS CoV2 nasofaríngea	Nasofaríngea	5	Cassette	$425.00
DIAM-029.02	Prueba rápida de antígeno SARS CoV2 nasofaríngea	Nasofaríngea	2	Cassette	$200.00

Registro sanitario COFEPRIS 2625R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida para COVID19

Presencia de anticuerpos IgG e IgM




Reseña

¿Qué es la prueba rápida para COVID19 Presencia de anticuerpos IgG e IgM?

La prueba rápida para COVID-19 es una prueba cualitativa que detecta por separado anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2 en sangre total, suero o plasma. Orienta sobre una infección reciente o una exposición previa al virus y apoya el diagnóstico diferencial frente a otras enfermedades respiratorias.

Modo de uso

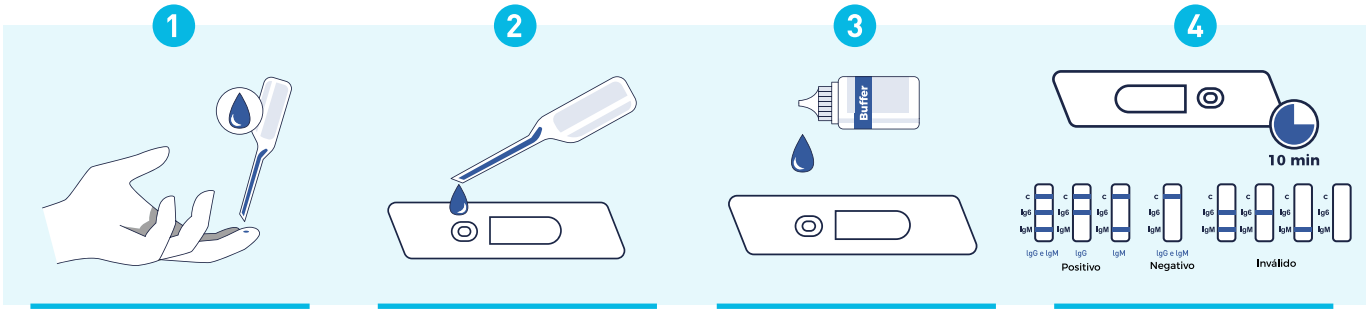

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DIAM-023.10	Prueba rápida para COVID19 presencia de anticuerpos IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$740.00
DIAM-023.05	Prueba rápida para COVID19 presencia de anticuerpos IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$410.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Influenza A y B




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Influenza A y B?

La Prueba Rápida de Influenza A y B es una herramienta auxiliar diagnóstica utilizada para detectar la presencia de los virus de la influenza A y B en muestras respiratorias. Estas pruebas están diseñadas para proporcionar resultados rápidos y son útiles para la identificación de infecciones por influenza en entornos clínicos. Requiere muestra de hisopado de garganta o aspirado nasal.


Modo de uso

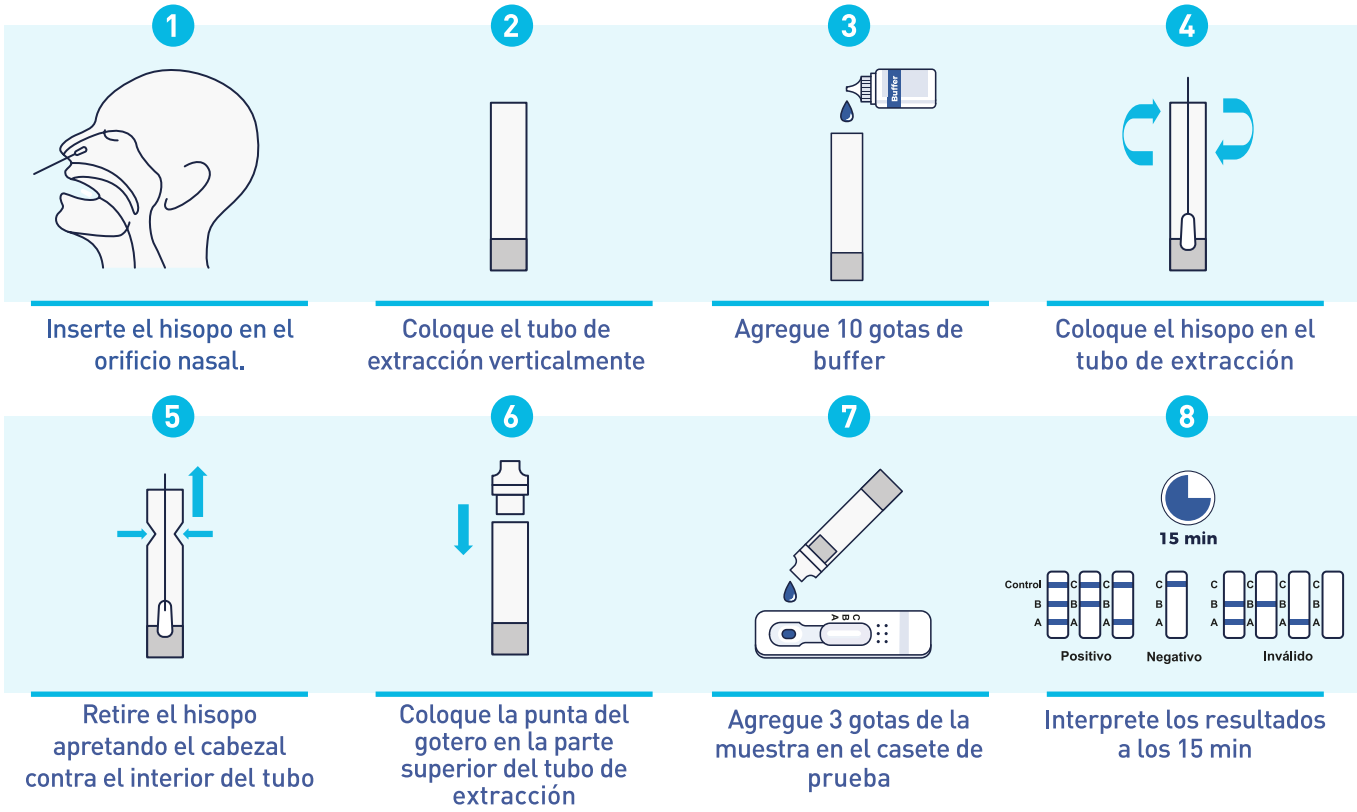

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMIAB01.20	Prueba rápida de Influenza A y B	Nasofaríngea	20	Cassette	$2,439.00
DMIAB01.05	Prueba rápida de Influenza A y B	Nasofaríngea	5	Cassette	$650.00

Registro sanitario COFEPRIS 1094R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Tuberculosis

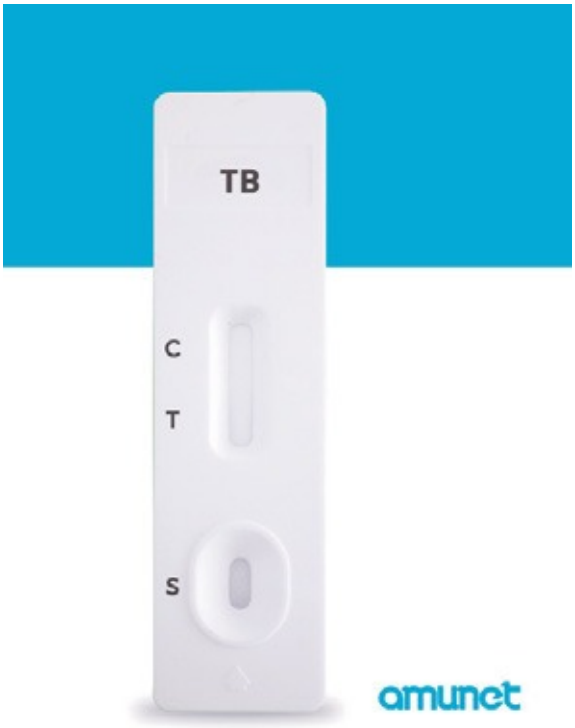


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Tuberculosis?

La Prueba Rápida de Tuberculosis (TB) es una herramienta auxiliar en el diagnóstico de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis. Estas pruebas están diseñadas para proporcionar resultados más rápidamente que las pruebas tradicionales de cultivo o radiografía, lo que facilita un diagnóstico más temprano y el inicio del tratamiento.

Modo de uso

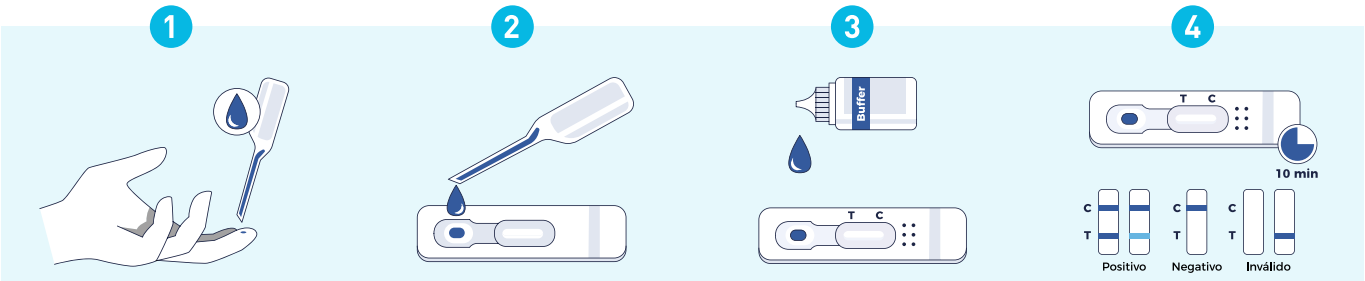

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMATB01.20	Prueba rápida de Tuberculosis	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,920.00
DMATB01.05	Prueba rápida de Tuberculosis	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$555.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Virus Sincitial Respiratorio

RSV


Reseña

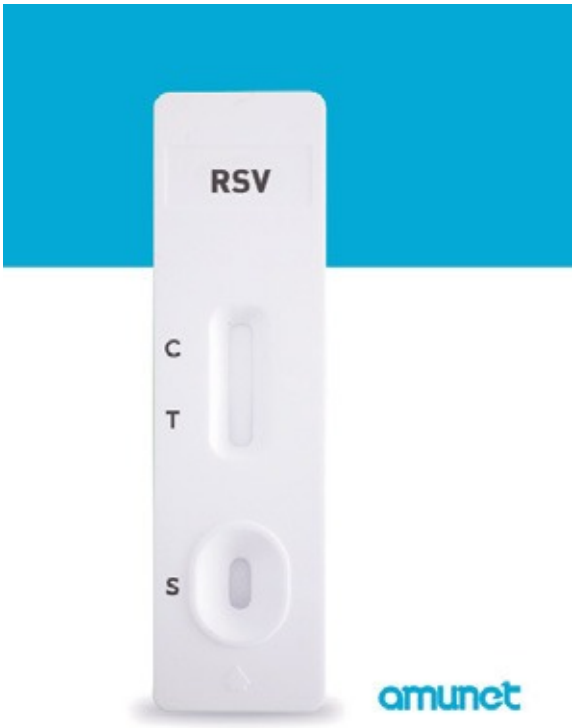

¿Qué es la prueba rápida de Virus Sincitial Respiratorio RSV?

La Prueba Rápida de Virus Sincitial Respiratorio (RSV) es un auxiliar diagnóstico utilizado para detectar la presencia del virus sincitial respiratorio (RSV) en muestras respiratorias, como secreciones nasales o de la garganta. Este virus es una de las principales causas de infecciones respiratorias en bebés, niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Modo de uso

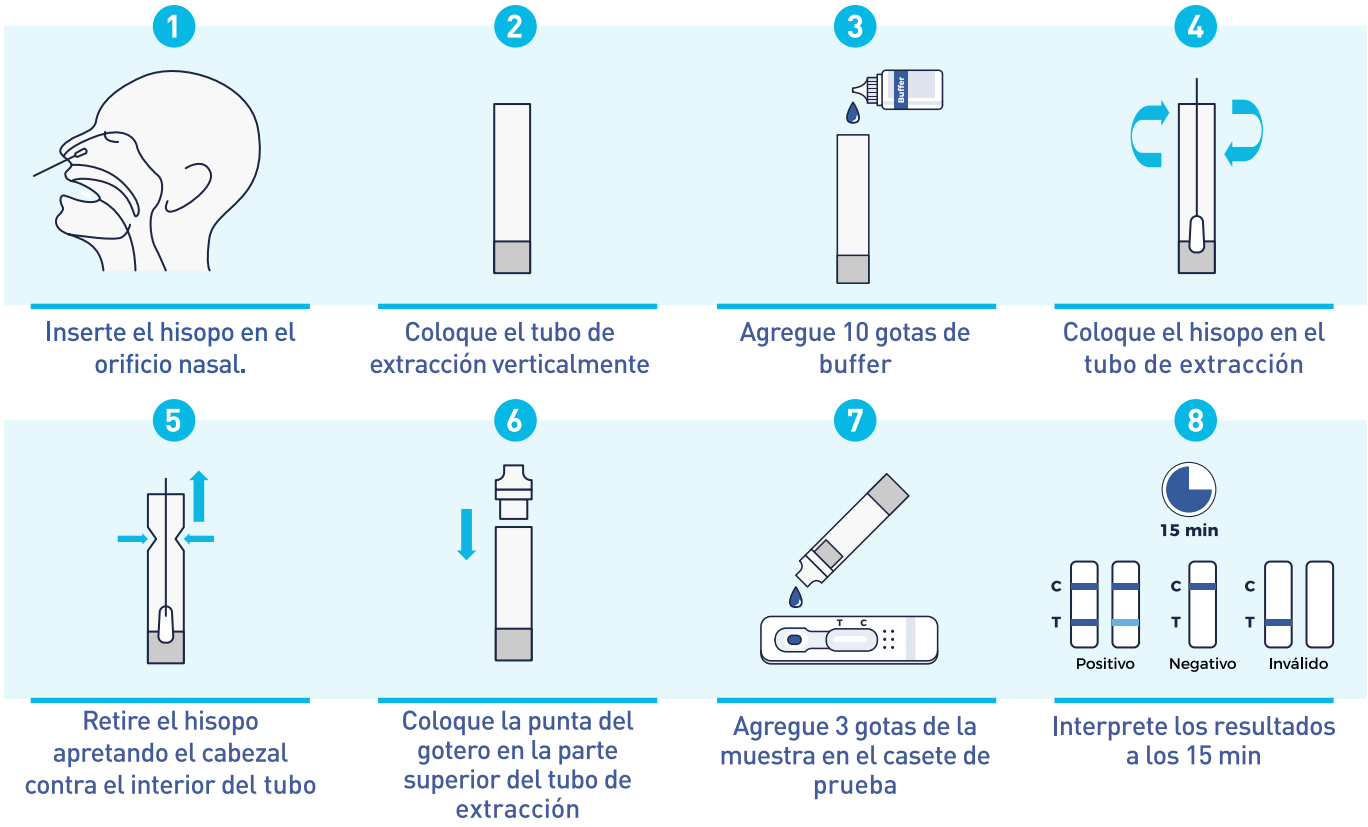


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMVSR01.10	Prueba rápida de Virus Sincitial Respiratorio	Nasofaríngea	10	Cassette	$1,213.00

Registro sanitario COFEPRIS 2110R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Antígeno de Mycoplasma Pneumoniae

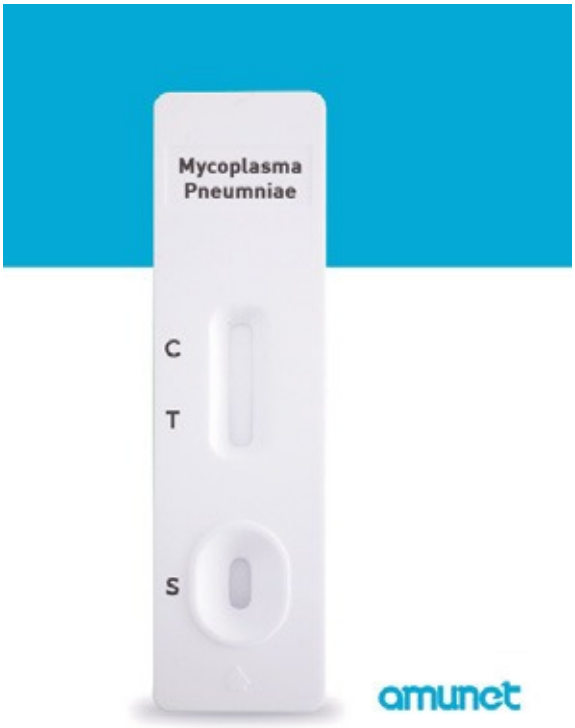


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Mycoplasma Pneumoniae?

La Prueba Rápida de Antígeno de Mycoplasma pneumoniae es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar de manera rápida la presencia de antígenos del Mycoplasma pneumoniae en muestras de exudado orofaríngeo. Este microorganismo es una de las principales causas de neumonía atípica, especialmente en niños y adultos jóvenes.

Modo de uso

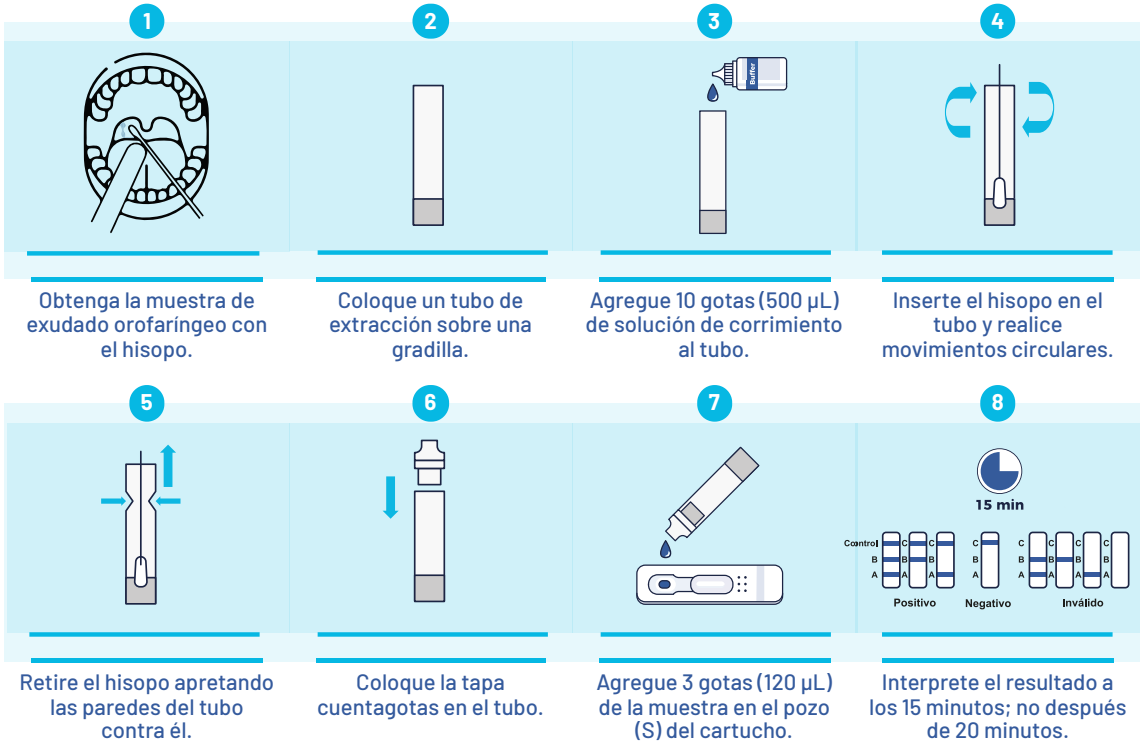


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMMYC01.10	Prueba rápida de Antígeno de Mycoplasma Pneumoniae	Exudado orofaríngeo	10	Cassette	$2,100.00
DMMYC01.05	Prueba rápida de Antígeno de Mycoplasma Pneumoniae	Exudado orofaríngeo	5	Cassette	$1,210.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Estreptococo A

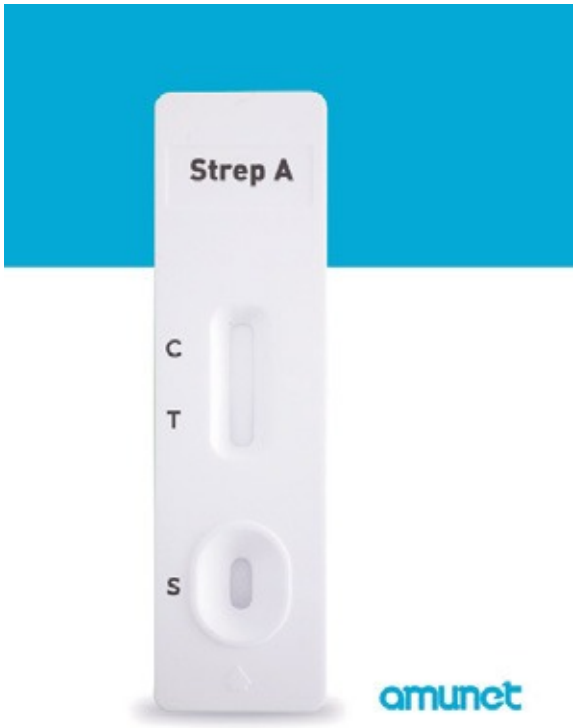


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Estreptococo A?

La Prueba Rápida de Estreptococo A es un auxiliar en la detección temprana de la bacteria Streptococcus pyogenes (también conocida como estreptococo del grupo A) en muestras tomadas de la garganta. Esta bacteria es la causa más común de faringitis bacteriana, comúnmente conocida como "infección de garganta por estreptococos".

Modo de uso

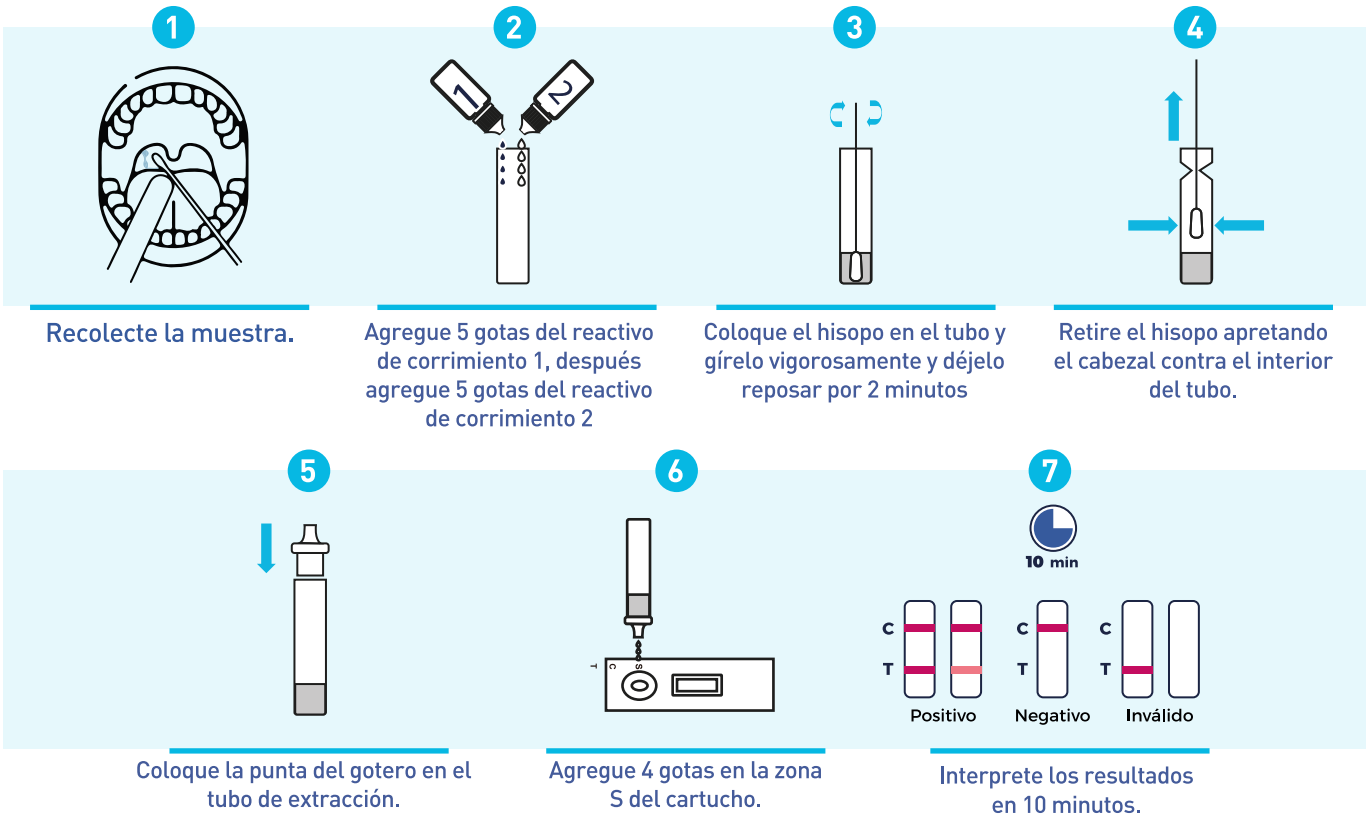


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMSPN02.20	Prueba rápida de Estreptococo A	Orofaríngea	20	Cassette	$1,700.00
DMSPN02.05	Prueba rápida de Estreptococo A	Orofaríngea	5	Cassette	$450.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Estreptococo B

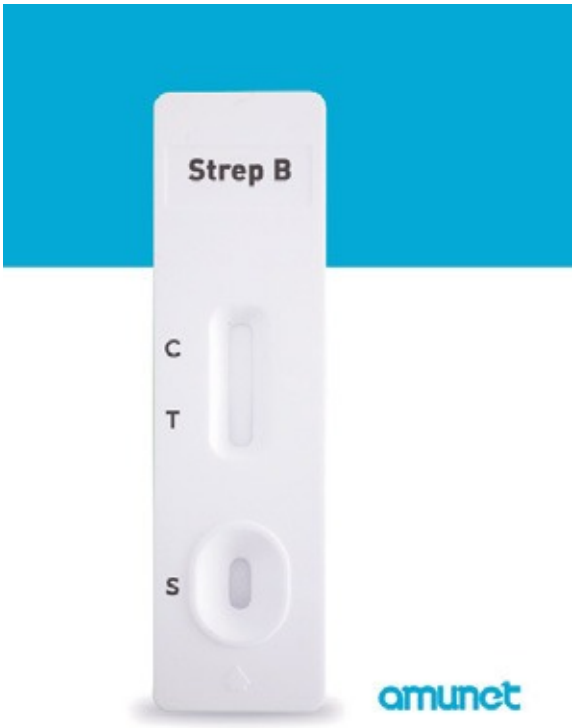


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Estreptococo B?

La Prueba Rápida de Estreptococo B es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar la presencia del Streptococcus agalactiae, comúnmente conocido como estreptococo del grupo B, en muestras tomadas del tracto genital o del recto, principalmente en mujeres embarazadas. Esta bacteria puede colonizar el tracto genital y gastrointestinal, y aunque a menudo es inofensiva en adultos, puede causar infecciones graves en recién nacidos si se transmite durante el parto.

Modo de uso

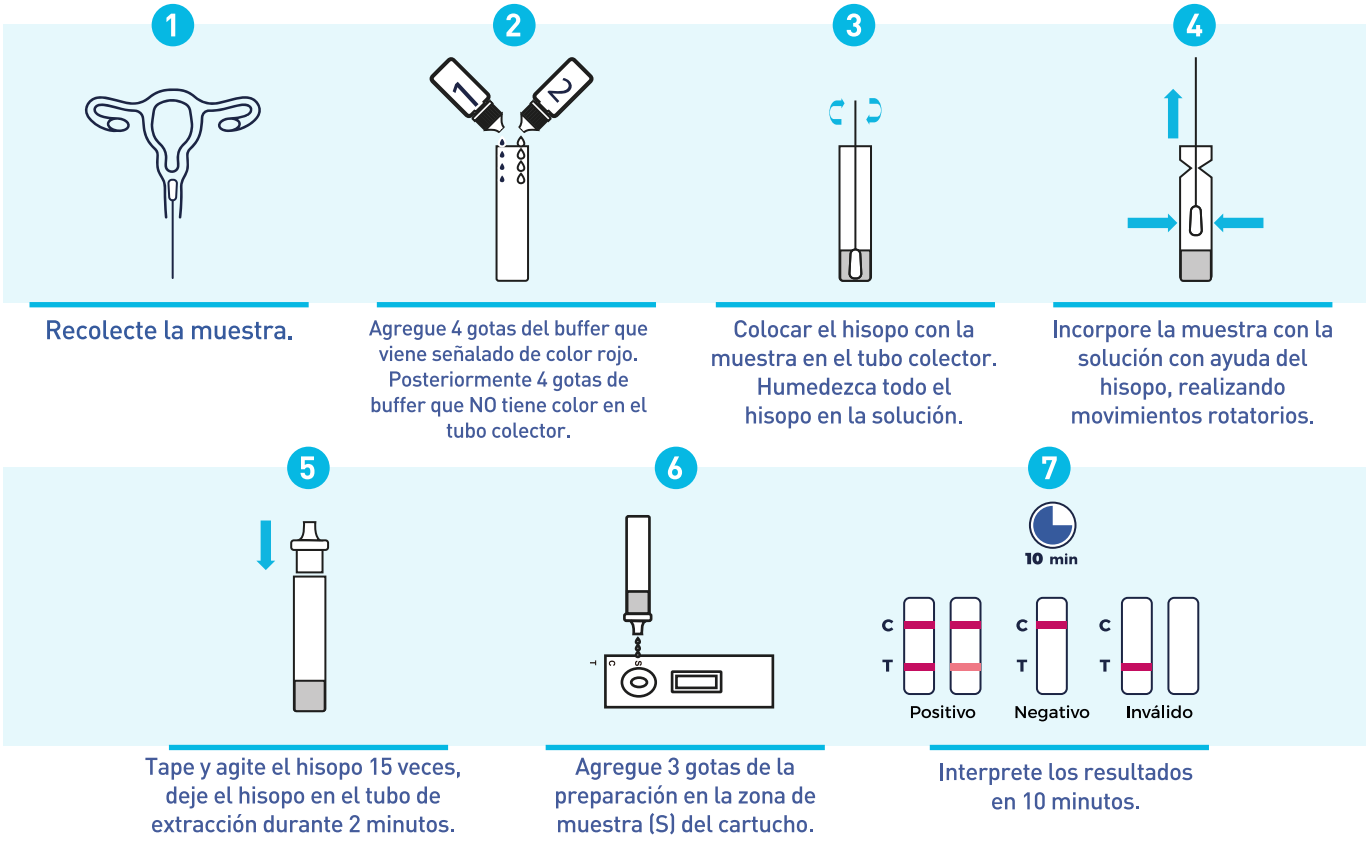


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMSPN01.20	Prueba rápida de Estreptococo B	Hisopado vaginal/rectal	20	Cassette	$1,600.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida en combo 3 en 1 para influenza A y B + SARS-COV2 + RSV

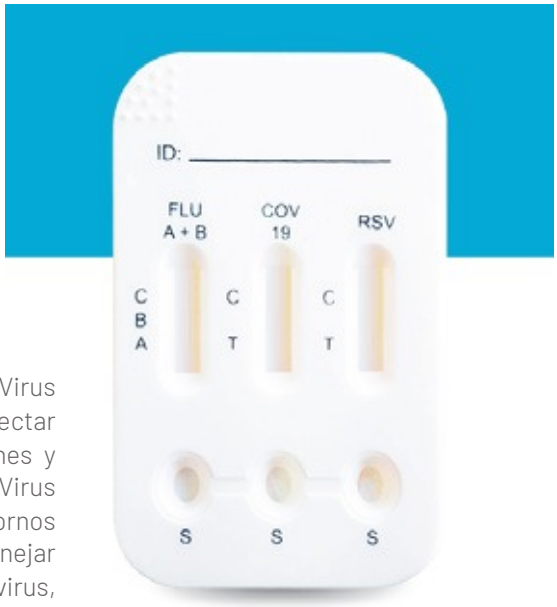


Reseña


¿Qué es la prueba rápida en combo 3 en 1 para influenza A y B + SARS-CoV-2 + RSV?

La Prueba Rápida en Combo 3 en 1 para Influenza A y B, SARS-CoV-2, y Virus Sincitial Respiratorio (RSV) es un auxiliar diagnóstico que permite detectar simultáneamente la presencia de tres patógenos respiratorios comunes y potencialmente graves: el virus de la Influenza A y B, el SARS-CoV-2 y el Virus Sincitial Respiratorio (RSV). Esta prueba es especialmente útil en entornos clínicos, donde se necesita un diagnóstico rápido y preciso para manejar adecuadamente las infecciones respiratorias y diferenciar entre estos virus, que pueden presentar síntomas similares.

Modo de uso

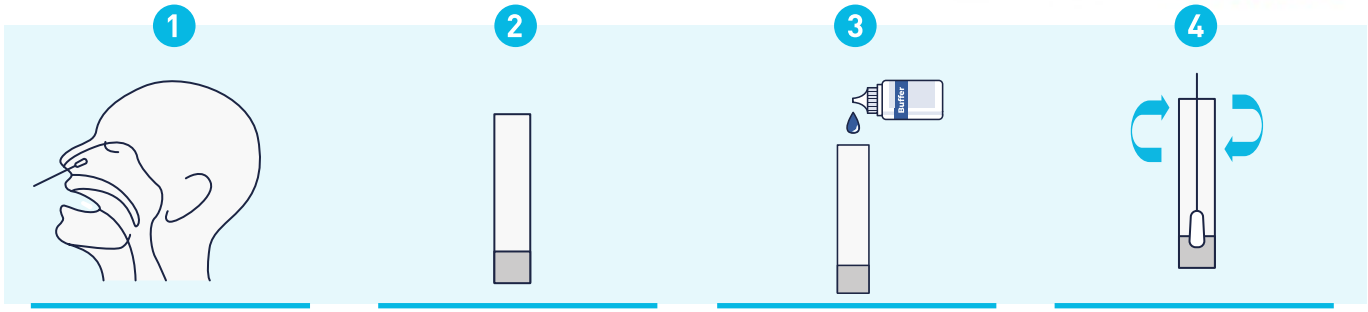

1. Inserte el hisopo en el orificio nasal.
2. Coloque el tubo de extracción verticalmente
3. Agregue 10 gotas de buffer
4. Coloque el hisopo en el tubo de extracción

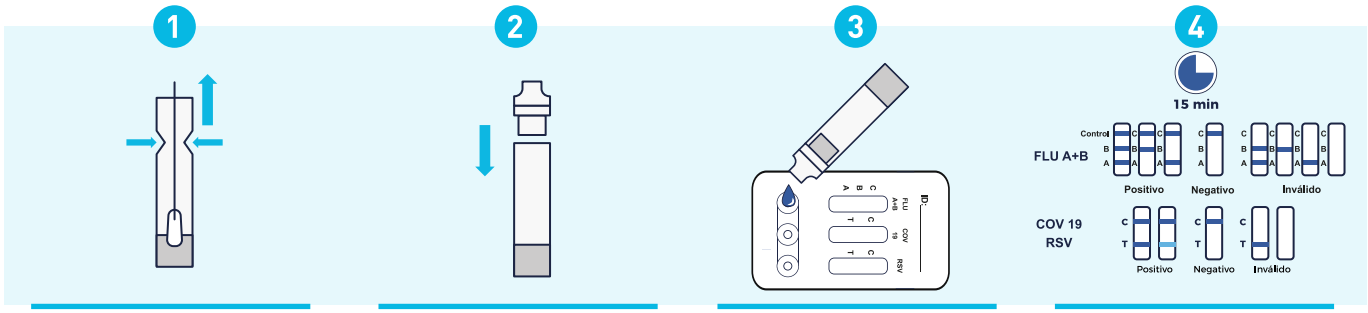

1. Retire el hisopo apretando el cabezal contra el interior del tubo
2. Coloque la punta del gotero en la parte superior del tubo de extracción
3. Agregue 3 gotas de buffer a cada pocillo en el casete de prueba
4. Interprete los resultados a los 15 min

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMICR01.10	Prueba rápida en combo 3 en 1 para influenza A y B + SARS-CoV-2 + RSV	Nasofaríngea	10	Cassette	$2,408.00
DMICR01.05	Prueba rápida en combo 3 en 1 para influenza A y B + SARS-CoV-2 + RSV	Nasofaríngea	5	Cassette	$1,330.00

Registro sanitario COFEPRIS 1820R2025 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Inmunologicas

Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Giardia Lamblia




Reseña

¿Qué es el Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Giardia Lamblia?

El Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Giardia Lamblia es una herramienta de diagnóstico utilizada para detectar infecciones parasitarias en muestras de heces. Este kit permite identificar dos tipos de parásitos en particular: Entamoeba histolytica: Es un parásito que puede causar amebiasis, una infección intestinal que puede llevar a síntomas como diarrea, dolor abdominal y, en casos más graves, disentería. Giardia lamblia: Es el causante de la giardiasis, una infección intestinal que también provoca diarrea, dolor abdominal y náuseas. El funcionamiento del kit suele ser sencillo y rápido. Generalmente, se utiliza una muestra de heces, que se mezcla con reactivos específicos del kit.

Modo de uso

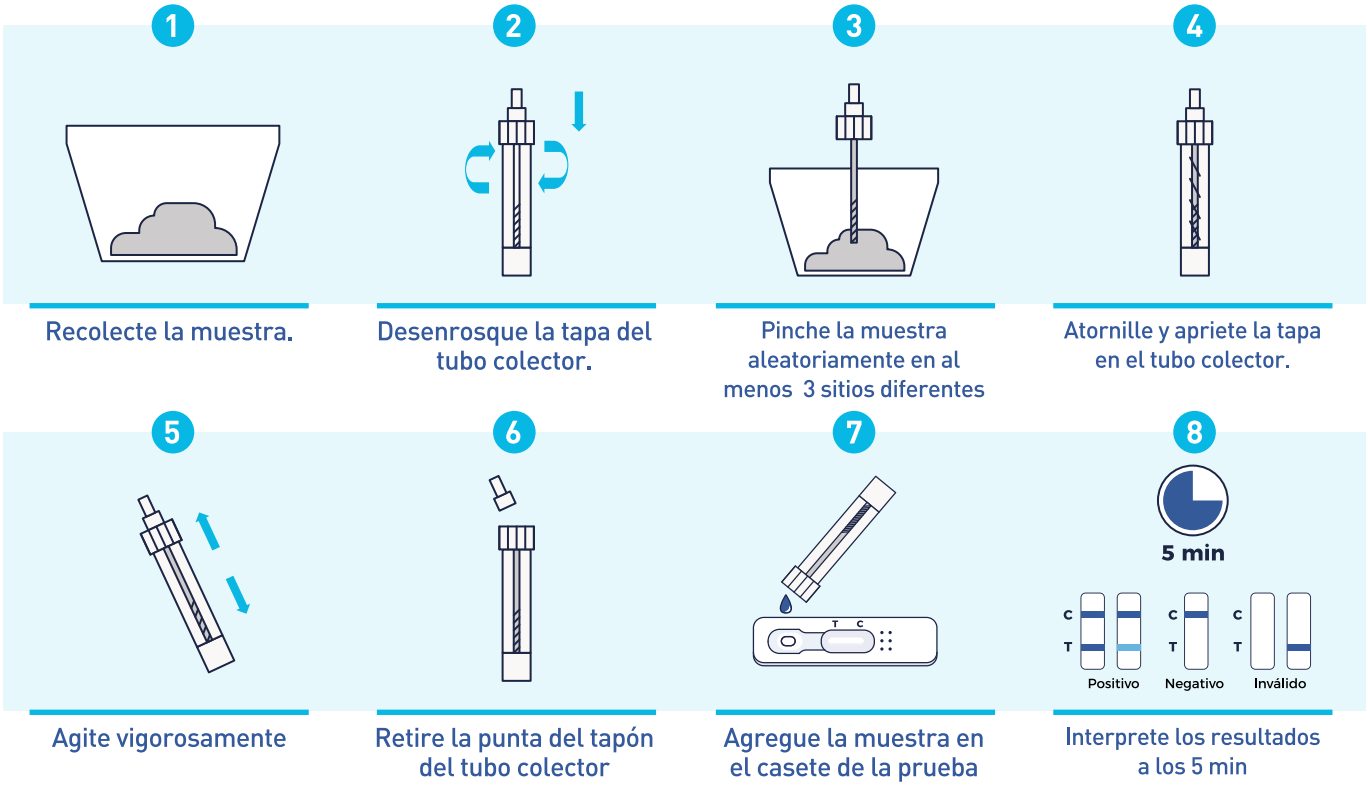

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMENG01.10	Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Giardia Lamblia	Heces	10	Cassette	$1,300.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Salmonella Typhi



Reseña

¿Qué es el Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Salmonella Typhi?

El Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Salmonella Typhi es un dispositivo diagnóstico utilizado para la detección simultánea de dos patógenos específicos en muestras clínicas, típicamente en muestras de heces. Detecta: Entamoeba histolytica (Entamoeba H.): Es un parásito protozoario que causa amebiasis, una infección intestinal que puede provocar síntomas como diarrea, dolor abdominal y, en casos graves, disentería amebiana. La detección de Entamoeba histolytica en las heces es crucial para el diagnóstico y tratamiento adecuado de la amebiasis. Salmonella Typhi: Es la bacteria responsable de la fiebre tifoidea, una enfermedad sistémica que puede presentar síntomas como fiebre alta, dolor abdominal, y malestar general. La detección de Salmonella Typhi también se realiza generalmente en muestras de heces, ya que es la forma principal de transmisión de la bacteria.

Modo de uso



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMESC01.10	Kit de pruebas rápidas Entamoeba H. + Salmonella Typhi	Heces	10	Cassette	$1,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Campylobacter




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Campylobacter?

La Prueba Rápida de Campylobacter es un auxiliar en el diagnóstico que se utiliza para detectar la presencia de bacterias del género Campylobacter en muestras biológicas, generalmente en heces. Campylobacter es uno de los patógenos bacterianos más comunes que causan gastroenteritis, una infección intestinal que puede llevar a síntomas como diarrea, dolor abdominal, fiebre y náuseas.

Modo de uso

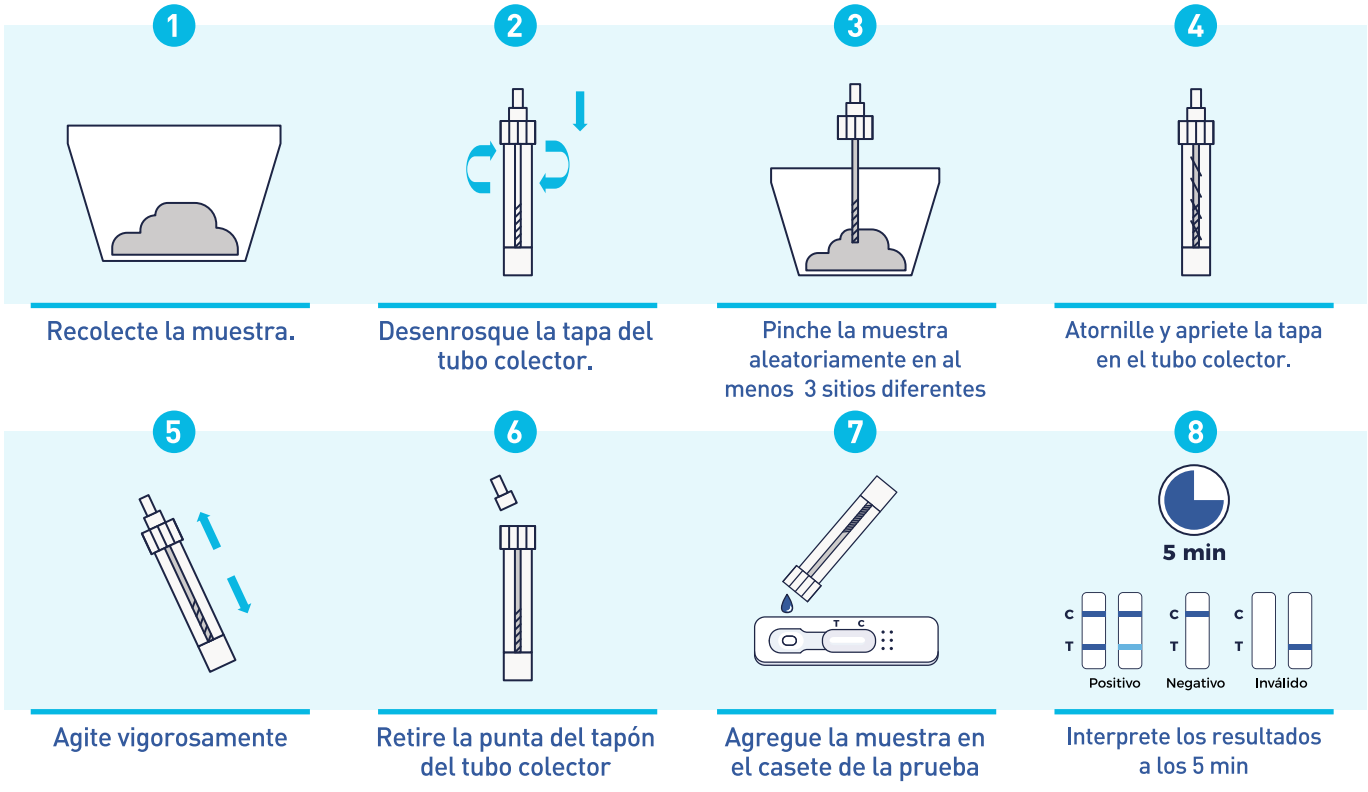


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCBR01.10	Prueba rápida de Campylobacter	Heces	10	Cassette	$1,100.00
DMCBR01.02	Prueba rápida de Campylobacter	Heces	2	Cassette	$280.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Factor Reumatoide

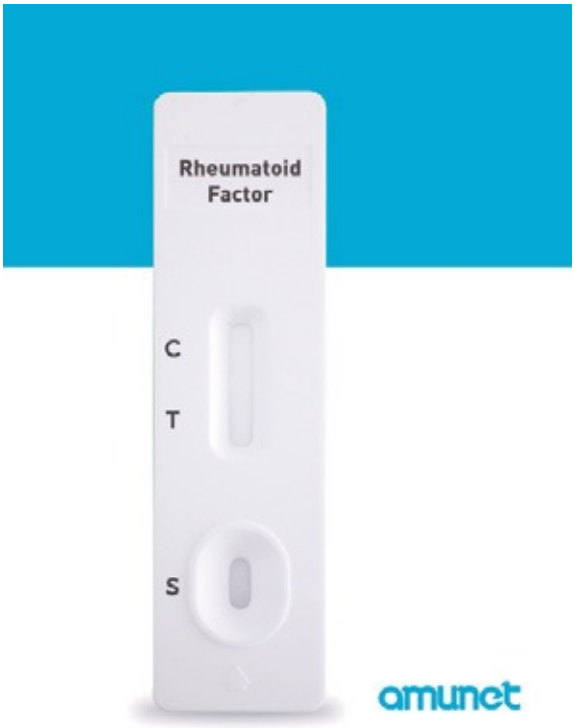


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Factor Reumatoide?

La Prueba Rápida de Factor Reumatoide (FR) es un auxiliar diagnóstico que se utiliza para detectar la presencia de factor reumatoide en la sangre. El factor reumatoide es un anticuerpo producido por el sistema inmunológico que puede atacar los tejidos sanos del cuerpo, en lugar de combatir infecciones externas. Este tipo de prueba es particularmente útil en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, especialmente la artritis reumatoide.

Modo de uso

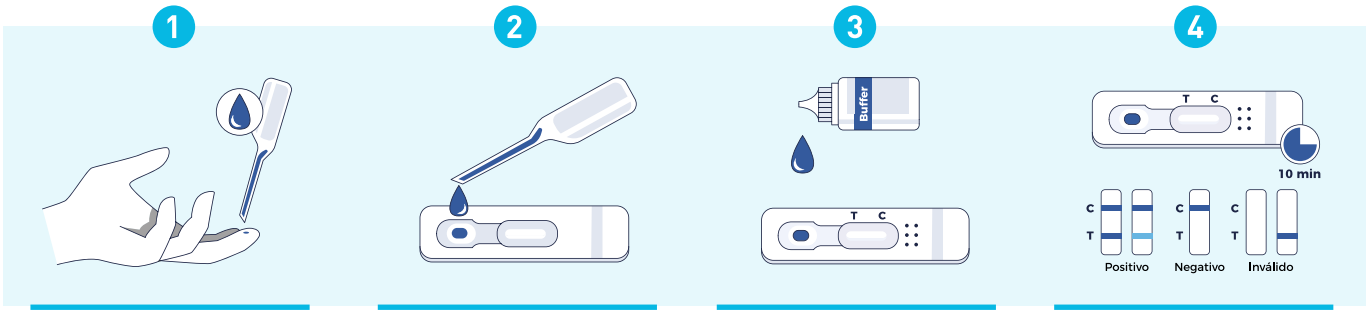

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMFRE01.20	Prueba rápida de Factor Reumatoide	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,100.00
DMFRE01.05	Prueba rápida de Factor Reumatoide	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$350.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Giardia Lamblia




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Giardia Lamblia?

La Prueba Rápida de Giardia Lamblia es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar de manera rápida la presencia del parásito Giardia lamblia en muestras fecales. Giardia lamblia es un protozoo que causa la giardiasis, una infección intestinal común que puede llevar a síntomas como diarrea, dolor abdominal y malestar gastrointestinal.

Modo de uso

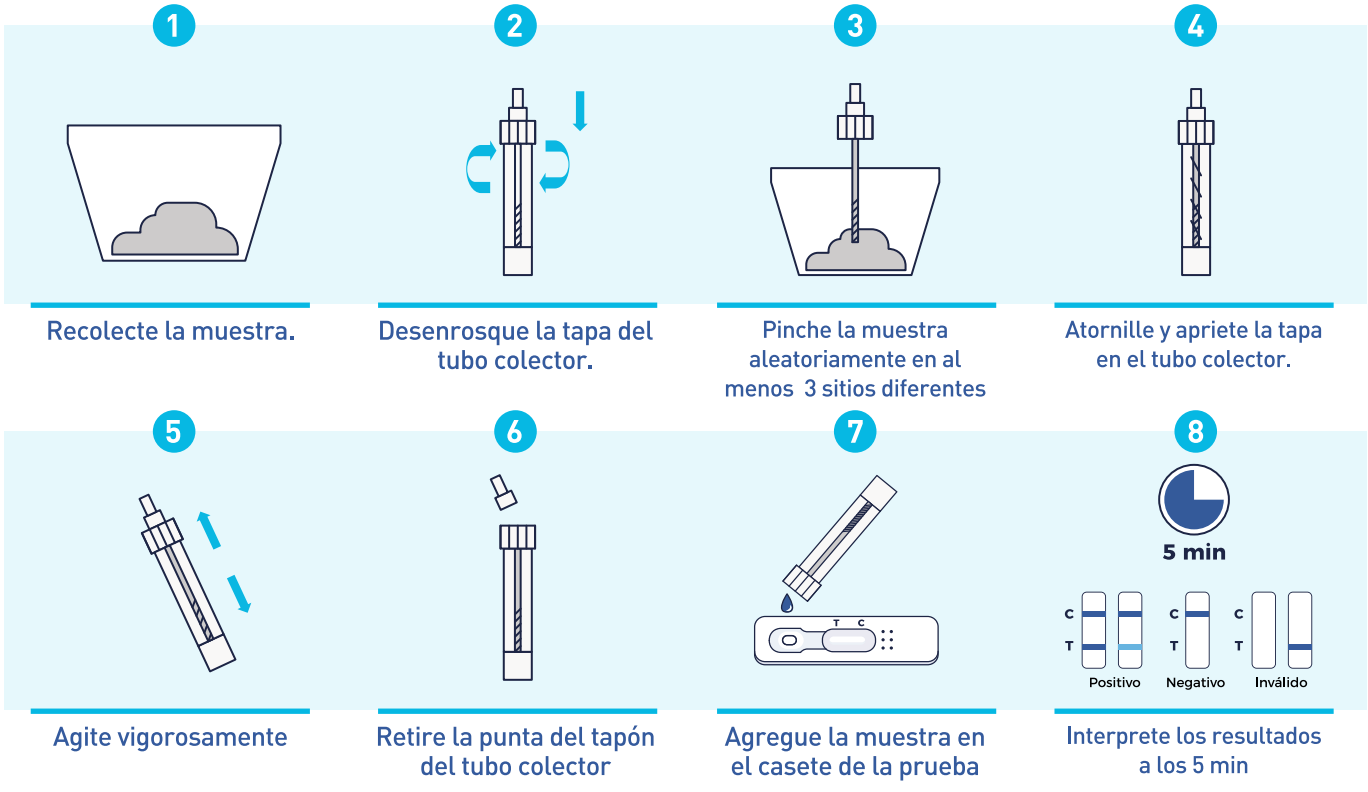

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMGIA01.20	Prueba rápida de Giardia Lamblia	Heces	20	Cassette	$1,620.00
DMGIA01.05	Prueba rápida de Giardia Lamblia	Heces	5	Cassette	$445.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de IgE




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de IgE?

La Prueba Rápida de IgE es un auxiliar diagnóstico que mide los niveles de anticuerpos IgE en la sangre para ayudar en la identificación de alergias y reacciones alérgicas. La inmunoglobulina E (IgE) es un tipo de anticuerpo producido por el sistema inmunológico en respuesta a alérgenos.

Modo de uso

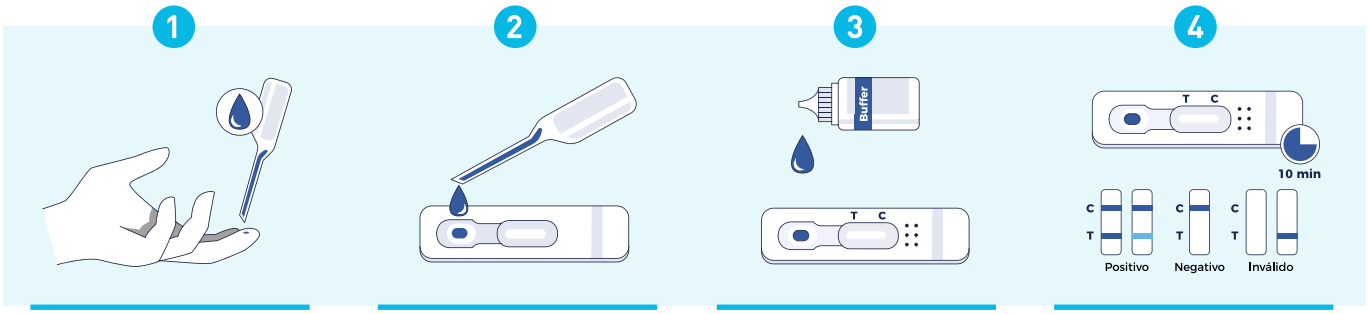

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMIGE01.20	Prueba rápida de IgE	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,200.00
DMIGE01.05	Prueba rápida de IgE	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$375.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Mononucleosis




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Mononucleosis?

La Prueba Rápida de Mononucleosis es una herramienta auxiliar para la detección de la presencia de anticuerpos específicos en la sangre que indican una infección por el virus de Epstein-Barr (EBV), el agente causante de la mononucleosis infecciosa.

Modo de uso

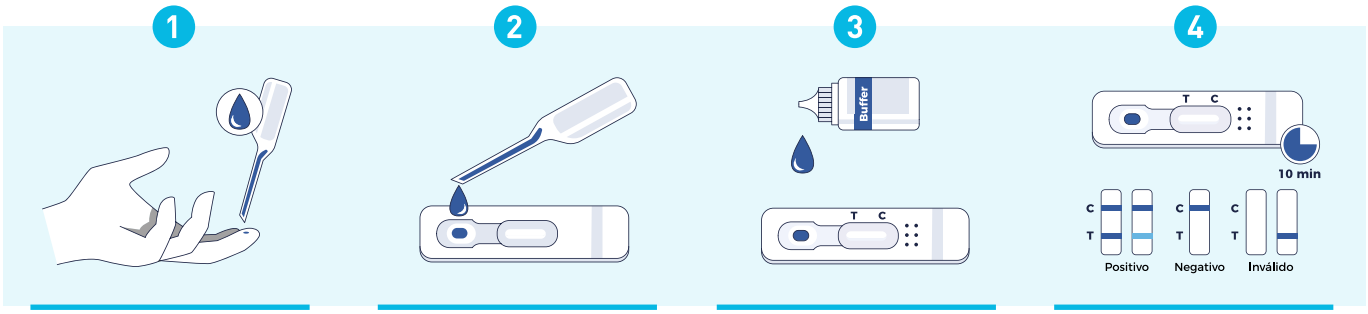


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMMON01.20	Prueba rápida de Mononucleosis	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,100.00
DMMON01.05	Prueba rápida de Mononucleosis	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$350.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Tétanos

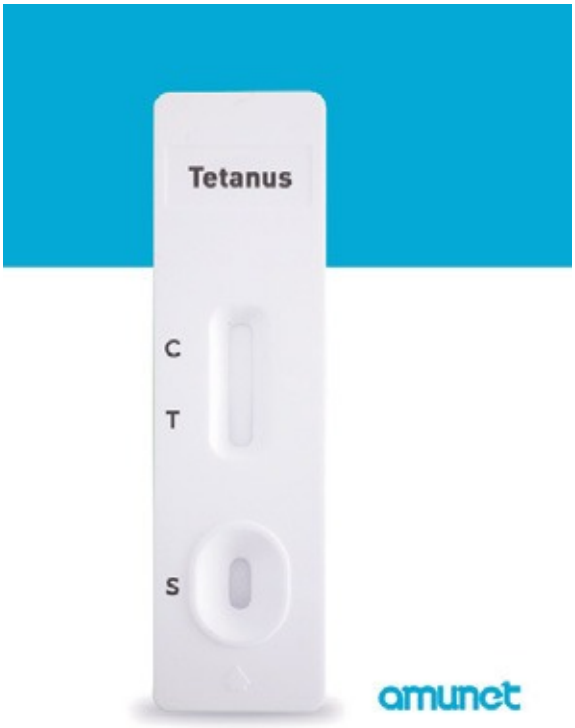


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Tétanos?

La Prueba Rápida de Tétanos es un auxiliar diagnóstico utilizado para detectar la presencia de anticuerpos contra la toxina del Clostridium tetani, la bacteria que causa el tétanos. Esta prueba ayuda a evaluar el estado de inmunización de una persona o a confirmar una infección reciente por tétanos.

Modo de uso

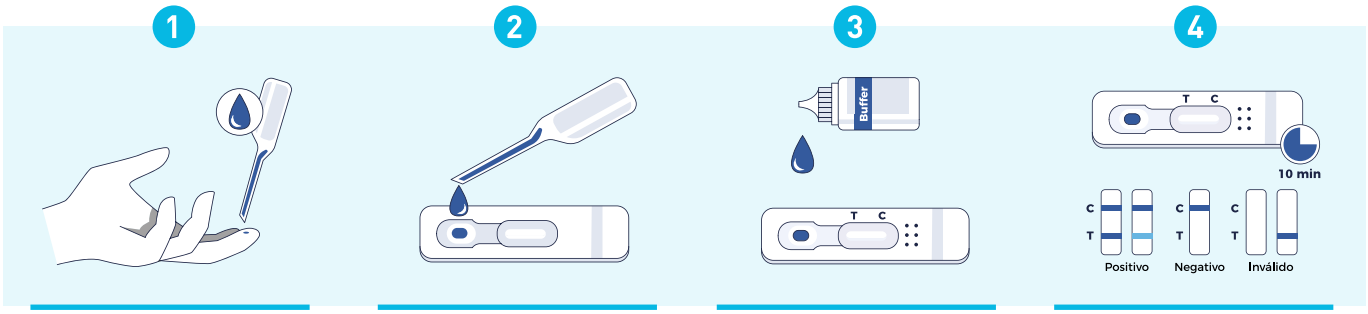


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMTET01.20	Prueba rápida de Tétanos	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$2,020.00
DMTET01.05	Prueba rápida de Tétanos	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$580.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Tifoidea

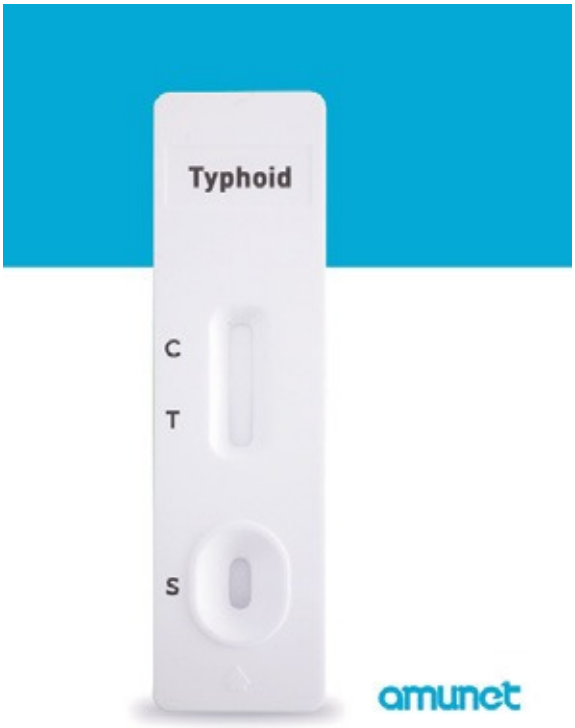


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Tifoidea?

La Prueba Rápida de Tifoidea es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar la presencia de anticuerpos específicos contra la bacteria Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea. Esta prueba ayuda a confirmar la infección tifoidea en pacientes que presentan síntomas compatibles y en contextos donde la fiebre tifoidea es una preocupación.

Modo de uso

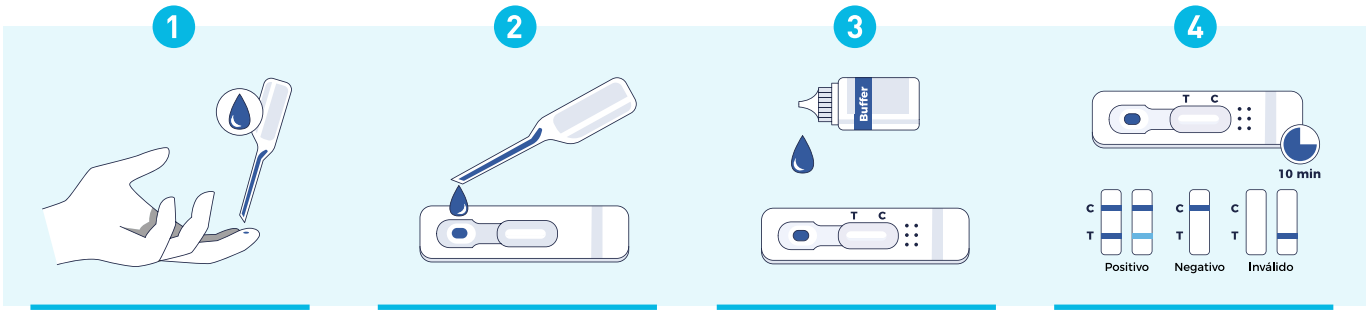

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMTIF01.20	Prueba rápida de Tifoidea	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,300.00
DMTIF01.05	Prueba rápida de Tifoidea	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$400.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

CARBAPENOS 5 EN 1



Reseña

¿Qué es la prueba CARBAPENOS 5 EN 1?

Prueba rápida de flujo lateral que indica, en un solo cartucho, con cuál de cinco familias de carbapenemasas (NDM, KPC, OXA-48, IMP o VIM) es compatible un aislado bacteriano, a partir de colonia aislada y con lectura visual a los 15 minutos. Producto de uso exclusivo en investigación (RUO). Caja con 10 pruebas. Información dirigida a profesionales de la salud.

amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCRB01	CARBAPENOS 5 EN 1	Colonia / cultivo	10	Cassette	$6,000.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida LABFAST Salmonella spp



Reseña

¿Qué es la prueba rápida LABFAST Salmonella spp?

Tira de inmunocromatografía LABFAST-SALMONELLA para la detección cualitativa de Salmonella spp. en alimentos y superficies previamente enriquecidas conforme a la NOM-210-SSA1-2014. Resultado en 15 minutos; sensibilidad 100 % y especificidad 94.4 % frente a identificación bioquímica. Para programas de monitoreo ambiental e inocuidad.

amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLBIO01-2	Prueba rápida LABFAST Salmonella spp	Colonia / cultivo	20	Tiras	$1,000.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Pediátricas

Prueba rápida de Antígeno de Salmonella typhi

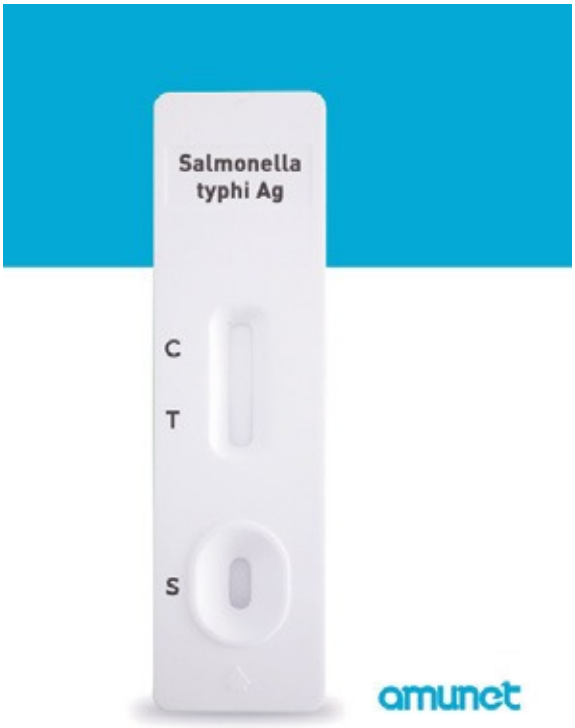


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Antígeno de Salmonella typhi?

La Prueba Rápida de Antígeno de Salmonella typhi es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar la presencia de antígenos específicos de la bacteria Salmonella typhi en una muestra biológica. Salmonella typhi es el agente causante de la fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa grave que puede presentar síntomas como fiebre alta, dolor abdominal, y erupciones cutáneas.

Modo de uso

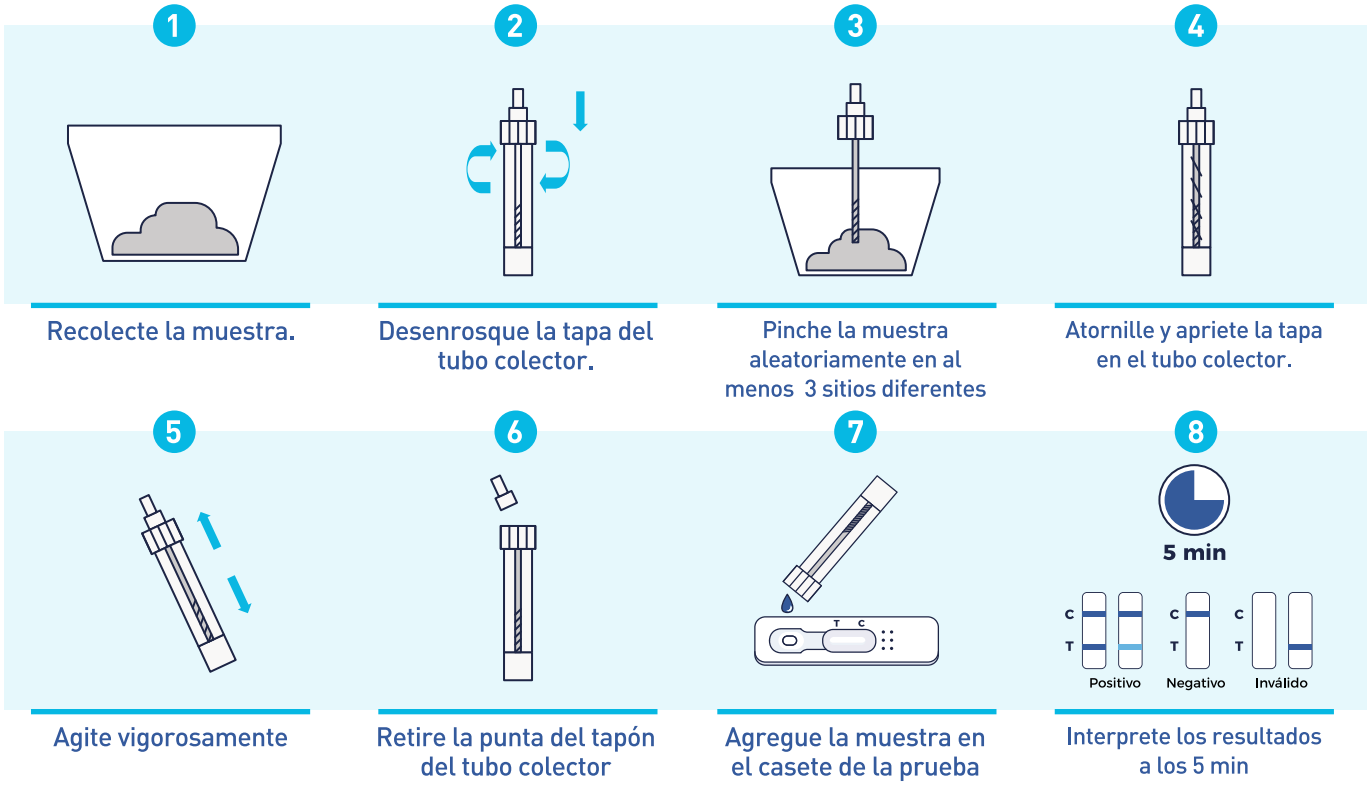


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMSAT01.20	Prueba rápida de Antígeno de Salmonella typhi	Heces	20	Cassette	$1,300.00
DMSAT01.05	Prueba rápida de Antígeno de Salmonella typhi	Heces	5	Cassette	$400.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Entamoeba histolytica

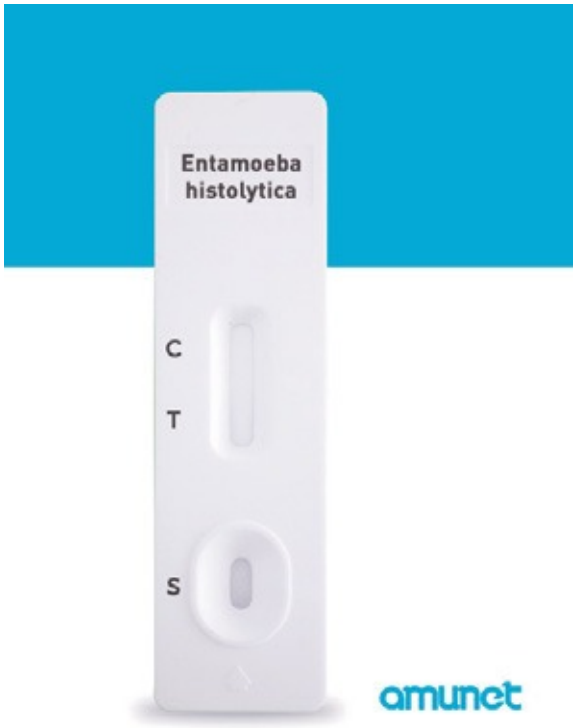


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Entamoeba histolytica?

La Prueba Rápida de Entamoeba histolytica es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar la presencia de antígenos específicos de la ameba Entamoeba histolytica en una muestra biológica. Esta ameba es el agente causante de la amebiasis, una infección intestinal que puede llevar a síntomas como diarrea, dolor abdominal y, en casos graves, disentería.

Modo de uso

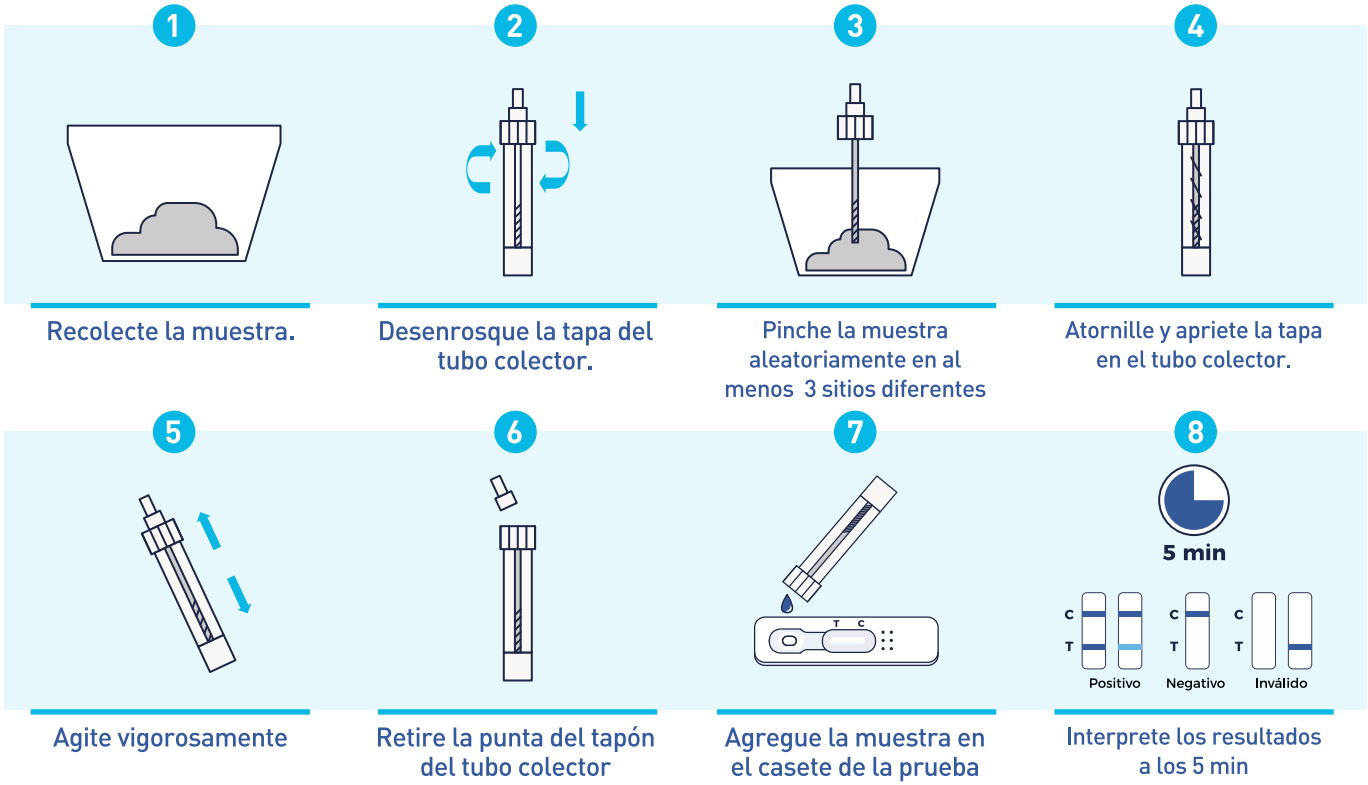


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMENT01.20	Prueba rápida de Entamoeba histolytica	Heces	20	Cassette	$2,300.00
DMENT01.05	Prueba rápida de Entamoeba histolytica	Heces	5	Cassette	$725.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Ferritina

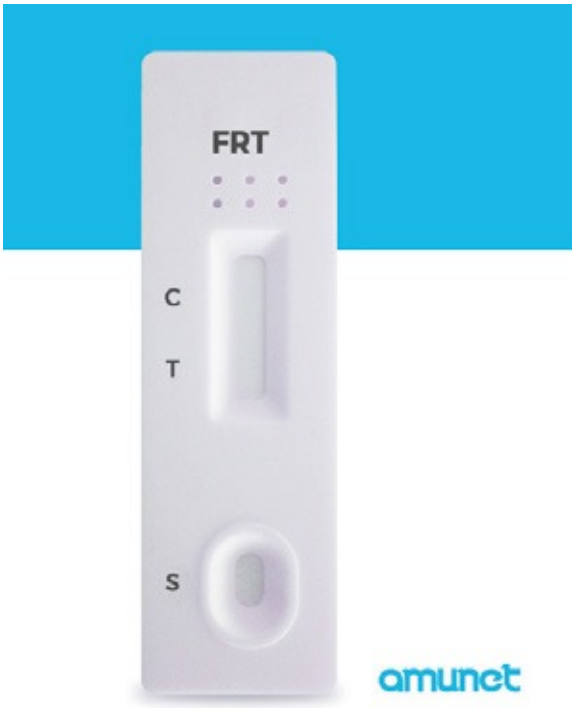


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Ferritina?

La prueba de ferritina es un análisis de sangre que mide la cantidad de ferritina en el cuerpo, detectando niveles superiores a 30 ng/mL en muestras de sangre capilar. La ferritina es una proteína que almacena hierro y lo libera de manera controlada cuando el organismo lo necesita. La prueba de ferritina es útil para evaluar los niveles de hierro en el cuerpo y detectar posibles deficiencias o excesos de hierro. Un resultado negativo puede indicar una deficiencia de hierro por una probable Anemia Carencial recomendándose dar tratamiento empírico con hematínicos, toma de Biometría Hemática y esclarecer la etiología de la Anemia.

Modo de uso

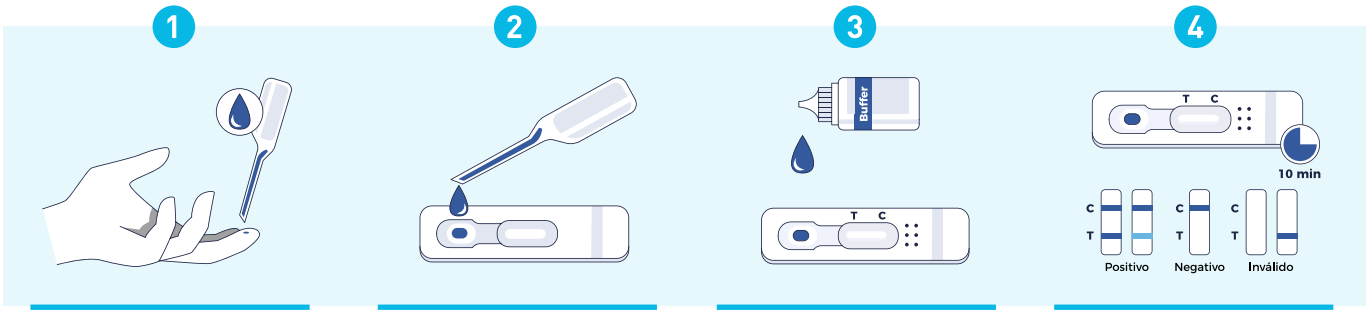

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMFRT02.20	Prueba rápida de Ferritina	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$2,161.00
DMFRT02.05	Prueba rápida de Ferritina	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$578.00

Registro sanitario COFEPRIS 0183R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Rotavirus y Adenovirus




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Rotavirus y Adenovirus?

La Prueba Rápida de Rotavirus y Adenovirus es un auxiliar diagnóstico utilizado para detectar la presencia de antígenos de rotavirus y adenovirus en muestras biológicas, generalmente heces. Ambos virus son causas comunes de gastroenteritis en niños y pueden provocar síntomas como diarrea, vómitos y dolor abdominal.

Modo de uso

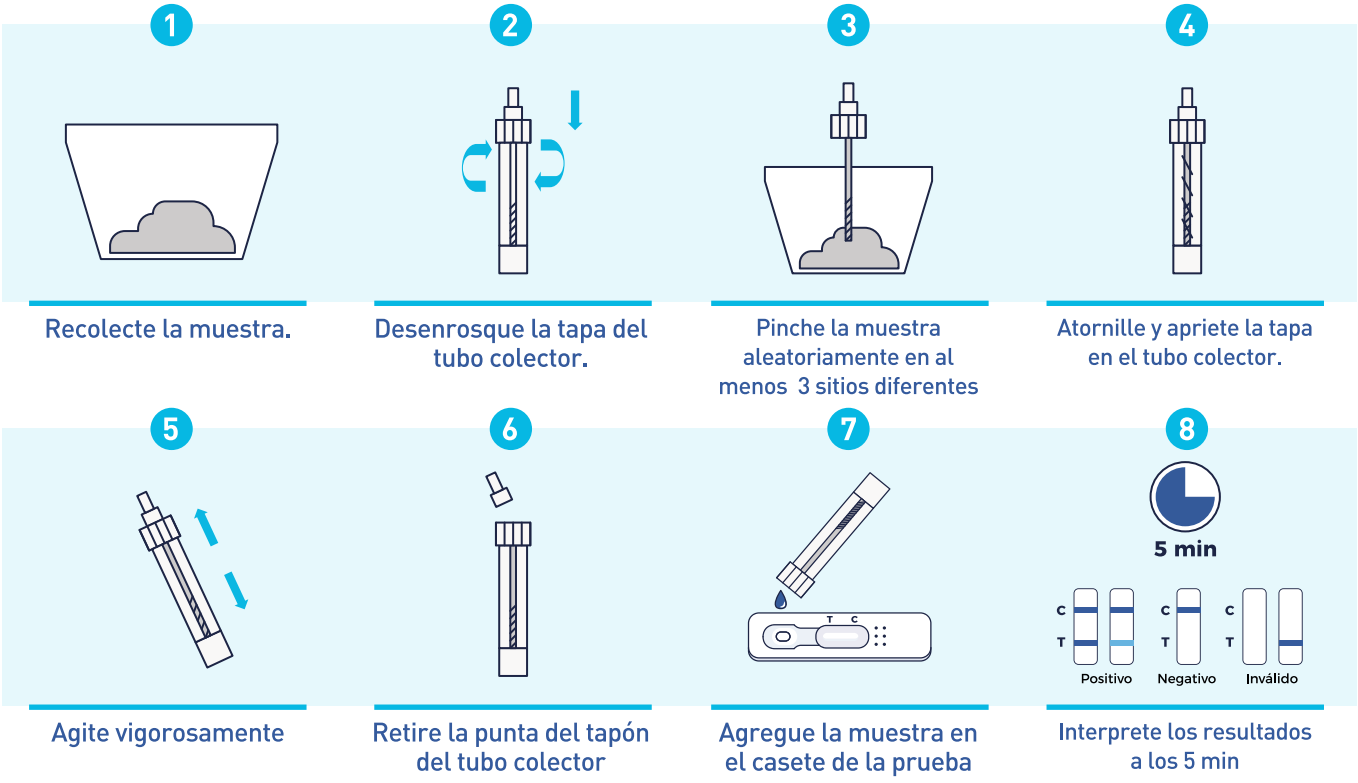

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMRAV01.20	Prueba rápida de Rotavirus y Adenovirus	Heces	20	Cassette	$1,852.00
DMRAV01.05	Prueba rápida de Rotavirus y Adenovirus	Heces	5	Cassette	$481.00

Registro sanitario COFEPRIS 2789R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Vitamina D




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Vitamina D?

La Prueba Rápida de Vitamina D es un auxiliar diagnóstico diseñado para medir los niveles de vitamina D en una muestra biológica, generalmente sangre. Esta prueba es utilizada para evaluar el estatus de vitamina D en el cuerpo y detectar deficiencias o excesos de esta vitamina esencial.

Modo de uso

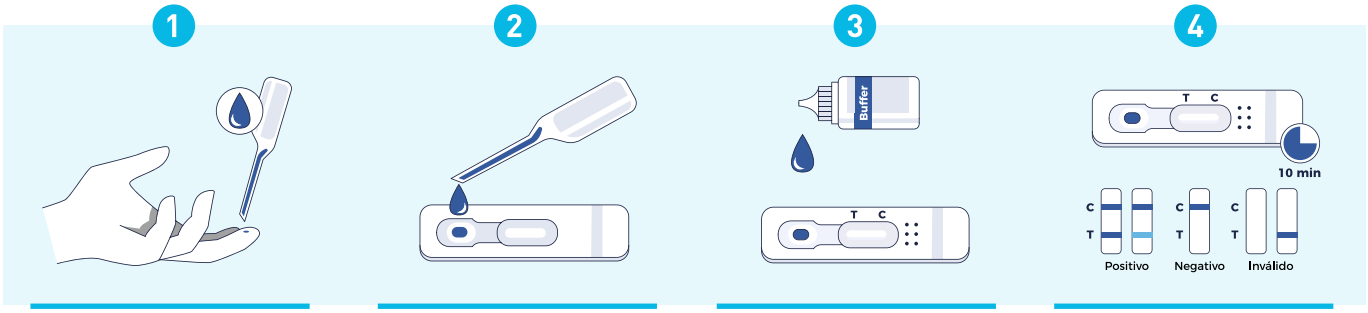

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMVID01.10	Prueba rápida de Vitamina D	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$1,181.00
DMVID01.05	Prueba rápida de Vitamina D	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$670.00
DMVID01.02	Prueba rápida de Vitamina D	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$290.00

Registro sanitario COFEPRIS 0252R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Shigella flexneri




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Shigella flexneri?

La Prueba Rápida de Shigella flexneri es un auxiliar diagnóstico utilizado para detectar la presencia de la bacteria Shigella flexneri en una muestra de heces. Esta bacteria es una de las principales causantes de la shigelosis, una infección intestinal que provoca diarrea severa y otros síntomas gastrointestinales.

Modo de uso

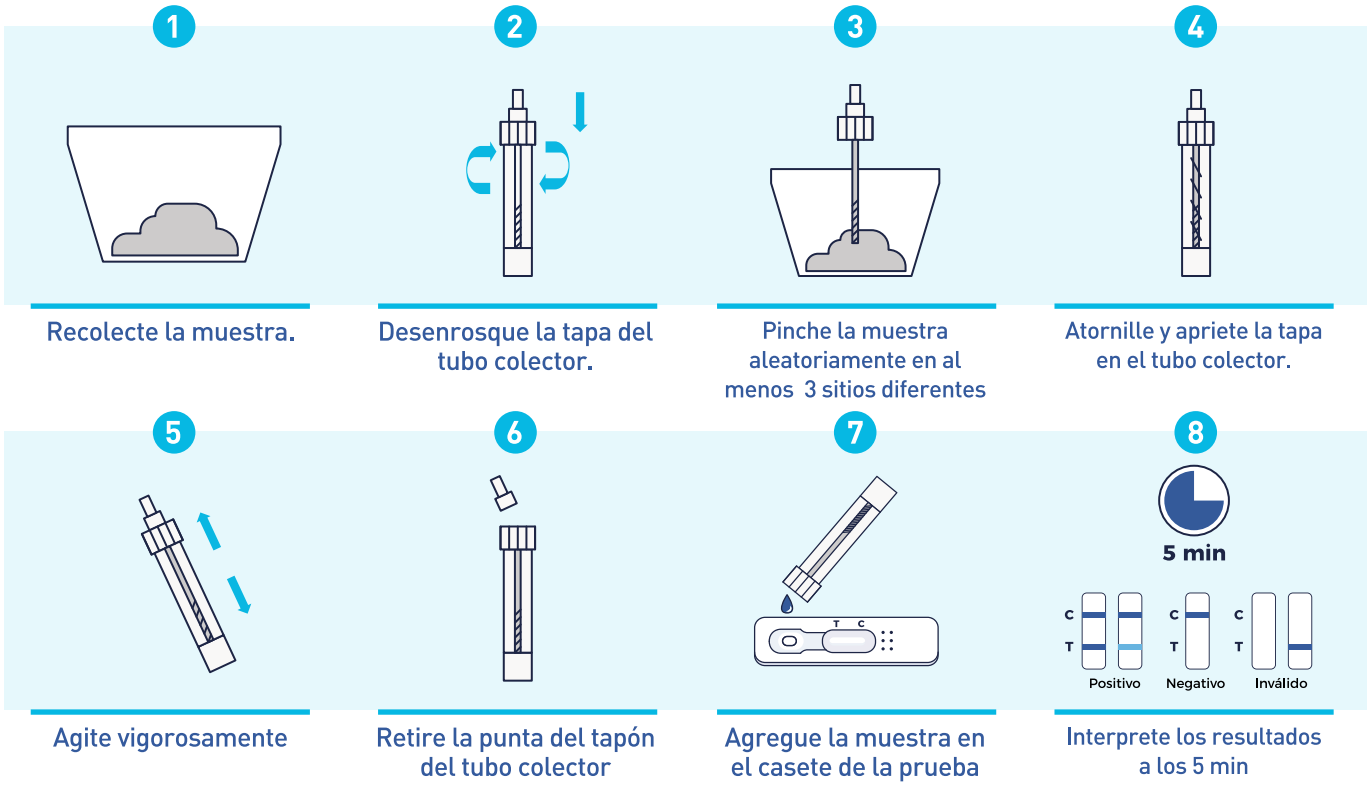

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMSGF01.10	Prueba rápida de Shigella flexneri	Heces	10	Cassette	$3,000.00
DMSGF01.05	Prueba rápida de Shigella flexneri	Heces	5	Cassette	$1,720.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Infecciosa Zoonótica

Prueba rápida de Chagas




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Chagas?

La Prueba Rápida de Chagas es un test diagnóstico diseñado para detectar la presencia de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Esta prueba es una herramienta útil para el diagnóstico temprano y la detección de la infección por Chagas, especialmente en personas que viven en áreas endémicas.

Modo de uso

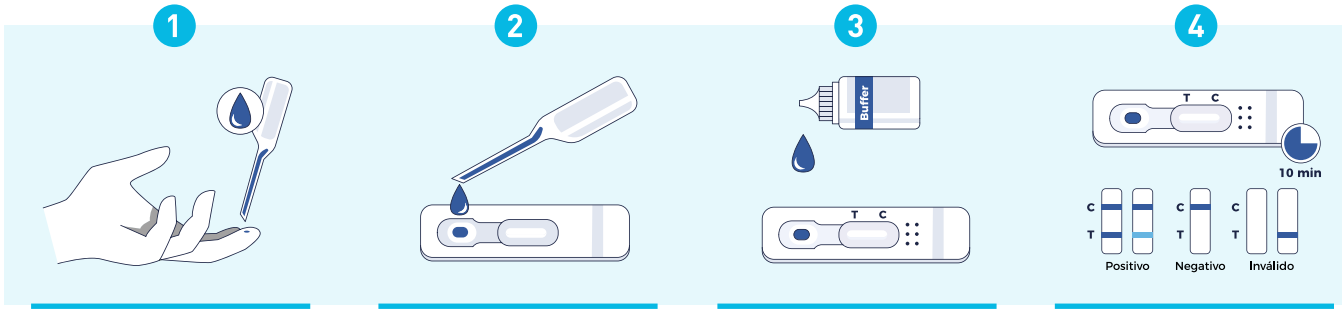

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCHA01.20	Prueba rápida de Chagas	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$700.00
DMCHA01.05	Prueba rápida de Chagas	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$250.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Chikungunya IgG e IgM




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Chikungunya IgG e IgM?

La Prueba Rápida de Chikungunya IgG e IgM es un test diagnóstico que permite detectar de manera rápida y sencilla la presencia de anticuerpos IgG e IgM específicos contra el virus del Chikungunya en una muestra de sangre.

Modo de uso

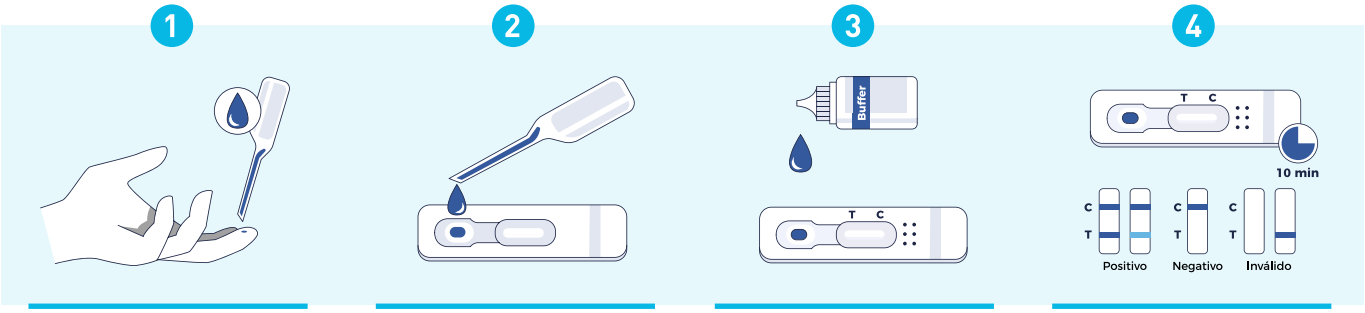

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCHI01.20	Prueba rápida de Chikungunya IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,300.00
DMCHI01.05	Prueba rápida de Chikungunya IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$400.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Dengue NS1, IgG e IgM




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Dengue NS1, IgG e IgM?

La Prueba Rápida de Dengue NS1, IgG e IgM es un auxiliar de diagnóstico diseñado para detectar de manera rápida y sencilla diferentes marcadores del virus del dengue en muestras de sangre. Esta prueba es una herramienta crucial en la identificación temprana y precisa de la infección por dengue, diferenciando entre una infección reciente, una infección pasada y una infección en curso.

Modo de uso

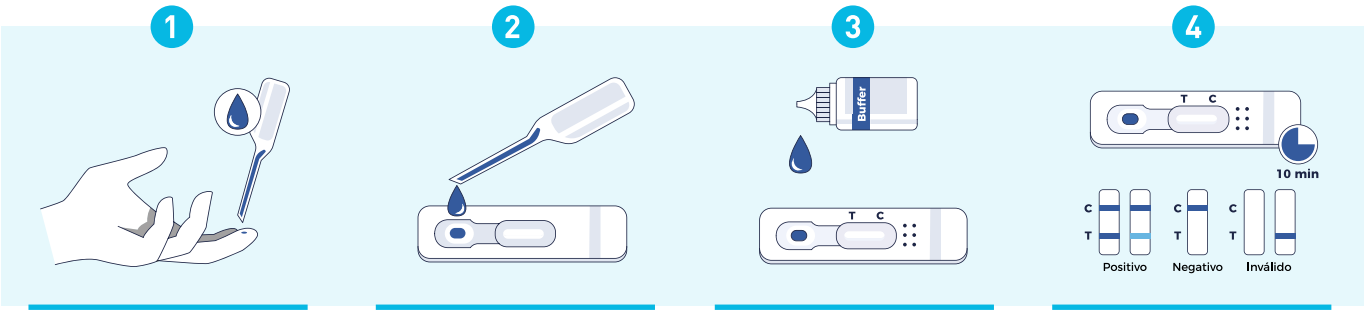

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMDEN01.20	Prueba rápida de Dengue NS1, IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,740.00
DMDEN01.05	Prueba rápida de Dengue NS1, IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$498.00

Registro sanitario COFEPRIS 1003R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Dengue IgG e IgM




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Dengue IgG e IgM?

La Prueba Rápida de Dengue IgG e IgM es un auxiliar de diagnóstico utilizado para detectar la presencia de anticuerpos IgG e IgM en la sangre, los cuales son producidos por el sistema inmunológico en respuesta a una infección por el virus del dengue.

Modo de uso

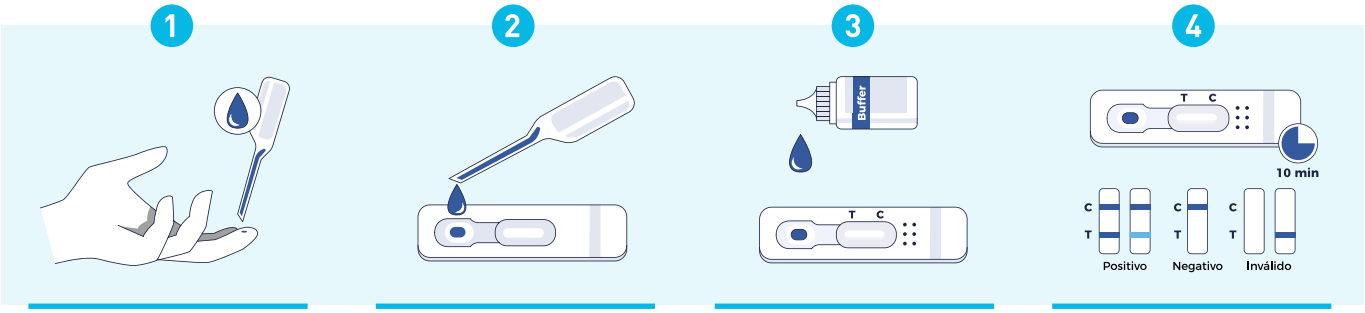

1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMDEN02.20	Prueba rápida de Dengue IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,260.00
DMDEN02.05	Prueba rápida de Dengue IgG e IgM	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$342.00

Registro sanitario COFEPRIS 1003R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Zika, IgG e IgM y NS1




Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Zika, IgG e IgM y NS1?

La Prueba Rápida de Zika IgG e IgM y NS1 es un auxiliar diagnóstico diseñado para detectar la presencia de anticuerpos específicos y el antígeno del virus del Zika en una muestra de sangre. Esta prueba ayuda a identificar si una persona está infectada con el virus del Zika, y a distinguir entre una infección reciente y una más antigua.

Modo de uso

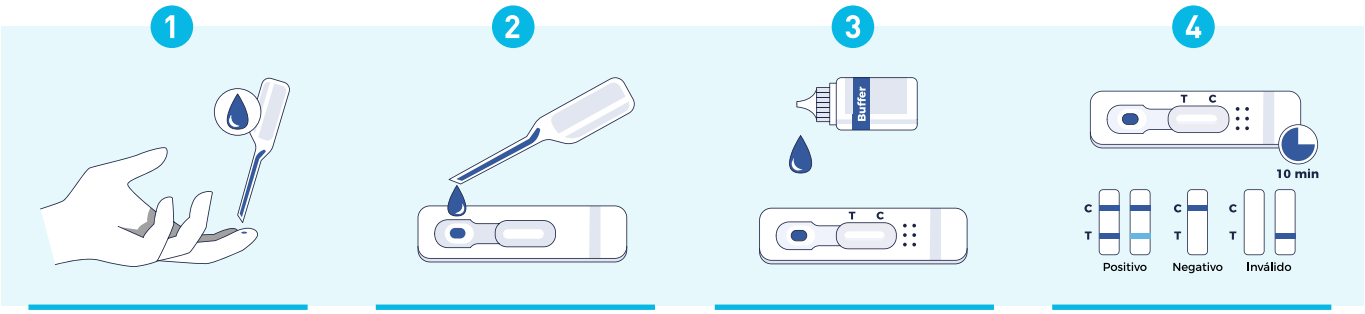


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMZIK01.10	Prueba rápida de Zika, IgG e IgM y NS1	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$2,650.00
DMZIK01.05	Prueba rápida de Zika, IgG e IgM y NS1	Sangre/Suero/ Plasma	5	Cassette	$1,500.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Dengue, Zika y Chikungunya (Combo Mosquito)

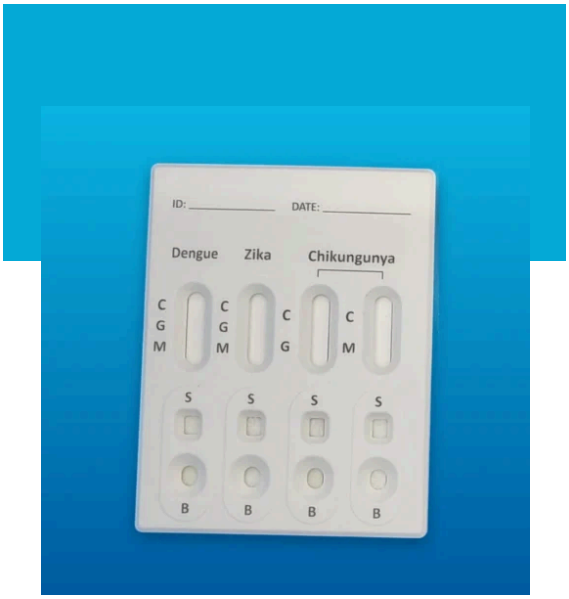


amunet

Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Dengue, Zika y Chikungunya (Combo Mosquito)?

Inmunoensayo de flujo lateral 3 en 1 que detecta anticuerpos IgM e IgG contra los virus del dengue, chikungunya y zika en sangre capilar, total, suero o plasma. Seis resultados en canales independientes a los 10 minutos, para el diagnóstico diferencial de las tres arbovirosis en una sola toma. Uso profesional.

Modo de uso

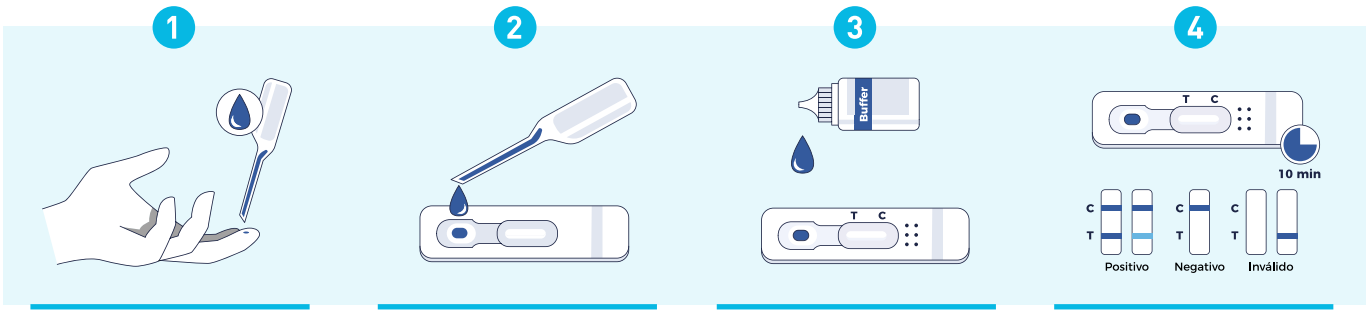

Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMDCZ01.10	Prueba rápida de Dengue, Zika y Chikungunya (Combo Mosquito)	Sangre/Suero/ Plasma	10	Cassette	$2,100.00

Registro sanitario COFEPRIS 0948R2026 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



Gastrointestinales

Prueba rápida de Calprotectina

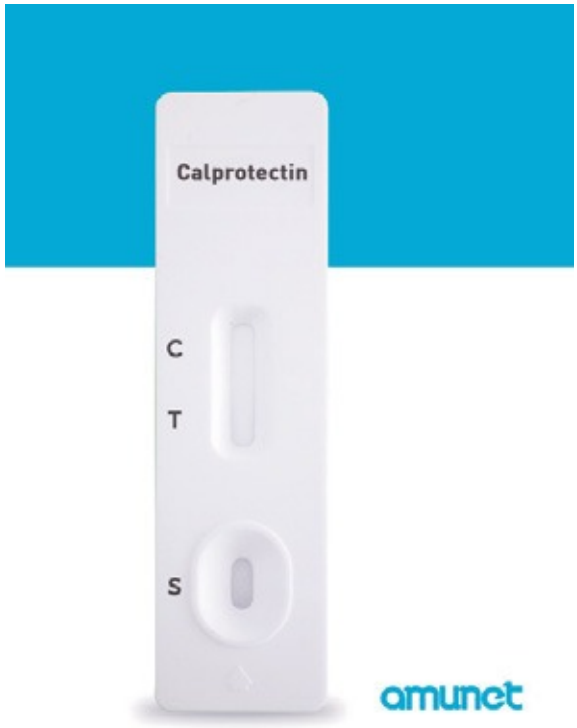


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Calprotectina?

La Prueba Rápida de Calprotectina es un auxiliar diagnóstico que mide la cantidad de calprotectina en las heces. La calprotectina es una proteína que se libera en el tracto gastrointestinal durante procesos inflamatorios. Esta prueba se utiliza para ayudar a diagnosticar y monitorear enfermedades inflamatorias intestinales (EII), como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Modo de uso

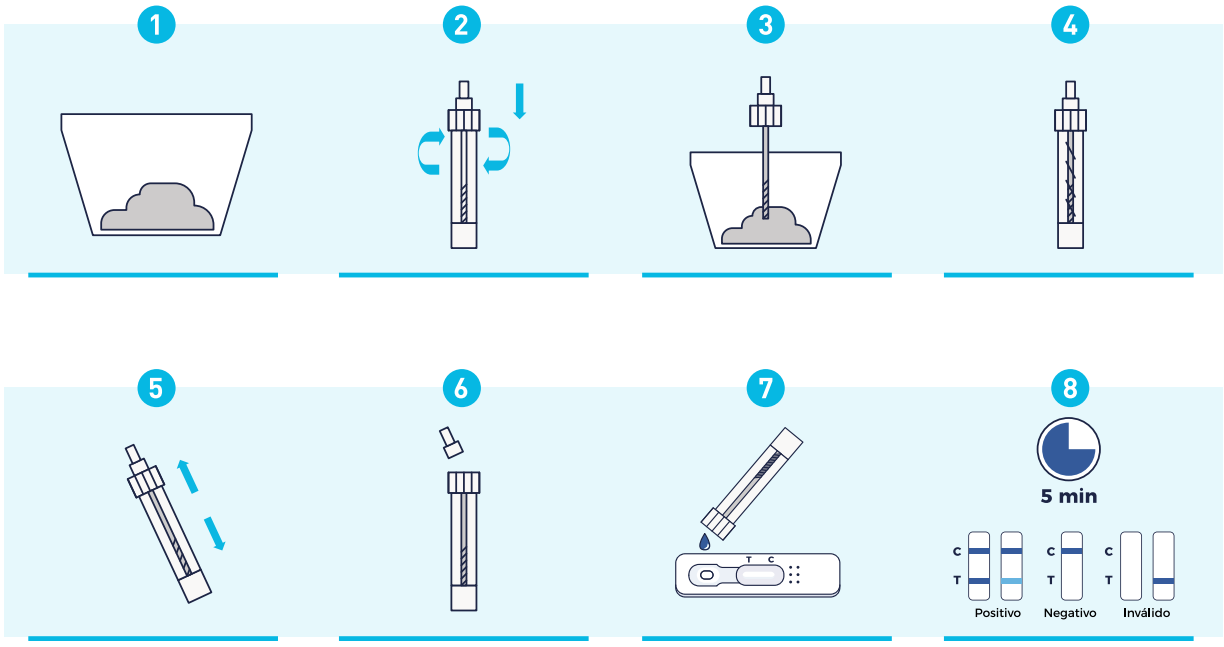


Consulte el procedimiento completo en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMCAL01.20	Prueba rápida de calprotectina fecal	Heces	20	Cassette	$2,125.00
DMCAL01.05	Prueba rápida de calprotectina fecal	Heces	5	Cassette	$700.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Helicobacter pylori

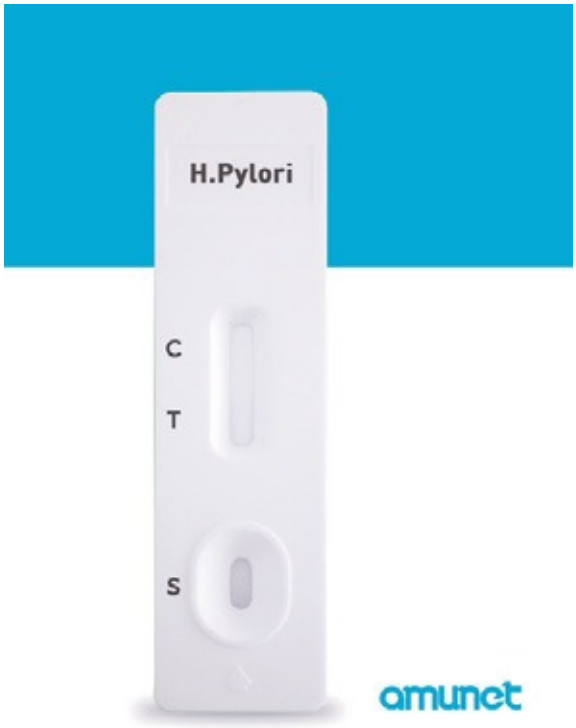


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Helicobacter pylori?

La Prueba Rápida de Helicobacter pylori es un auxiliar diagnóstico utilizado para detectar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en el estómago. Esta bacteria es conocida por su asociación con diversas condiciones gástricas, incluyendo úlceras pépticas y gastritis. La prueba se realiza comúnmente mediante una muestra de heces, una muestra de aliento o un análisis de sangre.

Modo de uso

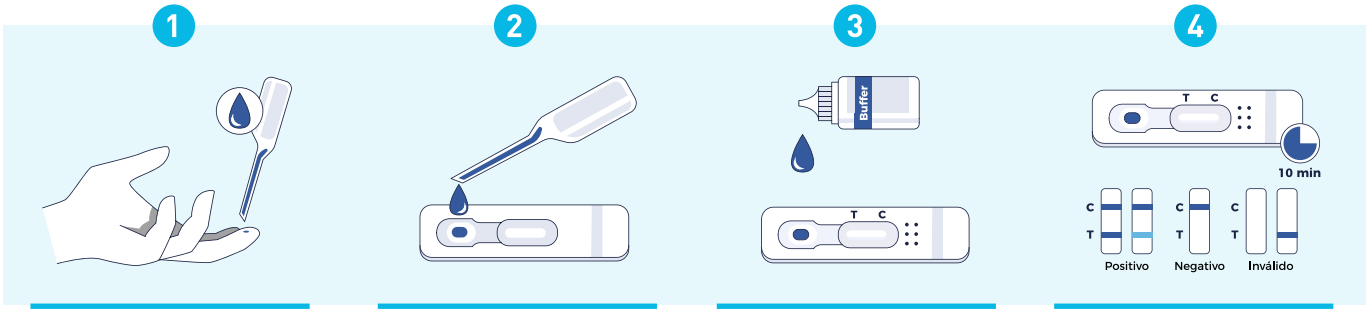


1. Recolecte 3 gotas de sangre, o 2 gotas de suero o plasma.
2. Coloque la muestra recolectada en el casete de prueba.
3. Agregue 1 gota de buffer.
4. Puede interpretarlos en 10 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
PTHPY01.20	Prueba rápida de Helicobacter pylori	Sangre/Suero/ Plasma	20	Cassette	$1,300.00
PTHPY01.02	Prueba rápida de Helicobacter pylori	Sangre/Suero/ Plasma	2	Cassette	$160.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

Prueba rápida de Helicobacter pylori en Heces

Ag

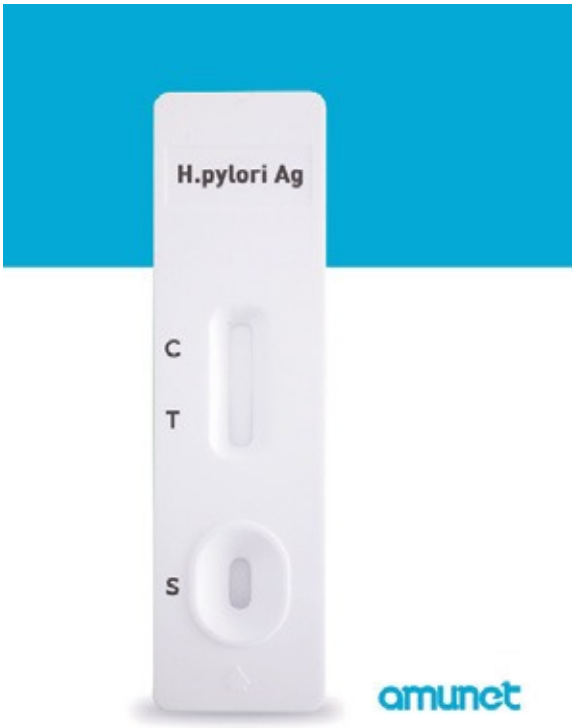


Reseña

¿Qué es la prueba rápida de Helicobacter pylori en Heces Ag?

La Prueba Rápida de Helicobacter pylori en Heces (Ag) es un auxiliar diagnóstico que detecta la presencia de antígenos de Helicobacter pylori en una muestra de heces. Esta prueba es utilizada para confirmar la infección activa por esta bacteria, que está asociada con condiciones gástricas como úlceras pépticas y gastritis.

Modo de uso

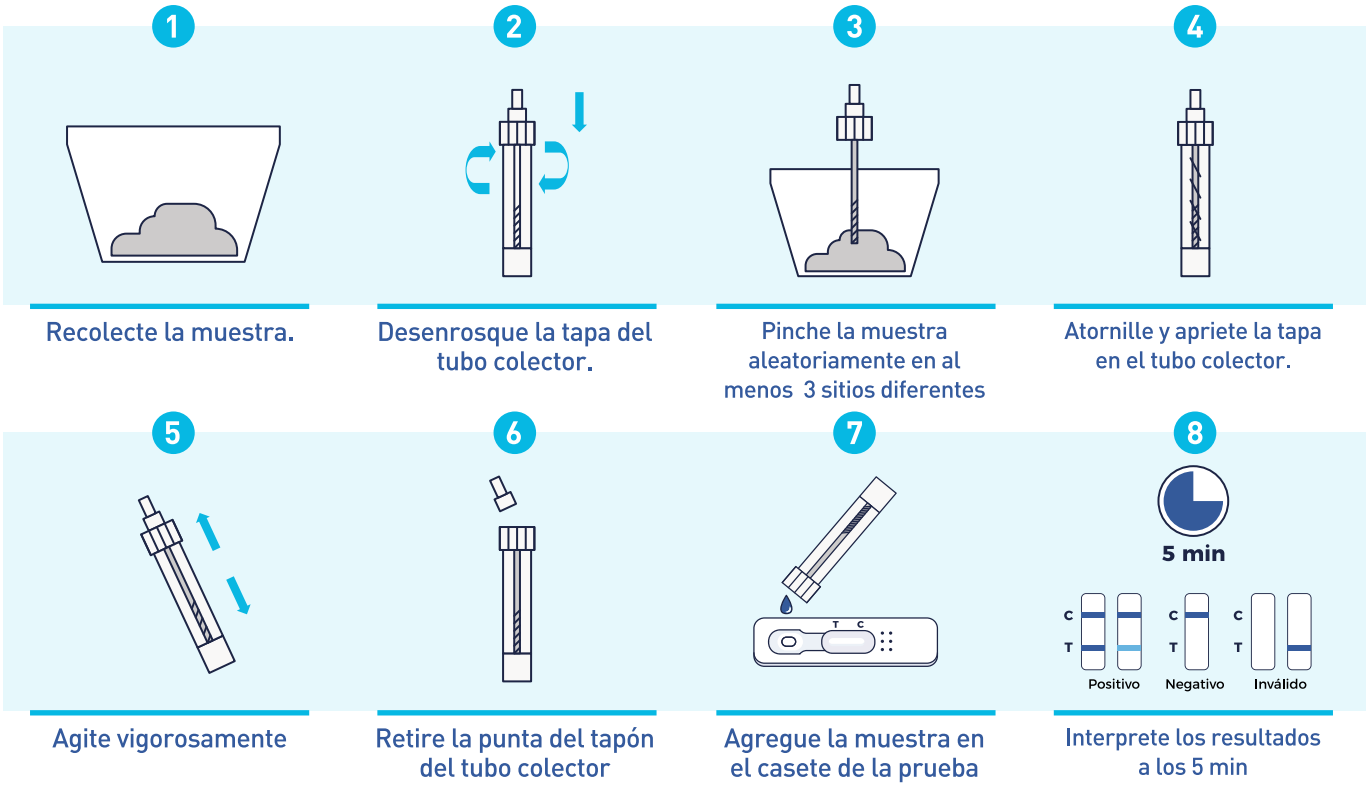

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DMHPY02.20	Prueba rápida de Helicobacter pylori en Heces	Heces	20	Cassette	$2,600.00
DMHPY02.02	Prueba rápida de Helicobacter pylori en Heces	Heces	2	Cassette	$290.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida

Bionet Multi PCR-rápida RT-LAMP

CONFIRMACIÓN DE AMPLICONES



Reseña

¿Qué es Bionet Multi PCR-rápida RT-LAMP?

Tira reactiva de flujo lateral para la confirmación rápida de amplicones de PCR o RT-LAMP y la detección de proteínas. Identifica de forma visual cualquier complejo marcado con biotina y FITC (fluoresceína), con resultado en 5 minutos, sin electroforesis en gel ni equipos adicionales.

amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLBIO01	Bionet Multi PCR-rápida RT-LAMP	Amplicones PCR / RT-LAMP	20	Tiras	$2,400.00

Registro sanitario COFEPRIS 0037R2024 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida para Campylobacter (jejuni/coli)

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA RT-LAMP

Reseña



amunet

¿Qué es la PCR rápida para Campylobacter (jejuni/coli)?

PCR rápida RT-LAMP que detecta Campylobacter jejuni y C. coli por su material genético en canales de pollo, enjuagues y enriquecimientos, con amplificación isotérmica sin termociclador. Ambas especies figuran entre las causas más comunes de gastroenteritis bacteriana y su detección por cultivo tradicional es lenta.

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLCAM01.10	PCR rápida para Campylobacter (jejuni/coli)	Canales / enjuagues / nriquecimiento	10	Reacciones	$1,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida para E. coli 0157:H7 (enterohemorrágica)

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA RT-LAMP



amunet

Reseña

¿Qué es la PCR rápida para E. coli 0157:H7 (enterohemorrágica)?

PCR rápida por amplificación isotérmica (RT-LAMP) que detecta secuencias específicas de Escherichia coli 0157:H7 sin termociclador. Este serotipo enterohemorrágico, productor de toxina Shiga, se vincula a carne molida mal cocida, hortalizas de hoja verde, jugos no pasteurizados y agua contaminada, por lo que su búsqueda es prioritaria en plantas cárnicas y agrícolas.

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLEC001	PCR rápida para E. coli 0157:H7 (enterohemorrágica)	Alimentos	10	Reacciones	$1,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida para Listeria monocytogenes

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA RT-LAMP



Reseña

¿Qué es la PCR rápida para Listeria monocytogenes?

PCR rápida RT-LAMP que identifica el material genético de Listeria monocytogenes en hisopos ambientales y muestras de producto, de forma isotérmica y sin termociclador. Útil para el monitoreo de zonas de proceso en quesos frescos, lácteos, cárnicos listos para consumo y productos refrigerados.

amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLISL01	PCR rápida para Listeria monocytogenes	Hisopos ambientales / producto	10	Reacciones	$1,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida para Salmonella spp

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA RT-LAMP



Reseña

¿Qué es la PCR rápida para Salmonella spp?

Prueba de PCR rápida por RT-LAMP que amplifica el ADN de Salmonella spp. sin necesidad de termociclador, a partir de hisopados de superficie, enjuagues de canal o enriquecimientos. Salmonella spp. es una de las principales causas de enfermedad transmitida por alimentos, por lo que su vigilancia es obligada en programas de inocuidad y liberación de lote.

amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLSAN01	PCR rápida para Salmonella spp	Superficies / enjuagues / nriquecimiento	—	Reacciones	$1,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida para Staphylococcus aureus

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA RT-LAMP



Reseña

¿Qué es la PCR rápida para Staphylococcus aureus?

PCR rápida RT-LAMP que confirma la presencia de Staphylococcus aureus en muestras de alimento, superficies e hisopados de manipuladores, mediante amplificación isotérmica que no requiere termociclador. Herramienta para verificar buenas prácticas de manufactura.

amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLAUR01	PCR rápida para Staphylococcus aureus	Alimentos / superficies / hisopados	10	Reacciones	$1,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida para Tuberculosis

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA LAMP



Reseña

¿Qué es la PCR rápida para Tuberculosis?

Kit de PCR rápida que detecta ADN de Mycobacterium tuberculosis en esputo y en muestras extrapulmonares, mediante amplificación isotérmica LAMP a 65 °C con revelado en tira de flujo lateral; no requiere termociclador. Funciona con las variantes genéticas más frecuentes de tuberculosis. Caja con 10 reacciones y 2 controles para verificar el correcto funcionamiento de los reactivos.

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLTB01.10	PCR rápida para Tuberculosis	Esputo / extrapulmonar	10	Reacciones	$2,900.00

Registro sanitario COFEPRIS 1255R2026 SSA
*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida para VPH (Virus del Papiloma Humano)

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA



amunet

Reseña

¿Qué es la PCR rápida para VPH (Virus del Papiloma Humano)?

Kit de PCR rápida para la detección molecular del Virus del Papiloma Humano, específico para los genotipos de alto riesgo oncogénico 16, 18, 31, 33 y 45, en exudado cervicovaginal o uretral (incluye hisopos). Amplificación isotérmica con resultado en 60 minutos, sin termociclador convencional; requiere el termobloque digital DB100 del Laboratorio Portable. Caja con 10 reacciones y 2 controles.

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLVPH01	PCR rápida para VPH (Virus del Papiloma Humano)	Exudado cervicovaginal/ uretral	10	Reacciones	$2,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.

PCR rápida-LAMP para Enterococcus faecalis

AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA RT-LAMP



Reseña

¿Qué es la PCR rápida-LAMP para Enterococcus faecalis?

PCR rápida RT-LAMP que amplifica el ADN de Enterococcus faecalis de manera isotérmica, sin termociclador. Enterococcus faecalis se emplea como indicador de contaminación fecal y de deficiencias de saneamiento; es relevante en el análisis de agua, superficies de proceso y productos lácteos o cárnicos.

amunet

Modo de uso

Consulte el procedimiento en el instructivo incluido en el kit.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave	Prueba	Muestra	Unidades por caja	Presentación	Precio*
DLENT01	PCR rápida-LAMP para Enterococcus faecalis	Agua / superficies / alimentos	10	Reacciones	$1,650.00

*Precios en MXN, no incluyen IVA. Vigentes al 13 de noviembre de 2026.



amunet

CATÁLOGO DE **PRUEBAS RÁPIDAS**

25 sur 3107, Col Benito
Juárez, Puebla, Puebla 72410

222 2257979

info@amunet.com.mx

Conéctate con nosotros

www.amunet.com.mx

Contamos con una sensibilidad y especificidad arriba del 90%